

수원시 영통구 동수원로 540  
법조빌딩 1층  
[별지 제41호서식]

공증  
인가 **법무법인 효원**

(TEL) (031)214-7733  
(FAX) (031)214-7732

Registered No. 2025 - 106

# NOTARIAL CERTIFICATE

HYOWON LAW FIRM & NOTARY OFFICE  
540, Dongsuwon-ro  
Suwon-si, Gyeonggi-do, KOREA



Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
www.rns-dramnadzor.gov.ru

20.12.2024

«Утверждено»

20  
Ким Дуг Су (Kim Dug Soo)  
Генеральный директор



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**Брекет ортодонтический GNI в наборах**

Версия 2



Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
www.goszdravnadzor.gov.ru

## 1. Наименование изделия

Брекет ортодонтический GNI в наборах

### I. Варианты исполнения:

1. Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Lower Roth 022, VAR-22-031  
состав: брекет VAR-22-31 (4 шт), брекет VAR-22-33H (1 шт), брекет VAR-22-43H (1 шт);
2. Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Upper Roth 022, VAR-22-301  
состав: брекет VAR-22-11 (1 шт), брекет VAR-22-12 (1 шт), брекет VAR-22-13H (1 шт), брекет VAR-22-21 (1 шт), брекет VAR-22-22 (1 шт), брекет VAR-22-23H (1 шт);
3. Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Upper/Lower Roth 022, VAR-22-331  
состав: брекет VAR-22-31 (4 шт), брекет VAR-22-33H (1 шт), брекет VAR-22-43H (1 шт), брекет VAR-22-11 (1 шт), брекет VAR-22-12 (1 шт), брекет VAR-22-13H (1 шт), брекет VAR-22-21 (1 шт), брекет VAR-22-22 (1 шт), брекет VAR-22-23H (1 шт);
4. Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Lower Roth 022, VAR-22-053  
состав: брекет VAR-22-31 (4 шт), брекет VAR-22-33H (1 шт), брекет VAR-22-34H (1 шт), брекет VAR-22-35H (1 шт), брекет VAR-22-43H (1 шт), брекет VAR-22-44H (1 шт), брекет VAR-22-45H (1 шт);
5. Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Upper Roth 022, VAR-22-503  
состав: брекет VAR-22-11 (1 шт), брекет VAR-22-12 (1 шт), брекет VAR-22-13H (1 шт), брекет VAR-22-14H (2 шт), брекет VAR-22-21 (1 шт), брекет VAR-22-22 (1 шт), брекет VAR-22-23H (1 шт), брекет VAR-22-24H (2 шт);
6. Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Upper/Lower Roth 022, VAR-22-553  
состав: брекет VAR-22-31 (4 шт), брекет VAR-22-33H (1 шт), брекет VAR-22-34H (1 шт), брекет VAR-22-35H (1 шт), брекет VAR-22-43H (1 шт), брекет VAR-22-44H (1 шт), брекет VAR-22-45H (1 шт), брекет VAR-22-11 (1 шт), брекет VAR-22-12 (1 шт), брекет VAR-22-13H (1 шт), брекет VAR-22-14H (2 шт), брекет VAR-22-21 (1 шт), брекет VAR-22-22 (1 шт), брекет VAR-22-23H (1 шт), брекет VAR-22-24H (2 шт);
7. Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Lower MBT 022, VAM-22-031  
состав: брекет VAM-22-31 (4 шт), брекет VAM-22-33H (1 шт), брекет VAM-22-43H (1 шт);
8. Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Upper MBT 022, VAM-22-301  
состав: брекет VAM-22-11 (1 шт), брекет VAM-22-12 (1 шт), брекет VAM-22-13H (1 шт), брекет VAM-22-21 (1 шт), брекет VAM-22-22 (1 шт), брекет VAM-22-23H (1 шт);
9. Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, VAM-22-331  
состав: брекет VAM-22-31 (4 шт), брекет VAM-22-33H (1 шт), брекет VAM-22-43H (1 шт), брекет VAM-22-11 (1 шт), брекет VAM-22-12 (1 шт), брекет VAM-22-13H (1 шт), брекет VAM-22-21 (1 шт), брекет VAM-22-22 (1 шт), брекет VAM-22-23H (1 шт);
10. Набор брекетов Venus-A 5-5 3H Lower MBT 022, VAM-22-051  
состав: брекет VAM-22-31 (4 шт), брекет VAM-22-33H (1 шт), брекет VAM-22-34 (1 шт), брекет VAM-22-35 (1 шт), брекет VAM-22-43H (1 шт), брекет VAM-22-44 (1 шт), брекет VAM-22-45 (1 шт);
11. Набор брекетов Venus-A 5-5 3H Upper MBT 022, VAM-22-501  
состав: брекет VAM-22-11 (1 шт), брекет VAM-22-12 (1 шт), брекет VAM-22-13H (1 шт), брекет VAM-22-14 (2 шт), брекет VAM-22-21 (1 шт), брекет VAM-22-22 (1 шт), брекет VAM-22-23H (1 шт), брекет VAM-22-24 (2 шт);
12. Набор брекетов Venus-A 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, VAM-22-551  
состав: брекет VAM-22-31 (4 шт), брекет VAM-22-33H (1 шт), брекет VAM-22-34 (1 шт), брекет VAM-22-35 (1 шт), брекет VAM-22-43H (1 шт), брекет VAM-22-44 (1 шт), брекет VAM-22-45 (1 шт), брекет VAM-22-11 (1 шт), брекет VAM-22-12 (1 шт), брекет VAM-22-13H (1 шт), брекет VAM-22-14 (2 шт), брекет VAM-22-21 (1 шт), брекет VAM-22-22 (1 шт), брекет VAM-22-23H (1 шт), брекет VAM-22-24 (2 шт);
13. Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Lower MBT 022, VAM-22-053  
состав: брекет VAM-22-31 (4 шт), брекет VAM-22-33H (1 шт), брекет VAM-22-34H (1 шт), брекет VAM-22-35H (1 шт), брекет VAM-22-43H (1 шт), брекет VAM-22-44H (1 шт), брекет VAM-22-45H (1 шт);
14. Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Lower MBT 022, VAM-22-503  
состав: брекет VAM-22-11 (1 шт), брекет VAM-22-12 (1 шт), брекет VAM-22-13H (1 шт), брекет VAM-22-14H (2 шт), брекет VAM-22-21 (1 шт), брекет VAM-22-22 (1 шт), брекет VAM-22-23H (1 шт), брекет VAM-22-24H (2 шт);
15. Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, VAM-22-553

состав: брекет VAM-22-31 (4 шт), брекет VAM-22-33H (1 шт), брекет VAM-22-34H (1 шт), брекет VAM-22-35H (1 шт), брекет VAM-22-43H (1 шт), брекет VAM-22-44H (1 шт), брекет VAM-22-45H (1 шт), брекет VAM-22-11 (1 шт), брекет VAM-22-12 (1 шт), брекет VAM-22-13H (1 шт), брекет VAM-22-14H (2 шт), брекет VAM-22-21 (1 шт), брекет VAM-22-22 (1 шт), брекет VAM-22-23H (1 шт), брекет VAM-22-24H (2 шт);

16. Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Lower Roth 022, VPR-22-031

состав: брекет VPR-22-31 (4 шт), брекет VPR-22-33H (1 шт), брекет VPR-22-43H (1 шт);

17. Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Upper Roth 022, VPR-22-301

состав: брекет VPR-22-11 (1 шт), брекет VPR-22-12 (1 шт), брекет VPR-22-13H (1 шт), брекет VPR-22-21 (1 шт), брекет VPR-22-22 (1 шт), брекет VPR-22-23H (1 шт);

18. Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Upper/Lower Roth 022, VPR-22-331

состав: брекет VPR-22-31 (4 шт), брекет VPR-22-33H (1 шт), брекет VPR-22-43H (1 шт), брекет VPR-22-11 (1 шт), брекет VPR-22-12 (1 шт), брекет VPR-22-13H (1 шт), брекет VPR-22-21 (1 шт), брекет VPR-22-22 (1 шт), брекет VPR-22-23H (1 шт);

19. Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Lower Roth 022, VPR-22-053

состав: брекет VPR-22-31 (4 шт), брекет VPR-22-33H (1 шт), брекет VPR-22-34H (1 шт), брекет VPR-22-35H (1 шт), брекет VPR-22-43H (1 шт), брекет VPR-22-44H (1 шт), брекет VPR-22-45H (1 шт);

20. Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Upper Roth 022, VPR-22-503

состав: брекет VPR-22-11 (1 шт), брекет VPR-22-12 (1 шт), брекет VPR-22-13H (1 шт), брекет VPR-22-14H (2 шт), брекет VPR-22-21 (1 шт), брекет VPR-22-22 (1 шт), брекет VPR-22-23H (1 шт), брекет VPR-22-24H (2 шт);

21. Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Upper/Lower Roth 022, VPR-22-553

состав: брекет VPR-22-31 (4 шт), брекет VPR-22-33H (1 шт), брекет VPR-22-34H (1 шт), брекет VPR-22-35H (1 шт), брекет VPR-22-43H (1 шт), брекет VPR-22-44H (1 шт), брекет VPR-22-45H (1 шт), брекет VPR-22-11 (1 шт), брекет VPR-22-12 (1 шт), брекет VPR-22-13H (1 шт), брекет VPR-22-14H (2 шт), брекет VPR-22-21 (1 шт), брекет VPR-22-22 (1 шт), брекет VPR-22-23H (1 шт), брекет VPR-22-24H (2 шт);

22. Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Lower MBT 022, VPM-22-031

состав: брекет VPM-22-31 (4 шт), брекет VPM-22-33H (1 шт), брекет VPM-22-43H (1 шт);

23. Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Upper MBT 022, VPM-22-301

состав: брекет VPM-22-11 (1 шт), брекет VPM-22-12 (1 шт), брекет VPM-22-13H (1 шт), брекет VPM-22-21 (1 шт), брекет VPM-22-22 (1 шт), брекет VPM-22-23H (1 шт);

24. Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, VPM-22-331

состав: брекет VPM-22-31 (4 шт), брекет VPM-22-33H (1 шт), брекет VPM-22-43H (1 шт), брекет VPM-22-11 (1 шт), брекет VPM-22-12 (1 шт), брекет VPM-22-13H (1 шт), брекет VPM-22-21 (1 шт), брекет VPM-22-22 (1 шт), брекет VPM-22-23H (1 шт);

25. Набор брекетов Venus-P 5-5 3H Lower MBT 022, VPM-22-051

состав: брекет VPM-22-31 (4 шт), брекет VPM-22-33H (1 шт), брекет VPM-22-34 (1 шт), брекет VPM-22-35 (1 шт), брекет VPM-22-43H (1 шт), брекет VPM-22-44 (1 шт), брекет VPM-22-45 (1 шт);

26. Набор брекетов Venus-P 5-5 3H Upper MBT 022, VPM-22-501

состав: брекет VPM-22-11 (1 шт), брекет VPM-22-12 (1 шт), брекет VPM-22-13H (1 шт), брекет VPM-22-14 (2 шт), брекет VPM-22-21 (1 шт), брекет VPM-22-22 (1 шт), брекет VPM-22-23H (1 шт), брекет VPM-22-24 (2 шт);

27. Набор брекетов Venus-P 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, VPM-22-551

состав: брекет VPM-22-31 (4 шт), брекет VPM-22-33H (1 шт), брекет VPM-22-34 (1 шт), брекет VPM-22-35 (1 шт), брекет VPM-22-43H (1 шт), брекет VPM-22-44 (1 шт), брекет VPM-22-45 (1 шт), брекет VPM-22-11 (1 шт), брекет VPM-22-12 (1 шт), брекет VPM-22-13H (1 шт), брекет VPM-22-14 (2 шт), брекет VPM-22-21 (1 шт), брекет VPM-22-22 (1 шт), брекет VPM-22-23H (1 шт), брекет VPM-22-24 (2 шт);

28. Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Lower MBT 022, VPM-22-053

состав: брекет VPM-22-31 (4 шт), брекет VPM-22-33H (1 шт), брекет VPM-22-34H (1 шт), брекет VPM-22-35H (1 шт), брекет VPM-22-43H (1 шт), брекет VPM-22-44H (1 шт), брекет VPM-22-45H (1 шт);

29. Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Upper MBT 022, VPM-22-503

состав: брекет VPM-22-11 (1 шт), брекет VPM-22-12 (1 шт), брекет VPM-22-13H (1 шт), брекет VPM-22-14H (2 шт), брекет VPM-22-21 (1 шт), брекет VPM-22-22 (1 шт), брекет VPM-22-23H (1 шт), брекет VPM-22-24H (2 шт);

30. Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, VPM-22-553

- состав: брекет VPM-22-31 (4 шт), брекет VPM-22-33H (1 шт), брекет VPM-22-34H (1 шт), брекет VPM-22-35H (1 шт), брекет VPM-22-43H (1 шт), брекет VPM-22-44H (1 шт), брекет VPM-22-45H (1 шт), брекет VPM-22-11 (1 шт), брекет VPM-22-12 (1 шт), брекет VPM-22-13H (1 шт), брекет VPM-22-14H (2 шт), брекет VPM-22-21 (1 шт), брекет VPM-22-22 (1 шт), брекет VPM-22-23H (1 шт), брекет VPM-22-24H (2 шт).
31. Набор брекетов Rose 3-3 3H Lower Roth 022, RCR-22-031  
состав: брекет RCR-22-31 (4 шт), брекет RCR-22-33H (1 шт), брекет RCR-22-43H (1 шт);
32. Набор брекетов Rose 3-3 3H Upper Roth 022, RCR-22-301  
состав: брекет RCR-22-11 (1 шт), брекет RCR-22-12 (1 шт), брекет RCR-22-13H (1 шт), брекет RCR-22-21 (1 шт), брекет RCR-22-22 (1 шт), брекет RCR-22-23H (1 шт);
33. Набор брекетов Rose 3-3 3H Upper/Lower Roth 022, RCR-22-331  
состав: брекет RCR-22-31 (4 шт), брекет RCR-22-33H (1 шт), брекет RCR-22-43H (1 шт), брекет RCR-22-11 (1 шт), брекет RCR-22-12 (1 шт), брекет RCR-22-13H (1 шт), брекет RCR-22-21 (1 шт), брекет RCR-22-22 (1 шт), брекет RCR-22-23H (1 шт);
34. Набор брекетов Rose 5-5 345H Lower Roth 022, RCR-22-053  
состав: брекет RCR-22-31 (4 шт), брекет RCR-22-33H (1 шт), брекет RCR-22-34H (1 шт), брекет RCR-22-35H (1 шт), брекет RCR-22-43H (1 шт), брекет RCR-22-44H (1 шт), брекет RCR-22-45H (1 шт);
35. Набор брекетов Rose 5-5 345H Upper Roth 022, RCR-22-503  
состав: брекет RCR-22-11 (1 шт), брекет RCR-22-12 (1 шт), брекет RCR-22-13H (1 шт), брекет RCR-22-14H (2 шт), брекет RCR-22-21 (1 шт), брекет RCR-22-22 (1 шт), брекет RCR-22-23H (1 шт), брекет RCR-22-24H (2 шт);
36. Набор брекетов Rose 5-5 345H Upper/Lower Roth 022, RCR-22-553  
состав: брекет RCR-22-31 (4 шт), брекет RCR-22-33H (1 шт), брекет RCR-22-34H (1 шт), брекет RCR-22-35H (1 шт), брекет RCR-22-43H (1 шт), брекет RCR-22-44H (1 шт), брекет RCR-22-45H (1 шт), брекет RCR-22-11 (1 шт), брекет RCR-22-12 (1 шт), брекет RCR-22-13H (1 шт), брекет RCR-22-14H (2 шт), брекет RCR-22-21 (1 шт), брекет RCR-22-22 (1 шт), брекет RCR-22-23H (1 шт), брекет RCR-22-24H (2 шт);
37. Набор брекетов Rose 3-3 3H Lower MBT 022, RCM-22-031  
состав: брекет RCM-22-31 (4 шт), брекет RCM-22-33H (1 шт), брекет RCM-22-43H (1 шт);
38. Набор брекетов Rose 3-3 3H Upper MBT 022, RCM-22-301  
состав: брекет RCM-22-11 (1 шт), брекет RCM-22-12 (1 шт), брекет RCM-22-13H (1 шт), брекет RCM-22-21 (1 шт), брекет RCM-22-22 (1 шт), брекет RCM-22-23H (1 шт);
39. Набор брекетов Rose 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, RCM-22-331  
состав: брекет RCM-22-31 (4 шт), брекет RCM-22-33H (1 шт), брекет RCM-22-43H (1 шт), брекет RCM-22-11 (1 шт), брекет RCM-22-12 (1 шт), брекет RCM-22-13H (1 шт), брекет RCM-22-21 (1 шт), брекет RCM-22-22 (1 шт), брекет RCM-22-23H (1 шт);
40. Набор брекетов Rose 5-5 3H Lower MBT 022, RCM-22-051  
состав: брекет RCM-22-31 (4 шт), брекет RCM-22-33H (1 шт), брекет RCM-22-34 (1 шт), брекет RCM-22-35 (1 шт), брекет RCM-22-43H (1 шт), брекет RCM-22-44 (1 шт), брекет RCM-22-45 (1 шт);
41. Набор брекетов Rose 5-5 3H Upper MBT 022, RCM-22-501  
состав: брекет RCM-22-11 (1 шт), брекет RCM-22-12 (1 шт), брекет RCM-22-13H (1 шт), брекет RCM-22-14 (2 шт), брекет RCM-22-21 (1 шт), RCM-22-22 (1 шт), брекет RCM-22-23H (1 шт), брекет RCM-22-24 (2 шт);
42. Набор брекетов Rose 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, RCM-22-551  
состав: брекет RCM-22-31 (4 шт), брекет RCM-22-33H (1 шт), брекет RCM-22-34 (1 шт), брекет RCM-22-35 (1 шт), брекет RCM-22-43H (1 шт), брекет RCM-22-44 (1 шт), брекет RCM-22-45 (1 шт), брекет RCM-22-11 (1 шт), брекет RCM-22-12 (1 шт), RCM-22-22 (1 шт), брекет RCM-22-13H (1 шт), брекет RCM-22-14 (2 шт), брекет RCM-22-21 (1 шт), брекет RCM-22-23H (1 шт), брекет RCM-22-24 (2 шт);
43. Набор брекетов Rose 5-5 345H Lower MBT 022, RCM-22-053  
состав: брекет RCM-22-31 (4 шт), брекет RCM-22-33H (1 шт), брекет RCM-22-34H (1 шт), брекет RCM-22-35H (1 шт), брекет RCM-22-43H (1 шт), брекет RCM-22-44H (1 шт), брекет RCM-22-45H (1 шт);
44. Набор брекетов Rose 5-5 345H Upper MBT 022, RCM-22-503  
состав: брекет RCM-22-11 (1 шт), брекет RCM-22-12 (1 шт), брекет RCM-22-13H (1 шт), брекет RCM-22-14H (2 шт), брекет RCM-22-21 (1 шт), брекет RCM-22-22 (1 шт), брекет RCM-22-23H (1 шт), брекет RCM-22-24H (2 шт);
45. Набор брекетов Rose 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, RCM-22-553  
состав: брекет RCM-22-31 (4 шт), брекет RCM-22-33H (1 шт), брекет RCM-22-34H (1 шт), брекет RCM-22-35H (1 шт), брекет RCM-22-43H (1 шт), брекет RCM-22-44H (1 шт), брекет RCM-22-45H (1 шт), брекет RCM-



- состав: брекет RSR-22-31 (4 шт), брекет RSR-22-33H (1 шт), брекет RSR-22-34H (1 шт), брекет RSR-22-35H (1 шт), брекет RSR-22-43H (1 шт), брекет RSR-22-44H (1 шт), брекет RSR-22-45H (1 шт);
62. Набор брекетов Rosa 5-5 345H Upper Roth 022, RSR-22-503  
состав: брекет RSR-22-11 (1 шт), брекет RSR-22-12 (1 шт), брекет RSR-22-13H (1 шт), брекет RSR-22-14H (2 шт), брекет RSR-22-21 (1 шт), брекет RSR-22-22 (1 шт), брекет RSR-22-23H (1 шт), брекет RSR-22-24H (2 шт);
63. Набор брекетов Rosa 5-5 345H Upper/Lower Roth 022, RSR-22-553  
состав: брекет RSR-22-31 (4 шт), брекет RSR-22-33H (1 шт), брекет RSR-22-34H (1 шт), брекет RSR-22-35H (1 шт), брекет RSR-22-43H (1 шт), брекет RSR-22-44H (1 шт), брекет RSR-22-45H (1 шт), брекет RSR-22-11 (1 шт), брекет RSR-22-12 (1 шт), брекет RSR-22-13H (1 шт), брекет RSR-22-14H (2 шт), брекет RSR-22-21 (1 шт), брекет RSR-22-22 (1 шт), брекет RSR-22-23H (1 шт), брекет RSR-22-24H (2 шт);
64. Набор брекетов Rosa 3-3 3H Lower MBT 018, RSM-18-031  
состав: брекет RSM-18-31 (4 шт), брекет RSM-18-33H (1 шт), брекет RSM-18-43H (1 шт);
65. Набор брекетов Rosa 3-3 3H Upper MBT 018, RSM-18-301  
состав: брекет RSM-18-11 (1 шт), брекет RSM-18-12 (1 шт), брекет RSM-18-13H (1 шт), брекет RSM-18-21 (1 шт), брекет RSM-18-22 (1 шт), брекет RSM-18-23H (1 шт);
66. Набор брекетов Rosa 3-3 3H Upper/Lower MBT 018, RSM-18-331  
состав: брекет RSM-18-31 (4 шт), брекет RSM-18-33H (1 шт), брекет RSM-18-43H (1 шт), брекет RSM-18-11 (1 шт), брекет RSM-18-12 (1 шт), брекет RSM-18-13H (1 шт), брекет RSM-18-21 (1 шт), брекет RSM-18-22 (1 шт), брекет RSM-18-23H (1 шт);
67. Набор брекетов Rosa 5-5 3H Lower MBT 018, RSM-18-051  
состав: брекет RSM-18-31 (4 шт), брекет RSM-18-33H (1 шт), брекет RSM-18-34 (1 шт), брекет RSM-18-35 (1 шт), брекет RSM-18-43H (1 шт), брекет RSM-18-44 (1 шт), брекет RSM-18-45 (1 шт);
68. Набор брекетов Rosa 5-5 3H Upper MBT 018, RSM-18-501  
состав: брекет RSM-18-11 (1 шт), брекет RSM-18-12 (1 шт), брекет RSM-18-13H (1 шт), брекет RSM-18-14 (2 шт), брекет RSM-18-21 (1 шт), брекет RSM-18-22 (1 шт), брекет RSM-18-23H (1 шт), брекет RSM-18-24 (1 шт);
69. Набор брекетов Rosa 5-5 3H Upper/Lower MBT 018, RSM-18-551  
состав: брекет RSM-18-31 (4 шт), брекет RSM-18-33H (1 шт), брекет RSM-18-34 (1 шт), брекет RSM-18-35 (1 шт), брекет RSM-18-43H (1 шт), брекет RSM-18-44 (1 шт), брекет RSM-18-45 (1 шт), брекет RSM-18-11 (1 шт), брекет RSM-18-12 (1 шт), брекет RSM-18-13H (1 шт), брекет RSM-18-14 (2 шт), брекет RSM-18-21 (1 шт), брекет RSM-18-22 (1 шт), брекет RSM-18-23H (1 шт), брекет RSM-18-24 (1 шт);
70. Набор брекетов Rosa 5-5 345H Lower MBT 018, RSM-18-053  
состав: брекет RSM-18-31 (4 шт), брекет RSM-18-33H (1 шт), брекет RSM-18-34H (1 шт), брекет RSM-18-35H (1 шт), брекет RSM-18-43H (1 шт), брекет RSM-18-44H (1 шт), брекет RSM-18-45H (1 шт);
71. Набор брекетов Rosa 5-5 345H Upper MBT 018, RSM-18-503  
состав: брекет RSM-18-11 (1 шт), брекет RSM-18-12 (1 шт), брекет RSM-18-13H (1 шт), брекет RSM-18-14H (2 шт), брекет RSM-18-21 (1 шт), брекет RSM-18-22 (1 шт), брекет RSM-18-23H (1 шт), брекет RSM-18-24H (2 шт);
72. Набор брекетов Rosa 5-5 345H Upper/Lower MBT 018, RSM-18-553  
состав: брекет RSM-18-31 (4 шт), брекет RSM-18-33H (1 шт), брекет RSM-18-34H (1 шт), брекет RSM-18-35H (1 шт), брекет RSM-18-43H (1 шт), брекет RSM-18-44H (1 шт), брекет RSM-18-45H (1 шт), брекет RSM-18-11 (1 шт), брекет RSM-18-12 (1 шт), брекет RSM-18-13H (1 шт), брекет RSM-18-14H (2 шт), брекет RSM-18-21 (1 шт), брекет RSM-18-22 (1 шт), брекет RSM-18-23H (1 шт), брекет RSM-18-24H (2 шт);
73. Набор брекетов Rosa 3-3 3H Lower MBT 022, RSM-22-031  
состав: брекет RSM-22-31 (4 шт), брекет RSM-22-33H (1 шт), брекет RSM-22-43H (1 шт);
74. Набор брекетов Rosa 3-3 3H Upper MBT 022, RSM-22-301  
состав: брекет RSM-22-11 (1 шт), (1 шт), брекет RSM-22-12 (1 шт), брекет RSM-22-13H (1 шт), брекет RSM-22-21 (1 шт), брекет RSM-22-22 (1 шт), брекет RSM-22-23H (1 шт);
75. Набор брекетов Rosa 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, RSM-22-331  
состав: брекет RSM-22-31 (4 шт), брекет RSM-22-33H (1 шт), брекет RSM-22-43H (1 шт), брекет RSM-22-11 (1 шт), (1 шт), брекет RSM-22-12 (1 шт), брекет RSM-22-13H (1 шт), брекет RSM-22-21 (1 шт), брекет RSM-22-22 (1 шт), брекет RSM-22-23H (1 шт);
76. Набор брекетов Rosa 5-5 3H Lower MBT 022, RSM-22-051

состав: брекет RSM-22-31 (4 шт), брекет RSM-22-33H (1 шт), брекет RSM-22-34 (1 шт), брекет RSM-22-35 (1 шт), брекет RSM-22-43H (1 шт), брекет RSM-22-44 (1 шт), брекет RSM-22-45 (1 шт);

77. Набор брекетов Rosa 5-5 3H Upper MBT 022, RSM-22-501

состав: брекет RSM-22-11 (1 шт), брекет RSM-22-12 (1 шт), брекет RSM-22-13H (1 шт), брекет RSM-22-14 (2 шт), брекет RSM-22-21 (1 шт), брекет RSM-22-22 (1 шт), брекет RSM-22-23H (1 шт), брекет RSM-22-24 (2 шт);

78. Набор брекетов Rosa 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, RSM-22-551

состав: брекет RSM-22-31 (4 шт), брекет RSM-22-33H (1 шт), брекет RSM-22-34 (1 шт), брекет RSM-22-35 (1 шт), брекет RSM-22-43H (1 шт), брекет RSM-22-44 (1 шт), брекет RSM-22-45 (1 шт), брекет RSM-22-11 (1 шт), брекет RSM-22-12 (1 шт), брекет RSM-22-13H (1 шт), брекет RSM-22-14 (2 шт), брекет RSM-22-21 (1 шт), брекет RSM-22-22 (1 шт), брекет RSM-22-23H (1 шт), брекет RSM-22-24 (2 шт);

79. Набор брекетов Rosa 5-5 345H Lower MBT 022, RSM-22-053

состав: брекет RSM-22-31 (4 шт), брекет RSM-22-33H (1 шт), брекет RSM-22-34H (1 шт), брекет RSM-22-35H (1 шт), брекет RSM-22-43H (1 шт), брекет RSM-22-44H (1 шт), брекет RSM-22-45H (1 шт);

80. Набор брекетов Rosa 5-5 345H Upper MBT 022, RSM-22-503

состав: брекет RSM-22-11 (1 шт), брекет RSM-22-12 (1 шт), брекет RSM-22-13H (1 шт), брекет RSM-22-14H (2 шт), брекет RSM-22-21 (1 шт), брекет RSM-22-22 (1 шт), брекет RSM-22-23H (1 шт), брекет RSM-22-24H (2 шт);

81. Набор брекетов Rosa 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, RSM-22-553

состав: брекет RSM-22-31 (4 шт), брекет RSM-22-33H (1 шт), брекет RSM-22-34H (1 шт), брекет RSM-22-35H (1 шт), брекет RSM-22-43H (1 шт), брекет RSM-22-44H (1 шт), брекет RSM-22-45H (1 шт), брекет RSM-22-11 (1 шт), брекет RSM-22-12 (1 шт), брекет RSM-22-13H (1 шт), брекет RSM-22-14H (2 шт), брекет RSM-22-21 (1 шт), брекет RSM-22-22 (1 шт), брекет RSM-22-23H (1 шт), брекет RSM-22-24H (2 шт);

82. Набор брекетов Zeus-A 3-3 3H Lower Roth 022, ZAR-22-031

состав: брекет ZAR-22-31 (4 шт), брекет ZAR-22-33H (1 шт), брекет ZAR-22-43H (1 шт);

83. Набор брекетов Zeus-A 3-3 3H Upper Roth 022, ZAR-22-301

состав: брекет ZAR-22-11 (1 шт), брекет ZAR-22-12 (1 шт), брекет ZAR-22-13H (1 шт), брекет ZAR-22-21 (1 шт), брекет ZAR-22-22 (1 шт), брекет ZAR-22-23H (1 шт);

84. Набор брекетов Zeus-A 3-3 3H Upper/Lower Roth 022, ZAR-22-331

состав: брекет ZAR-22-31 (4 шт), брекет ZAR-22-33H (1 шт), брекет ZAR-22-43H (1 шт), брекет ZAR-22-11 (1 шт), брекет ZAR-22-12 (1 шт), брекет ZAR-22-13H (1 шт), брекет ZAR-22-21 (1 шт), брекет ZAR-22-22 (1 шт), брекет ZAR-22-23H (1 шт);

85. Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Lower Roth 022, ZAR-22-053

состав: брекет ZAR-22-31 (4 шт), брекет ZAR-22-33H (1 шт), брекет ZAR-22-34H (1 шт), брекет ZAR-22-35H (1 шт), брекет ZAR-22-43H (1 шт), брекет ZAR-22-44H (1 шт), брекет ZAR-22-45H (1 шт);

86. Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Upper Roth 022, ZAR-22-503

состав: брекет ZAR-22-11 (1 шт), брекет ZAR-22-12 (1 шт), брекет ZAR-22-13H (1 шт), брекет ZAR-22-14H (2 шт), брекет ZAR-22-21 (1 шт), брекет ZAR-22-22 (1 шт), брекет ZAR-22-23H (1 шт), брекет ZAR-22-24H (2 шт);

87. Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Upper/Lower Roth 022, ZAR-22-553

состав: брекет ZAR-22-31 (4 шт), брекет ZAR-22-33H (1 шт), брекет ZAR-22-34H (1 шт), брекет ZAR-22-35H (1 шт), брекет ZAR-22-43H (1 шт), брекет ZAR-22-44H (1 шт), брекет ZAR-22-45H (1 шт), брекет ZAR-22-11 (1 шт), брекет ZAR-22-12 (1 шт), брекет ZAR-22-13H (1 шт), брекет ZAR-22-14H (2 шт), брекет ZAR-22-21 (1 шт), брекет ZAR-22-22 (1 шт), брекет ZAR-22-23H (1 шт), брекет ZAR-22-24H (2 шт);

88. Набор брекетов Zeus-A 3-3 3H Lower MBT 022, ZAM-22-031

состав: брекет ZAM-22-31 (4 шт), брекет ZAM-22-33H (1 шт), брекет ZAM-22-43H (1 шт);

89. Набор брекетов Zeus-A 3-3 3H Upper MBT 022, ZAM-22-301

состав: брекет ZAM-22-11 (1 шт), брекет ZAM-22-12 (1 шт), брекет ZAM-22-13H (1 шт), брекет ZAM-22-21 (1 шт), брекет ZAM-22-22 (1 шт), брекет ZAM-22-23H (1 шт);

90. Набор брекетов Zeus-A 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, ZAM-22-331

состав: брекет ZAM-22-31 (4 шт), брекет ZAM-22-33H (1 шт), брекет ZAM-22-43H (1 шт), брекет ZAM-22-11 (1 шт), брекет ZAM-22-12 (1 шт), брекет ZAM-22-13H (1 шт), брекет ZAM-22-21 (1 шт), брекет ZAM-22-22 (1 шт), брекет ZAM-22-23H (1 шт);

91. Набор брекетов Zeus-A 5-5 3H Lower MBT 022, ZAM-22-051

- состав: брекет ZAM-22-31 (4 шт), брекет ZAM-22-33H (1 шт), брекет ZAM-22-34 (1 шт), брекет ZAM-22-35 (1 шт), брекет ZAM-22-43H (1 шт), брекет ZAM-22-44 (1 шт), брекет ZAM-22-45 (1 шт);
92. Набор брекетов Zeus-A 5-5 3H Upper MBT 022, ZAM-22-501  
состав: брекет ZAM-22-11 (1 шт), брекет ZAM-22-12 (1 шт), брекет ZAM-22-13H (1 шт), брекет ZAM-22-14 (2 шт), брекет ZAM-22-21 (1 шт), брекет ZAM-22-22 (1 шт), брекет ZAM-22-23H (1 шт), брекет ZAM-22-24 (2 шт);
93. Набор брекетов Zeus-A 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, ZAM-22-551  
состав: брекет ZAM-22-31 (4 шт), брекет ZAM-22-33H (1 шт), брекет ZAM-22-34 (1 шт), брекет ZAM-22-35 (1 шт), брекет ZAM-22-43H (1 шт), брекет ZAM-22-44 (1 шт), брекет ZAM-22-45 (1 шт), брекет ZAM-22-11 (1 шт), брекет ZAM-22-12 (1 шт), брекет ZAM-22-13H (1 шт), брекет ZAM-22-14 (2 шт), брекет ZAM-22-21 (1 шт), брекет ZAM-22-22 (1 шт), брекет ZAM-22-23H (1 шт), брекет ZAM-22-24 (2 шт);
94. Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Lower MBT 022, ZAM-22-053  
состав: брекет ZAM-22-31 (4 шт), брекет ZAM-22-33H (1 шт), брекет ZAM-22-34H (1 шт), брекет ZAM-22-35H (1 шт), брекет ZAM-22-43H (1 шт), брекет ZAM-22-44H (1 шт), брекет ZAM-22-45H (1 шт);
95. Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Upper MBT 022, ZAM-22-503  
состав: брекет ZAM-22-11 (1 шт), брекет ZAM-22-12 (1 шт), брекет ZAM-22-13H (1 шт), брекет ZAM-22-14H (2 шт), брекет ZAM-22-21 (1 шт), брекет ZAM-22-22 (1 шт), брекет ZAM-22-23H (1 шт), брекет ZAM-22-24H (2 шт);
96. Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, ZAM-22-553  
состав: брекет ZAM-22-31 (4 шт), брекет ZAM-22-33H (1 шт), брекет ZAM-22-34H (1 шт), брекет ZAM-22-35H (1 шт), брекет ZAM-22-43H (1 шт), брекет ZAM-22-44H (1 шт), брекет ZAM-22-45H (1 шт), брекет ZAM-22-11 (1 шт), брекет ZAM-22-12 (1 шт), брекет ZAM-22-13H (1 шт), брекет ZAM-22-14H (2 шт), брекет ZAM-22-21 (1 шт), брекет ZAM-22-22 (1 шт), брекет ZAM-22-23H (1 шт), брекет ZAM-22-24H (2 шт);
97. Набор брекетов Zeus-P 3-3 3H Lower Roth 018, ZPR-18-031  
состав: брекет ZPR-18-31 (4 шт), брекет ZPR-18-33H (1 шт), брекет ZPR-18-43H (1 шт);
98. Набор брекетов Zeus-P 3-3 3H Upper Roth 018, ZPR-18-301  
состав: брекет ZPR-18-11 (1 шт), брекет ZPR-18-12 (1 шт), брекет ZPR-18-12 (1 шт), брекет ZPR-18-21 (1 шт), брекет ZPR-18-22 (1 шт), брекет ZPR-18-23H (1 шт);
99. Набор брекетов Zeus-P 3-3 3H Upper/Lower Roth 018, ZPR-18-331  
состав: брекет ZPR-18-31 (4 шт), брекет ZPR-18-33H (1 шт), брекет ZPR-18-43H (1 шт), брекет ZPR-18-11 (1 шт), брекет ZPR-18-12 (1 шт), брекет ZPR-18-12 (1 шт), брекет ZPR-18-21 (1 шт), брекет ZPR-18-22 (1 шт), брекет ZPR-18-23H (1 шт);
100. Набор брекетов Zeus-P 5-5 345H Lower Roth 018, ZPR-18-053  
состав: брекет ZPR-18-31 (4 шт), брекет ZPR-18-33H (1 шт), брекет ZPR-18-34H (1 шт), брекет ZPR-18-35H (1 шт), брекет ZPR-18-43H (1 шт), брекет ZPR-18-44H (1 шт), брекет ZPR-18-45H (1 шт);
101. Набор брекетов Zeus-P 5-5 345H Upper Roth 018, ZPR-18-503  
состав: брекет ZPR-18-11 (1 шт), брекет ZPR-18-12 (1 шт), брекет ZPR-18-13H (1 шт), брекет ZPR-18-14H (2 шт), брекет ZPR-18-21 (1 шт), брекет ZPR-18-22 (1 шт), брекет ZPR-18-23H (1 шт), брекет ZPR-18-24H (2 шт);
102. Набор брекетов Zeus-P 5-5 345H Upper/Lower Roth 018, ZPR-18-553  
состав: брекет ZPR-18-31 (4 шт), брекет ZPR-18-33H (1 шт), брекет ZPR-18-34H (1 шт), брекет ZPR-18-35H (1 шт), брекет ZPR-18-43H (1 шт), брекет ZPR-18-44H (1 шт), брекет ZPR-18-45H (1 шт), брекет ZPR-18-11 (1 шт), брекет ZPR-18-12 (1 шт), брекет ZPR-18-13H (1 шт), брекет ZPR-18-14H (2 шт), брекет ZPR-18-21 (1 шт), брекет ZPR-18-22 (1 шт), брекет ZPR-18-23H (1 шт), брекет ZPR-18-24H (2 шт);
103. Набор брекетов Zeus-P 3-3 3H Lower Roth 022, ZPR-22-031  
состав: брекет ZPR-22-31 (4 шт), брекет ZPR-22-33H (1 шт), брекет ZPR-22-43H (1 шт);
104. Набор брекетов Zeus-P 3-3 3H Upper Roth 022, ZPR-22-301  
состав: брекет ZPR-22-11 (1 шт), брекет ZPR-22-12 (1 шт), брекет ZPR-22-13H (1 шт), брекет ZPR-22-21 (1 шт), брекет ZPR-22-22 (1 шт), брекет ZPR-22-23H (1 шт);
105. Набор брекетов Zeus-P 3-3 3H Upper/Lower Roth 022, ZPR-22-331  
состав: брекет ZPR-22-31 (1 шт), брекет ZPR-22-33H (1 шт), брекет ZPR-22-43H (1 шт), брекет ZPR-22-11 (1 шт), брекет ZPR-22-12 (1 шт), брекет ZPR-22-13H (1 шт), брекет ZPR-22-21 (1 шт), брекет ZPR-22-22 (1 шт), брекет ZPR-22-23H (1 шт);
106. Набор брекетов Zeus-P 5-5 3H Lower Roth 022, ZPR-22-051





состав: брекет M1R-22-31 (4 шт), брекет M1R-22-33H (1 шт), брекет M1R-22-34H (1 шт), брекет M1R-22-35H (1 шт), брекет M1R-22-43H (1 шт), брекет M1R-22-44H (1 шт), брекет M1R-22-45H (1 шт);

137. Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper Roth 022, M1R-22-503

состав: брекет M1R-22-11 (1 шт), брекет M1R-22-12 (1 шт), брекет M1R-22-13H (1 шт), брекет M1R-22-14H (2 шт), брекет M1R-22-21 (1 шт), брекет M1R-22-22 (1 шт), брекет M1R-22-23H (1 шт), брекет M1R-22-24H (2 шт);

138. Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper/Lower Roth 022, M1R-22-553

состав: брекет M1R-22-31 (4 шт), брекет M1R-22-33H (1 шт), брекет M1R-22-34H (1 шт), брекет M1R-22-35H (1 шт), брекет M1R-22-43H (1 шт), брекет M1R-22-44H (1 шт), брекет M1R-22-45H (1 шт), брекет M1R-22-11 (1 шт), брекет M1R-22-12 (1 шт), брекет M1R-22-13H (1 шт), брекет M1R-22-14H (2 шт), брекет M1R-22-21 (1 шт), брекет M1R-22-22 (1 шт), брекет M1R-22-23H (1 шт), брекет M1R-22-24H (2 шт);

139. Набор брекетов Meta 3-3 3H Lower MBT 018, M1M-18-031

состав: брекет M1M-18-31 (4 шт), брекет M1M-18-33H (1 шт), брекет M1M-18-43H (1 шт);

140. Набор брекетов Meta 3-3 3H Upper MBT 018, M1M-18-301

состав: брекет M1M-18-11 (1 шт), брекет M1M-18-12 (1 шт), брекет M1M-18-13H (1 шт), брекет M1M-18-21 (1 шт), брекет M1M-18-22 (1 шт), брекет M1M-18-23H (1 шт);

141. Набор брекетов Meta 3-3 3H Upper/Lower MBT 018, M1M-18-331

состав: брекет M1M-18-31 (4 шт), брекет M1M-18-33H (1 шт), брекет M1M-18-43H (1 шт), брекет M1M-18-11 (1 шт), брекет M1M-18-12 (1 шт), брекет M1M-18-13H (1 шт), брекет M1M-18-21 (1 шт), брекет M1M-18-22 (1 шт), брекет M1M-18-23H (1 шт);

142. Набор брекетов Meta 5-5 3H Lower MBT 018, M1M-18-051

состав: брекет M1M-18-31 (4 шт), брекет M1M-18-33H (1 шт), брекет M1M-18-34 (1 шт), брекет M1M-18-35 (1 шт), брекет M1M-18-43H (1 шт), брекет M1M-18-44 (1 шт), брекет M1M-18-45 (1 шт);

143. Набор брекетов Meta 5-5 3H Upper MBT 018, M1M-18-501

состав: брекет M1M-18-11 (1 шт), брекет M1M-18-12 (1 шт), брекет M1M-18-13H (1 шт), брекет M1M-18-14 (2 шт), брекет M1M-18-21 (1 шт), брекет M1M-18-22 (1 шт), брекет M1M-18-23H (1 шт), брекет M1M-18-24 (2 шт);

144. Набор брекетов Meta 5-5 3H Upper/Lower MBT 018, M1M-18-551

состав: брекет M1M-18-31 (4 шт), брекет M1M-18-33H (1 шт), брекет M1M-18-34 (1 шт), брекет M1M-18-35 (1 шт), брекет M1M-18-43H (1 шт), брекет M1M-18-44 (1 шт), брекет M1M-18-45 (1 шт), брекет M1M-18-11 (1 шт), брекет M1M-18-12 (1 шт), брекет M1M-18-13H (1 шт), брекет M1M-18-14 (2 шт), брекет M1M-18-21 (1 шт), брекет M1M-18-22 (1 шт), брекет M1M-18-23H (1 шт), брекет M1M-18-24 (2 шт);

145. Набор брекетов Meta 5-5 345H Lower MBT 018, M1M-18-053

состав: брекет M1M-18-31 (4 шт), брекет M1M-18-33H (1 шт), брекет M1M-18-34H (1 шт), брекет M1M-18-35H (1 шт), брекет M1M-18-43H (1 шт), брекет M1M-18-44H (1 шт), брекет M1M-18-45H (1 шт);

146. Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper MBT 018, M1M-18-503

состав: брекет M1M-18-11 (1 шт), брекет M1M-18-12 (1 шт), брекет M1M-18-13H (1 шт), брекет M1M-18-14H (2 шт), брекет M1M-18-21 (1 шт), брекет M1M-18-22 (1 шт), брекет M1M-18-23H (1 шт), брекет M1M-18-24H (2 шт);

147. Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper/Lower MBT 018, M1M-18-553

состав: брекет M1M-18-31 (4 шт), брекет M1M-18-33H (1 шт), брекет M1M-18-34H (1 шт), брекет M1M-18-35H (1 шт), брекет M1M-18-43H (1 шт), брекет M1M-18-44H (1 шт), брекет M1M-18-45H (1 шт), брекет M1M-18-11 (1 шт), брекет M1M-18-12 (1 шт), брекет M1M-18-13H (1 шт), брекет M1M-18-14H (2 шт), брекет M1M-18-21 (1 шт), брекет M1M-18-22 (1 шт), брекет M1M-18-23H (1 шт), брекет M1M-18-24H (2 шт);

148. Набор брекетов Meta 3-3 3H Lower MBT 022, M1M-22-031

состав: брекет M1M-22-31 (4 шт), брекет M1M-22-33H (1 шт), брекет M1M-22-43H (1 шт);

149. Набор брекетов Meta 3-3 3H Upper MBT 022, M1M-22-301

состав: брекет M1M-22-11 (1 шт), брекет M1M-22-12 (1 шт), брекет M1M-22-13H (1 шт), брекет M1M-22-21 (1 шт), брекет M1M-22-22 (1 шт), брекет M1M-22-23H (1 шт);

150. Набор брекетов Meta 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, M1M-22-331

состав: брекет M1M-22-31 (4 шт), брекет M1M-22-33H (1 шт), брекет M1M-22-43H (1 шт), брекет M1M-22-11 (1 шт), брекет M1M-22-12 (1 шт), брекет M1M-22-13H (1 шт), брекет M1M-22-21 (1 шт), брекет M1M-22-22 (1 шт), брекет M1M-22-23H (1 шт);

151. Набор брекетов Meta 5-5 3H Lower MBT 022, M1M-22-051

состав: брекет M1M-22-31 (4 шт), брекет M1M-22-33H (1 шт), брекет M1M-22-34 (1 шт), брекет M1M-22-35 (1 шт), брекет M1M-22-43H (1 шт), брекет M1M-22-44 (1 шт), брекет M1M-22-45 (1 шт);

152. Набор брекетов Meta 5-5 3H Upper MBT 022, M1M-22-501

состав: брекет M1M-22-11 (1 шт), брекет M1M-22-12 (1 шт), брекет M1M-22-13H (1 шт), брекет M1M-22-14 (2 шт), брекет M1M-22-21 (1 шт), брекет M1M-22-22 (1 шт), брекет M1M-22-23H (1 шт), брекет M1M-22-24 (2 шт);

153. Набор брекетов Meta 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, M1M-22-551

состав: брекет M1M-22-31 (4 шт), брекет M1M-22-33H (1 шт), брекет M1M-22-34 (1 шт), брекет M1M-22-35 (1 шт), брекет M1M-22-43H (1 шт), брекет M1M-22-44 (1 шт), брекет M1M-22-45 (1 шт), брекет M1M-22-11 (1 шт), брекет M1M-22-12 (1 шт), брекет M1M-22-13H (1 шт), брекет M1M-22-14 (2 шт), брекет M1M-22-21 (1 шт), брекет M1M-22-22 (1 шт), брекет M1M-22-23H (1 шт), брекет M1M-22-24 (2 шт);

154. Набор брекетов Meta 5-5 345H Lower MBT 022, M1M-22-053

состав: брекет M1M-22-31 (4 шт), брекет M1M-22-33H (1 шт), брекет M1M-22-34H (1 шт), брекет M1M-22-35H (1 шт), брекет M1M-22-43H (1 шт), брекет M1M-22-44H (1 шт), брекет M1M-22-45H (1 шт);

155. Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper MBT 022, M1M-22-503

состав: брекет M1M-22-11 (1 шт), брекет M1M-22-12 (1 шт), брекет M1M-22-13H (1 шт), брекет M1M-22-14H (2 шт), брекет M1M-22-21 (1 шт), брекет M1M-22-22 (1 шт), брекет M1M-22-23H (1 шт), брекет M1M-22-24H (2 шт);

156. Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, M1M-22-553

состав: брекет M1M-22-31 (4 шт), брекет M1M-22-33H (1 шт), брекет M1M-22-34H (1 шт), брекет M1M-22-35H (1 шт), брекет M1M-22-43H (1 шт), брекет M1M-22-44H (1 шт), брекет M1M-22-45H (1 шт), брекет M1M-22-11 (1 шт), брекет M1M-22-12 (1 шт), брекет M1M-22-13H (1 шт), брекет M1M-22-14H (2 шт), брекет M1M-22-21 (1 шт), брекет M1M-22-22 (1 шт), брекет M1M-22-23H (1 шт), брекет M1M-22-24H (2 шт);

II. Инструкция по применению – на бумажном носителе (1 экземпляр на транспортную упаковку) и в электронном виде.

*Далее по тексту – изделия, медицинские изделия, брекеты.*

## 2. Сведения о производителе, разработчике и уполномоченном представителе производителя

### Производитель:

GNI Co., Ltd., 5F 501, 63-12, Dongtancheomdansaneop 1-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

Тел.: +82-505-600-8880

Факс: +82-505-333-8880

E-mail: [info@gniortho.com](mailto:info@gniortho.com)

Веб-сайт: <http://www.gniortho.com>

### Разработчик:

GNI Co., Ltd., 5F 501, 63-12, Dongtancheomdansaneop 1-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

Тел.: +82-505-600-8880

Факс: +82-505-333-8880

E-mail: [info@gniortho.com](mailto:info@gniortho.com)

Веб-сайт: <http://www.gniortho.com>

### Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВ ДЕНТАЛЬ»

127015, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Вятская, д. 35, стр. 4

Тел./факс: 8 (499) 652-77-10

E-mail: [info@gl-dent.ru](mailto:info@gl-dent.ru)

Сайт: [www.gl-dent.ru](http://www.gl-dent.ru)

### 3. Классификация

Класс риска 2a в соответствии с Директивой MDD/93/42/EEC+2007/47/EC.

Изделие долгосрочного контакта (более 30 сут.) контактирующее со слизистыми оболочками полости рта и зубной эмалью.

### 4. Назначение изделия

Набор медицинских изделий, предназначенных для воздействия на форму и функции зубочелюстной системы для ортодонтического лечения.

### 5. Потенциальный потребитель

Квалифицированные специалисты – стоматологи- ортодонты.

### 6. Показания, область применения, противопоказания и возможные побочные эффекты

Показания: Ортодонтическое лечение, необходимое для исправления прикуса и неправильного положения зубов.

Область применения: стоматология (ортодонтия).

Противопоказания к применению:

1. Не использовать в отношении пациентов с неконтролируемым диабетом, с системными заболеваниями или алкогольной зависимостью;
2. Не использовать в отношении пациентов с резорбцией костной ткани или корней зубов;
3. Не использовать в отношении пациентов с аллергией на металлы (компоненты сплавов);
4. Не использовать в отношении пациентов с активным пародонтальным заболеванием;
5. Не использовать в отношении пациентов с ненадлежащей гигиеной ротовой полости;

Возможные побочные эффекты: Дефекты речи, аллергические реакции на материалы, из которых изготовлено медицинское изделие, а также возникновение язв, инфекций и других заболеваний слизистой полости рта.

Меры предосторожности.

#### 1. Предупреждение

- 1.1 Изделие предназначено для использования только медицинскими специалистами и не должно использоваться для других целей, кроме указанных в целевом назначении.
- 1.2 Перед использованием необходимо подтвердить, что пациент не страдает аллергией на металлы (компоненты сплавов);
- 1.3 Не использовать изделие, если оно повреждено.

#### 2. Общие меры предосторожности

- 2.1 Не применять избыточную силу при использовании.
- 2.2 Заменить отсоединившееся изделие и зафиксировать новое.
- 2.3 Утилизировать замененное изделие.
- 2.4 Всегда при использовании изделия соблюдать суждения и указания стоматолога.
- 2.5 Утилизировать изделие непосредственно после использования.
- 2.6 Обратиться к специалисту в случае возникновения реакции биологической совместимости после использования изделия.
- 2.7 Связаться с уполномоченным представителем производителя в случае возникновения вопросов относительно изделия.
- 2.8 Керамические брекеты не предназначены для установки на поверхность реставраций или поврежденную поверхность эмали.

3. Адаптация к изделиям у каждого пациента индивидуальна. Необходимо отслеживать состояние пациента на наличие таких явлений как дискомфорт, заболевание десен, кровоточивость десен, кариес, пятна/окрашивание зуба вокруг брекета, резорбция корня зуба, дегенерация нерва внутри зуба, анкилоз, травмы, оталгия, головные боли, рецидив ортодонтического заболевания, боль, изменения пульпы, гингивит, утрата костной ткани альвеолярного гребня, утрата прикрепленной опорной десны, декальцификация эмали, боль в жевательных мышцах, внутренняя дисфункция диска височно-нижнечелюстного сустава и дегенеративные заболевания височно-нижнечелюстного сустава. При необходимости врач должен корректировать ортодонтическое лечение.

## 7. Описание, конструкция, порядок применения изделий

7.1. Набор брекетов предназначен для удерживания ортодонтической дуги, которая оказывает давление на зубы, чтобы изменить их положение, как часть системы для выравнивания зубов. Брекеты приклеиваются основанием к поверхностям соответствующих номеров зубов: резцы №№11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, клыки №№ 13, 23, 33, 43 и премоляры №№ 14, 15, 24, 25, 34, 35, 43, 45 (см. Рисунок 2). Наборы состоят из брекетов для наклеивания отдельно на верхнюю или на нижнюю челюсть, а также для наклеивания на обе челюсти одновременно. Наличие слова «Lower» (см. Таблица 1) в наименовании изделия свидетельствует о предназначении набора для установки на нижней челюсти, «Upper» - для установки на верхней челюсти, «Upper/Lower» - для установки на обе челюсти одновременно. Наличие цифрового кода «3-3» в названии изделия свидетельствует о предназначении набора для наклеивания на резцы №№11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 и клыки №№ 13, 23, 33, 43, «5-5» - на резцы №№11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, клыки №№ 13, 23, 33, 43 и премоляры №№ 14, 15, 24, 25, 34, 35, 43, 45.

Брекеты изготовлены в виде корпуса с прямоугольным пазом и крючками для фиксации лигатур, которые удерживают ортодонтическую дугу. Изделие так же может быть снабжено крышкой для фиксации ортодонтической дуги без лигатур (брекеты линеек Venus-A, Venus-P, Zeus-A, Zeus-P). Брекет, в зависимости от места приклеивания (номера зуба), может быть снабжен дополнительным крючком для установки ортодонтических устройств (например, колец, цепочек, пружин). Наличие буквы «Н» и цифр «3» или «3, 4, 5» (см. Таблица 1) в названии изделия свидетельствует о наличии дополнительного крючка только на брекетах для клыков или на брекетах для клыков и премоляров. Брекеты изготовлены из керамики на основе оксида алюминия или из нержавеющей стали. Изделие может иметь основание в виде рифлений или припаянной металлической сетки для улучшения силы сцепления при приклеивании к поверхности зуба.

Брекеты имеют цветную навигационную маркировку, которая помогает определить номер зуба, для которого предназначено данное изделие. Маркировка может быть выполнена в виде разноцветных силиконовых вставок в пазах брекетов или отметок чернилами на корпусе брекета. Брекеты линеек Zeus-A, Zeus-P и Meta также имеют лазерную маркировку (гравировку) с указанием номера зуба, нанесенную на основание брекета снизу.



Рисунок 1 – Набор брекетов



Рисунок 2 - Расположение и номера зубов

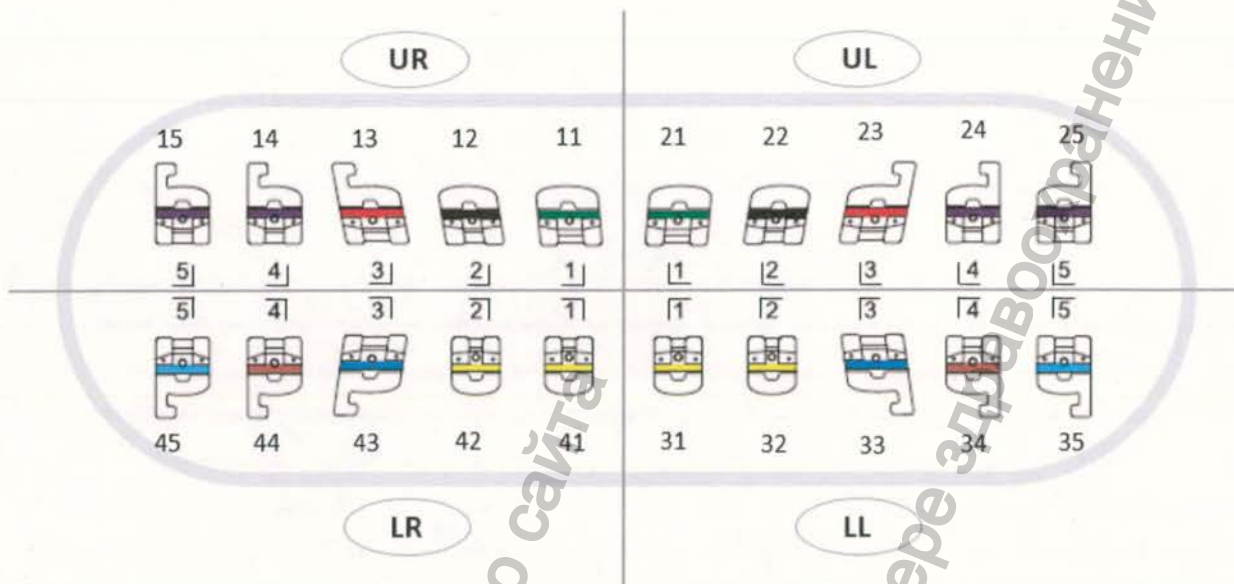


Рисунок 3а – Навигационная маркировка соответствия расположению и номерам зубов с использованием пластиковых вставок для линеек Venus-A, Venus-P, Rosa, Zeus-A

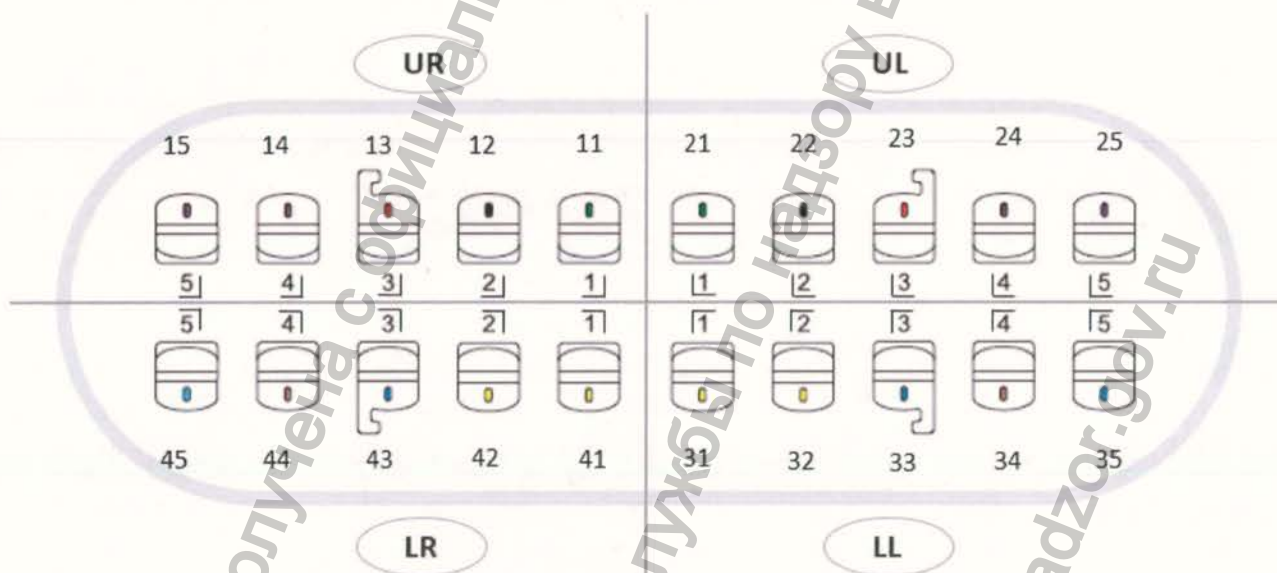


Рисунок 3б – Навигационная маркировка соответствия расположению и номерам зубов с использованием чернил для линейки Rose

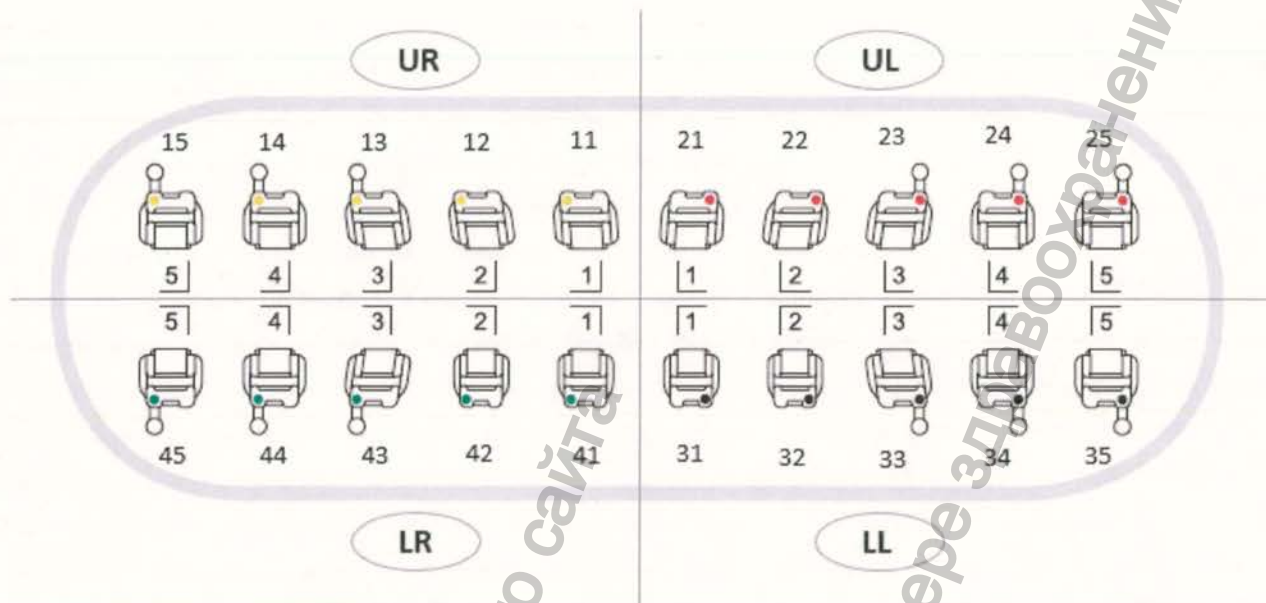


Рисунок 3в – Навигационная маркировка соответствия расположению и номерам зубов с использованием чернил для линеек Zeus-P, Meta

## 7.2. Набор брекетов керамических линейки Venus-A

Брекеты керамические линейки Venus-A удерживают дугу при помощи крышки брекета для фиксации дуги в пазах брекета - крышки в виде фиксирующего пружинного зажима на петлях.

Основная часть брекета состоит из корпуса брекета, основания брекета, крючков брекета для фиксации лигатур, паза брекета для установки ортодонтической дуги и, в зависимости от варианта исполнения, крючка брекета для установки дополнительных устройств (кольца, цепочки, пружины). Данные части изготовлены из керамики на основе поликристаллического оксида алюминия.

Крышка изготовлена из нержавеющей стали.

Брекеты имеют цветную навигационную маркировку в виде силиконовых вставок, окрашенных пигментами, в пазах брекетов.

*Примечание: дополнительные устройства (кольца, цепочки, пружины) должны быть зарегистрированы в установленном порядке на территории Российской Федерации. Специальные требования совместимости отсутствуют.*

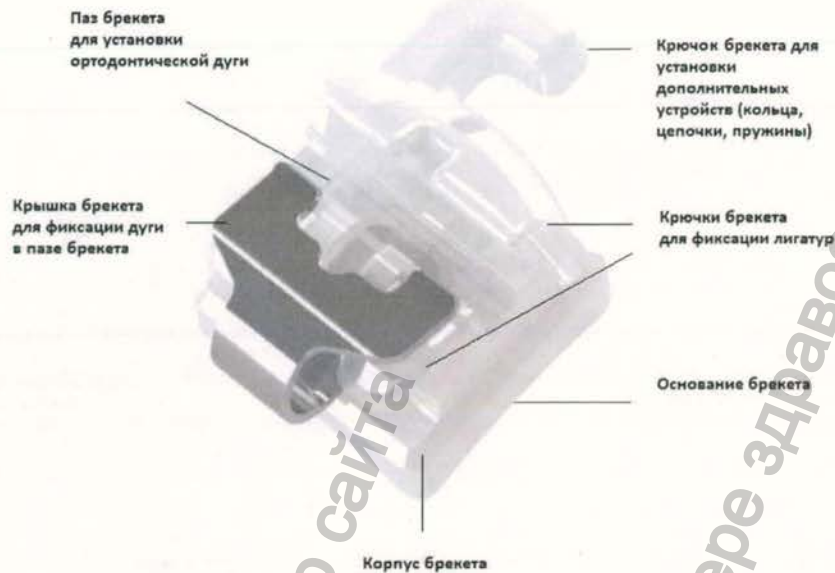


Рисунок 4 - Внешний вид брекета керамической линейки Venus-A

### 7.3. Набор брекетов керамических линейки Venus-P

Основная часть брекетов керамических линейки Venus-P состоит из корпуса брекета, основания брекета, крючков брекета для фиксации лигатур, паза брекета для установки ортодонтической дуги, крышки брекета для фиксации дуги в пазе брекета и, в зависимости от варианта исполнения, крючка брекета для установки дополнительных устройств (кольца, цепочки, пружины). Данные части изготовлены из керамики на основе поликристаллического оксида алюминия.

Скользкая крышка-слайдер (крышка брекета для фиксации дуги в пазе брекета) удерживает дугу в пазе брекета.

Брекеты имеют цветную навигационную маркировку в виде силиконовых вставок, окрашенных пигментами, в пазах брекетов.

*Примечание: дополнительные устройства (кольца, цепочки, пружины) должны быть зарегистрированы в установленном порядке на территории Российской Федерации. Специальные требования совместимости отсутствуют.*

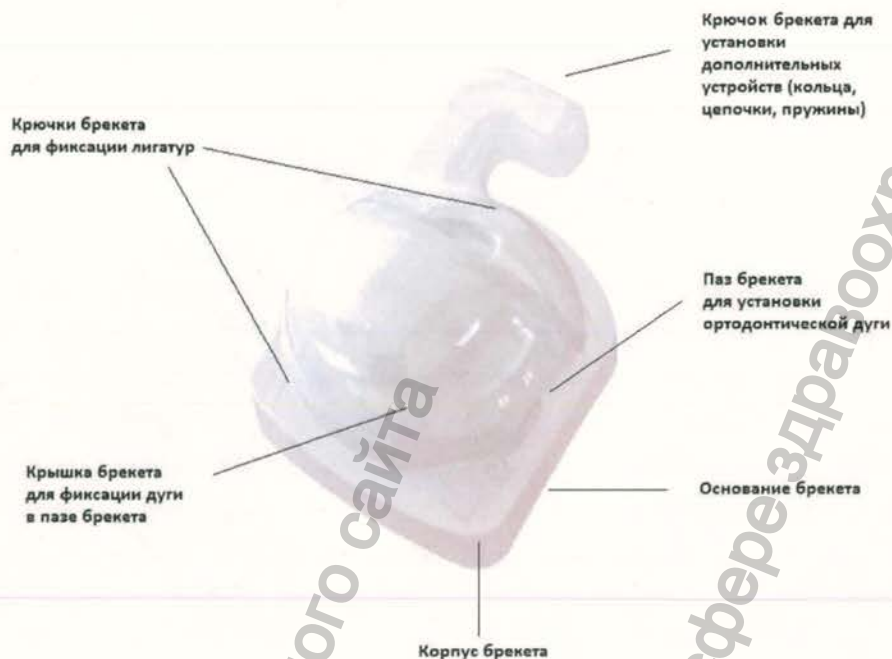


Рисунок 5 - Внешний вид брекета керамического линейки Venus-P

#### 7.4. Набор брекетов керамических линейки Rose

Основная часть брекета керамического линейки Rose состоит из корпуса брекета, основания брекета, крючков брекета для фиксации лигатур, паза брекета для установки ортодонтической дуги и, в зависимости от варианта исполнения, крючка брекета для установки дополнительных устройств (кольца, цепочки, пружины). Данные части изготовлены из керамики на основе поликристаллического оксида алюминия.

Брекеты керамические линейки Rose удерживают дугу крючками брекета для фиксации лигатур.

Брекеты имеют цветную навигационную маркировку в виде отметок красками на корпусе брекета.

*Примечание: дополнительные устройства (кольца, цепочки, пружины) должны быть зарегистрированы в установленном порядке на территории Российской Федерации. Специальные требования совместимости отсутствуют.*

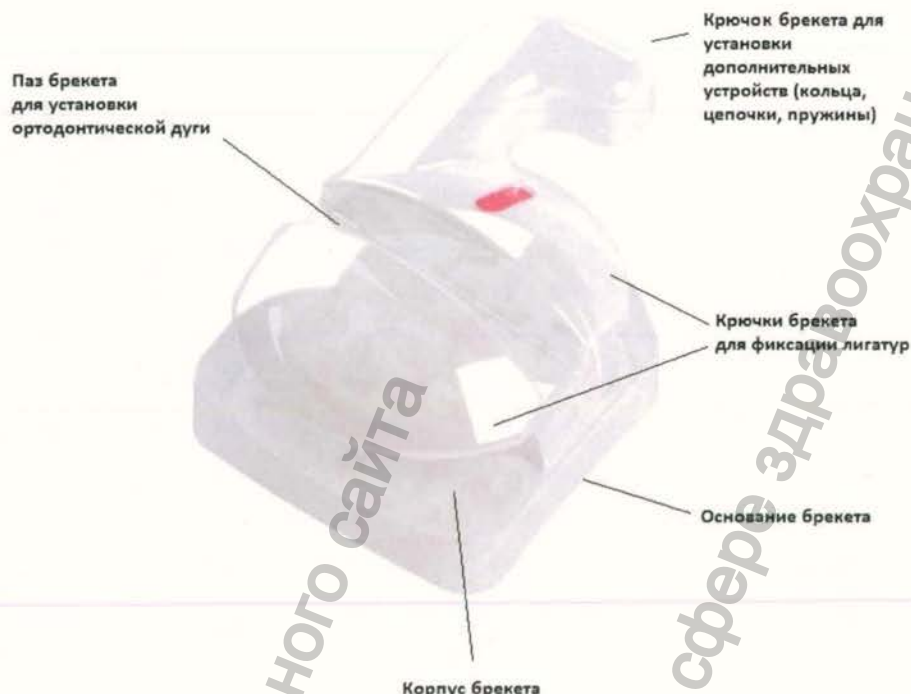


Рисунок 6 – Внешний вид брекета керамического линейки Rose

### 7.5. Набор брекетов керамических линейки Rosa

Основная часть брекета керамического линейки Rosa состоит из корпуса брекета, основания брекета, крючков брекета для фиксации лигатур, паза брекета для установки ортодонтической дуги и, в зависимости от варианта исполнения, крючка брекета для установки дополнительных устройств (кольца, цепочки, пружины). Данные части изготовлены из керамики на основе монокристаллического оксида алюминия.

Брекеты керамические линейки Rosa удерживают дугу крючками брекета для фиксации лигатур.

Брекеты имеют цветную, навигационную маркировку в виде силиконовых вставок, окрашенных пигментами, в пазах брекетов.

*Примечание: дополнительные устройства (кольца, цепочки, пружины) должны быть зарегистрированы в установленном порядке на территории Российской Федерации. Специальные требования совместимости отсутствуют.*

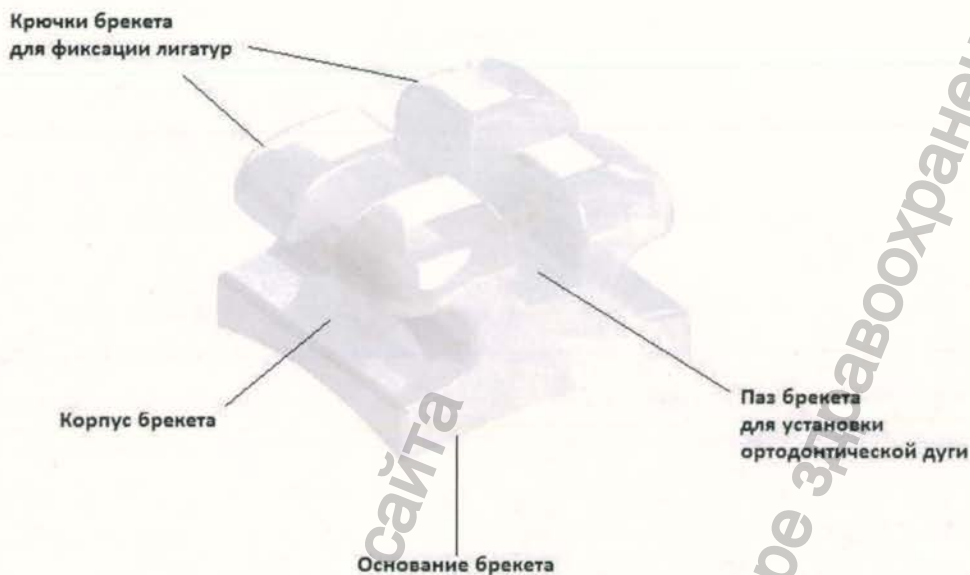


Рисунок 7 – Внешний вид брекета керамического линейки Rosa

### 7.6. Набор брекетов металлических линейки Zeus-A

Основная часть брекета металлического линейки Zeus-A состоит из корпуса брекета, основания брекета, крючков брекета для фиксации лигатур, паза брекета для установки ортодонтической дуги, крышки брекета для фиксации дуги в пазе брекета и, в зависимости от варианта исполнения, крючка брекета для установки дополнительных устройств (кольца, цепочки, пружины). Данные части изготовлены из нержавеющей стали.

Крышка брекета для фиксации дуги в пазе брекета - крышка в виде фиксирующего пружинного зажима на петлях - удерживают дугу.

Брекеты имеют цветную навигационную маркировку в виде силиконовых вставок, окрашенных пигментами, в пазах брекетов. Также имеют лазерную маркировку (гравировку) с указанием номера зуба, нанесенную на основание брекета снизу.

*Примечание: дополнительные устройства (кольца, цепочки, пружины) должны быть зарегистрированы в установленном порядке на территории Российской Федерации. Специальные требования совместимости отсутствуют.*



Рисунок 8 – Внешний вид брекета керамического линейки Zeus-A

### 7.7. Набор брекетов металлических линейки Zeus-P

Основная часть брекетов керамических линейки Zeus-P состоит из корпуса брекета, основания брекета, крючков брекета для фиксации лигатур, паза брекета для установки ортодонтической дуги, крышки брекета для фиксации дуги в пазе брекета и, в зависимости от варианта исполнения, крючка брекета для установки дополнительных устройств (кольца, цепочки, пружины). Данные части изготовлены из нержавеющей стали.

Скользкая крышка-слайдер (крышка брекета для фиксации дуги в пазе брекета) удерживает дугу в пазе брекета.

Изделия имеют на основании припаянную металлическую сетку.

Брекеты имеют цветную навигационную маркировку в виде отметок красками на корпусе брекета. Также имеют лазерную маркировку (гравировку) с указанием номера зуба, нанесенную на основание брекета снизу.

*Примечание: дополнительные устройства (кольца, цепочки, пружины) должны быть зарегистрированы в установленном порядке на территории Российской Федерации. Специальные требования совместимости отсутствуют.*



Рисунок 9 – Внешний вид брекета керамического линейки Zeus-P

## 7.8. Набор брекетов металлических линейки Meta

Основная часть брекетов керамических линейки Meta состоит из корпуса брекета, основания брекета, крючков брекета для фиксации лигатур, паза брекета для установки ортодонтической дуги и, в зависимости от варианта исполнения, крючка брекета для установки дополнительных устройств (кольца, цепочки, пружины). Данные части изготовлены из нержавеющей стали.

Изделия имеют на основании припаянную металлическую сетку.

Брекеты имеют цветную навигационную маркировку в виде отметок красками на корпусе брекета. Также имеют лазерную маркировку (гравировку) с указанием номера зуба, нанесенную на основание брекета снизу.

*Примечание: дополнительные устройства (кольца, цепочки, пружины) должны быть зарегистрированы в установленном порядке на территории Российской Федерации. Специальные требования совместимости отсутствуют.*



Рисунок 10 – Внешний вид брекета керамического линейки Meta

## 7.9. Порядок применения брекетов

### 1. Подготовка к использованию

- 1.1 Убедиться в целостности упаковки, при нарушении целостности упаковки изделие не использовать.
- 1.2 Произвести визуальный осмотр брекетов на наличие повреждений, трещин и инородных предметов. При наличии проблем с внешним видом не использовать изделие и обратиться к производителю и/или уполномоченному представителю производителя.
- 1.3 Для брекетов линеек Venus-A, Venus-P, Rosa, Zeus-A: из пазов брекетов вытащить силиконовые вставки перед дезинфекцией изделий.
- 1.4 Произвести дезинфекцию брекетов 70%-ным этиловым спиртом.
- 1.5 Коррекция зубов с использованием брекетов должна выполняться в соответствии теоретическими и практическими навыками специалиста.

### 2. Использование

- 2.1 Проверить контактные поверхности зубов и брекетов на отсутствие повреждений, трещин и инородных предметов. При наличии проблем с внешним видом брекета не использовать изделие и обратиться к производителю и/или уполномоченному представителю производителя.
- 2.2 Работа с брекетами осуществляется с использованием универсальных инструментов,

например, пинцетов обратного действия, щипцов и т.д.

*Примечание: специальные требования к совместно применяемым инструментам отсутствуют. Инструменты должны быть зарегистрированы в установленном порядке на территории Российской Федерации.*

- 2.3. Выполнить подготовку места установки брекетов при помощи протравочного средства, затем нанести адгезив на контактные поверхности зубов и брекетов с использованием рекомендаций производителя протравочного средства и адгезива, затем установить брекеты.

*Примечание: специальные требования к совместно применяемым протравочным средствам, адгезивам отсутствуют. Материалы должны быть зарегистрированы в установленном порядке на территории Российской Федерации.*

- 2.4. После отверждения адгезива установить и зафиксировать дугу в пазах брекетов.

В брекетах линеек Venus-A, Venus-P, Zeus-A и Zeus-P дуга фиксируется встроенными крышками, в брекетах Rose, Rosa и Meta дуга фиксируется путем лигирования металлической проволокой или эластичными кольцами.

*Примечание: допускается совместное использование брекетов с дугами других производителей, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации. Специальные требования к совместимости дуг отсутствуют.*

- 2.5. Соблюдать методику лечения и указания стоматолога в отношении коррекции зубов и хирургических процедур.

### 3. Рекомендации по фиксации брекетов

- 3.1. Брекеты могут устанавливаться с использованием стандартных методов прямой или не прямой фиксации. Изменения в применении методов при установке брекетов не требуются. При установке брекетов необходимо следовать инструкциям производителя адгезива.

- 3.2. Брекеты могут фиксироваться с использованием любого стандартного адгезива для брекетов. Следует отметить абсолютную необходимость соблюдения инструкций производителя соответствующего адгезива для фиксации брекетов при установке керамических и металлических брекетов.

- 3.3. При установке брекетов линеек Rosa, Rose, Venus-A, Venus-P рекомендуется, чтобы брекеты устанавливались скользящим движением, от десны к окклюзионной поверхности, со смещением избытка адгезива к режущему краю зуба для упрощения очистки поверхности зубов.

- 3.4. Необходимо соблюдать осторожность при очистке избытка адгезива таким образом, чтобы не нарушить конечное положение брекетов до полного отверждения адгезива.

- 3.5. Перед установкой ортодонтической дуги необходимо очистить щеткой зубы пациента и наклеенные брекеты, чтобы удалить цветную навигационную маркировку в виде чернил.

### 4. Метод снятия брекетов

- 4.1. Удалить излишки и подтеки адгезива вокруг основания брекетов.

*Примечание: невыполнение удаления излишков и подтеков адгезива вокруг оснований брекетов может привести к неполному снятию брекетов.*

- 4.2. Установить щипцы для снятия брекета в окклюзионно-гингивальное положение. Убедиться, что кромки рабочих частей щипцов симметрично расположены параллельно крыльям брекетов.

- 4.3. Аккуратно сжать рукоятки щипцов, пока брекет не отсоединится. Если необходимо, то аккуратно раскатать брекет для полного отделения брекета от эмали.

Примечание: Необходимо соблюдать особую осторожность при снятии брекетов без ортодонтической дуги в пазах. Следует удерживать брекет таким образом, чтобы отсоединенные части брекета остались между кромками рабочих частей щипцов.

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

[www.goszdramnadzor.gov.ru](http://www.goszdramnadzor.gov.ru)

## 7.10. Размерные характеристики изделий

Таблица 1 - Размерные характеристики брекетов

Наименование	Состав набора	Высота расположения паза над платформой, мм	Высота паза, мм	Глубина паза, мм	Длина паза, мм	Угол мезиально-дистального наклона (ангуляция), °	Угол вестибуло-орального наклона (торк), °	Цвет навигационной маркировки	Номера зубов для наклеивания	Наличие крючка для установки дополнительных ортодонтических устройств
Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Lower Roth 022, VAR-22-031 состав:	брекет VAR-22-31 (4 шт)	1.44	0.6	0.43	2.85	0°	1°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет VAR-22-33H (1 шт)	1.05	0.6	0.45	3.5	7°	-13°	Синий	33	Да
	брекет VAR-22-43H (1 шт)	1.05	0.6	0.45	3.5	7°	-7°	Синий	43	Да
Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Upper Roth 022, VAR-22-301 состав:	брекет VAR-22-11 (1 шт)	0.9	0.6	0.43	3.2	5°	11°	Зеленый	11	Нет
	брекет VAR-22-12 (1 шт)	1	0.6	0.43	2.95	11°	13°	Черный	12	Нет
	брекет VAR-22-13H (1 шт)	0.8	0.6	0.45	3.5	11°	-2°	Красный	13	Да
	брекет VAR-22-21 (1 шт)	1	0.6	0.43	3.2	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет VAR-22-22 (1 шт)	1.1	0.6	0.43	2.95	10°	7°	Черный	22	Нет
	брекет VAR-22-23H (1 шт)	0.9	0.6	0.45	3.5	8°	-2°	Красный	23	Да
	брекет VAR-22-31 (4 шт)	1.44	0.6	0.43	2.85	0°	1°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Upper/Lower Roth 022, VAR-22-331 состав:	брекет VAR-22-33H (1 шт)	1.05	0.6	0.45	3.5	7°	-13°	Синий	33	Да
	брекет VAR-22-43H (1 шт)	1.05	0.6	0.45	3.5	7°	-7°	Синий	43	Да
	брекет VAR-22-11 (1 шт)	0.9	0.6	0.43	3.2	5°	11°	Зеленый	11	Нет
	брекет VAR-22-12 (1 шт)	1	0.6	0.43	2.95	11°	13°	Черный	12	Нет
	брекет VAR-22-13H (1 шт)	0.8	0.6	0.45	3.5	11°	-2°	Красный	13	Да
	брекет VAR-22-21 (1 шт)	1	0.6	0.43	3.2	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет VAR-22-22 (1 шт)	1.1	0.6	0.43	2.95	10°	7°	Черный	22	Нет
	брекет VAR-22-23H (1 шт)	0.9	0.6	0.45	3.5	8°	-2°	Красный	23	Да
	брекет VAR-22-31 (4 шт)	1.44	0.6	0.43	2.85	0°	1°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Lower Roth 022, VAR-22-053 состав:	брекет VAR-22-33H (1 шт)	1.05	0.6	0.45	3.5	7°	-13°	Синий	33	Да
	брекет VAR-22-34H (1 шт)	1.2	0.6	0.45	3.35	0°	-12°	Коричневый	34	Да
	брекет VAR-22-35H (1 шт)	0.8	0.6	0.45	3.35	0°	-11°	Голубой	35	Да
	брекет VAR-22-43H (1 шт)	1.05	0.6	0.45	3.5	7°	-7°	Синий	43	Да
	брекет VAR-22-44H (1 шт)	0.8	0.6	0.45	3.35	0°	-22°	Коричневый	44	Да
	брекет VAR-22-45H (1 шт)	0.9	0.6	0.45	3.35	8°	-12°	Голубой	45	Да
	брекет VAR-22-11 (1 шт)	0.9	0.6	0.43	3.2	5°	11°	Зеленый	11	Нет
	брекет VAR-22-12 (1 шт)	1	0.6	0.43	2.95	11°	13°	Черный	12	Нет
Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Upper Roth 022, VAR-22-503	брекет VAR-22-13H (1 шт)	0.8	0.6	0.45	3.5	11°	-2°	Красный	13	Да

	бретер VAR-22-14H (2 шт)	1	0.6	0.46	3.5	1°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да
	бретер VAR-22-21 (1 шт),	1	0.6	0.43	3.2	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	бретер VAR-22-22 (1 шт)	1.1	0.6	0.43	2.95	10°	7°	Черный	22	Нет
	бретер VAR-22-23H (1 шт)	0.9	0.6	0.45	3.5	8°	-2°	Красный	23	Да
	бретер VAR-22-24H (2 шт)	0.9	0.6	0.46	3.5	0°	-10°	Фиолетовый	24, 25	Да
Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Upper/Lower Roth 022, VAR-22-553	бретер VAR-22-31 (4 шт)	1.44	0.6	0.43	2.85	0°	1°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	бретер VAR-22-33H (1 шт)	1.05	0.6	0.45	3.5	7°	-13°	Синий	33	Да
	бретер VAR-22-34H (1 шт)	1.2	0.6	0.45	3.35	0°	-12°	Коричневый	34	Да
	бретер VAR-22-35H (1 шт)	0.8	0.6	0.45	3.35	0°	-11°	Голубой	35	Да
	бретер VAR-22-43H (1 шт)	1.05	0.6	0.45	3.5	7°	-7°	Синий	43	Да
	бретер VAR-22-44H (1 шт)	0.8	0.6	0.45	3.35	0°	-22°	Коричневый	44	Да
	бретер VAR-22-45H (1 шт)	0.9	0.6	0.45	3.35	8°	-12°	Голубой	45	Да
	бретер VAR-22-11 (1 шт)	0.9	0.6	0.43	3.2	5°	11°	Зеленый	11	Нет
	бретер VAR-22-12 (1 шт)	1	0.6	0.43	2.95	11°	13°	Черный	12	Нет
	бретер VAR-22-13H (1 шт)	0.8	0.6	0.45	3.5	11°	-2°	Красный	13	Да
	бретер VAR-22-14H (2 шт)	1	0.6	0.46	3.5	1°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да
	бретер VAR-22-21 (1 шт),	1	0.6	0.43	3.2	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	бретер VAR-22-22 (1 шт)	1.1	0.6	0.43	2.95	10°	7°	Черный	22	Нет
	бретер VAR-22-23H (1 шт)	0.9	0.6	0.45	3.5	8°	-2°	Красный	23	Да
	бретер VAR-22-24H (2 шт)	0.9	0.6	0.46	3.5	0°	-10°	Фиолетовый	24, 25	Да
	Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Lower MBT 022, VAM-22-031	бретер VAM-22-31 (4 шт)	1.1	0.6	0.43	2.85	0°	-8°	Желтый	31, 32, 41, 42
бретер VAM-22-33H (1 шт)		1.06	0.6	0.45	3.5	3°	0°	Синий	33	Да
бретер VAM-22-43H (1 шт)		1.06	0.6	0.45	3.5	3°	1°	Синий	43	Да
Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Upper MBT 022, VAM-22-301	бретер VAM-22-11 (1 шт)	0.9	0.6	0.43	3.2	3°	9°	Зеленый	11	Нет
	бретер VAM-22-12 (1 шт)	1.4	0.6	0.43	2.95	4°	12°	Черный	12	Нет
	бретер VAM-22-13H (1 шт)	0.9	0.6	0.45	3.5	4°	1°	Красный	13	Да
	бретер VAM-22-21 (1 шт)	1.1	0.6	0.43	3.2	2°	12°	Зеленый	21	Нет
	бретер VAM-22-22 (1 шт)	1.3	0.6	0.43	2.95	1°	7°	Черный	22	Нет
	бретер VAM-22-23H (1 шт)	1.04	0.6	0.45	3.5	1°	2°	Красный	23	Да
	бретер VAM-22-31 (4 шт)	1.1	0.6	0.43	2.85	0°	-8°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, VAM-22-331	бретер VAM-22-33H (1 шт)	1.06	0.6	0.45	3.5	3°	0°	Синий	33	Да
	бретер VAM-22-43H (1 шт)	1.06	0.6	0.45	3.5	3°	1°	Синий	43	Да
	бретер VAM-22-11 (1 шт)	0.9	0.6	0.43	3.2	3°	9°	Зеленый	11	Нет
	бретер VAM-22-12 (1 шт)	1.4	0.6	0.43	2.95	4°	12°	Черный	12	Нет

	бретер VAM-22-13H (1 шт)	0.9	0.6	0.45	3.5	4°	1°	Красный	13	Да
	бретер VAM-22-21 (1 шт)	1.1	0.6	0.43	3.2	2°	12°	Зеленый	21	Нет
	бретер VAM-22-22 (1 шт)	1.3	0.6	0.43	2.95	1°	7°	Черный	22	Нет
	бретер VAM-22-23H (1 шт)	1.04	0.6	0.45	3.5	1°	2°	Красный	23	Да
Набор брекетов Venus-A 5-5 3H Lower MBT 022, VAM-22-051	бретер VAM-22-31 (4 шт)	1.1	0.6	0.43	2.85	0°	-8°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	бретер VAM-22-33H (1 шт)	1.06	0.6	0.45	3.5	3°	0°	Синий	33	Да
	бретер VAM-22-34 (1 шт)	1.04	0.6	0.45	3.35	0°	-10°	Коричневый	34	Нет
	бретер VAM-22-35 (1 шт)	1	0.6	0.45	3.35	1°	-11°	Голубой	35	Нет
	бретер VAM-22-43H (1 шт)	1.06	0.6	0.45	3.5	3°	1°	Синий	43	Да
	бретер VAM-22-44 (1 шт)	1	0.6	0.45	3.35	0°	-10°	Коричневый	44	Нет
	бретер VAM-22-45 (1 шт)	0.9	0.6	0.45	3.35	0°	-13°	Голубой	45	Нет
Набор брекетов Venus-A 5-5 3H Upper MBT 022, VAM-22-501	бретер VAM-22-11 (1 шт)	0.9	0.6	0.43	3.2	3°	9°	Зеленый	11	Нет
	бретер VAM-22-12 (1 шт)	1.4	0.6	0.43	2.95	4°	12°	Черный	12	Нет
	бретер VAM-22-13H (1 шт)	0.9	0.6	0.45	3.5	4°	1°	Красный	13	Да
	бретер VAM-22-14 (2 шт)	1.1	0.6	0.46	3.5	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Нет
	бретер VAM-22-21 (1 шт)	1.1	0.6	0.43	3.2	2°	12°	Зеленый	21	Нет
	бретер VAM-22-22 (1 шт)	1.3	0.6	0.43	2.95	1°	7°	Черный	22	Нет
	бретер VAM-22-23H (1 шт)	1.04	0.6	0.45	3.5	1°	2°	Красный	23	Да
	бретер VAM-22-24 (2 шт)	0.9	0.6	0.46	3.5	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Нет
	бретер VAM-22-31 (4 шт)	1.1	0.6	0.43	2.85	0°	-8°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	бретер VAM-22-33H (1 шт)	1.06	0.6	0.45	3.5	3°	0°	Синий	33	Да
Набор брекетов Venus-A 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, VAM-22-551	бретер VAM-22-34 (1 шт)	1.04	0.6	0.45	3.35	0°	-10°	Коричневый	34	Нет
	бретер VAM-22-35 (1 шт)	1	0.6	0.45	3.35	1°	-11°	Голубой	35	Нет
	бретер VAM-22-43H (1 шт)	1.06	0.6	0.45	3.5	3°	1°	Синий	43	Да
	бретер VAM-22-44 (1 шт)	1	0.6	0.45	3.35	0°	-10°	Коричневый	44	Нет
	бретер VAM-22-45 (1 шт)	0.9	0.6	0.45	3.35	0°	-13°	Голубой	45	Нет
	бретер VAM-22-11 (1 шт)	0.9	0.6	0.43	3.2	3°	9°	Зеленый	11	Нет
	бретер VAM-22-12 (1 шт)	1.4	0.6	0.43	2.95	4°	12°	Черный	12	Нет
	бретер VAM-22-13H (1 шт)	0.9	0.6	0.45	3.5	4°	1°	Красный	13	Да
	бретер VAM-22-14 (2 шт)	1.1	0.6	0.46	3.5	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Нет
	бретер VAM-22-21 (1 шт)	1.1	0.6	0.43	3.2	2°	12°	Зеленый	21	Нет
	бретер VAM-22-22 (1 шт)	1.3	0.6	0.43	2.95	1°	7°	Черный	22	Нет
	бретер VAM-22-23H (1 шт)	1.04	0.6	0.45	3.5	1°	2°	Красный	23	Да
	бретер VAM-22-24 (2 шт)	0.9	0.6	0.46	3.5	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Нет

Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Lower MBT 022, VAM-22-053	брекет VAM-22-31 (4 шт)	1.1	0.6	0.43	2.85	0°	-8°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет	
	брекет VAM-22-33H (1 шт)	1.06	0.6	0.45	3.5	3°	0°	Синий	33	Да	
	брекет VAM-22-34H (1 шт)	1.04	0.6	0.45	3.35	0°	-8°	Коричневый	34	Да	
	брекет VAM-22-35H (1 шт)	1.2	0.6	0.45	3.35	0°	-17°	Голубой	35	Да	
	брекет VAM-22-43H (1 шт)	1.06	0.6	0.45	3.5	3°	1°	Синий	43	Да	
	брекет VAM-22-44H (1 шт)	1.04	0.6	0.45	3.35	0°	-10°	Коричневый	44	Да	
	брекет VAM-22-45H (1 шт)	1.1	0.6	0.45	3.35	0°	-11°	Голубой	45	Да	
Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Lower MBT 022, VAM-22-503	брекет VAM-22-11 (1 шт)	0.9	0.6	0.43	3.2	3°	9°	Зеленый	11	Нет	
	брекет VAM-22-12 (1 шт)	1.4	0.6	0.43	2.95	4°	12°	Черный	12	Нет	
	брекет VAM-22-13H (1 шт)	0.9	0.6	0.45	3.5	4°	1°	Красный	13	Да	
	брекет VAM-22-14H (2 шт)	1.2	0.6	0.46	3.5	2°	-10°	Фиолетовый	14, 15	Да	
	брекет VAM-22-21 (1 шт)	1.1	0.6	0.43	3.2	2°	12°	Зеленый	21	Нет	
	брекет VAM-22-22 (1 шт)	1.3	0.6	0.43	2.95	1°	7°	Черный	22	Нет	
	брекет VAM-22-23H (1 шт)	1.04	0.6	0.45	3.5	1°	2°	Красный	23	Да	
	брекет VAM-22-24H (2 шт)	1.2	0.6	0.46	3.5	0°	-10°	Фиолетовый	24, 25	Да	
	Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, VAM-22-553	брекет VAM-22-31 (4 шт)	1.1	0.6	0.43	2.85	0°	-8°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
		брекет VAM-22-33H (1 шт)	1.06	0.6	0.45	3.5	3°	0°	Синий	33	Да
брекет VAM-22-34H (1 шт)		1.04	0.6	0.45	3.35	0°	-8°	Коричневый	34	Да	
брекет VAM-22-35H (1 шт)		1.2	0.6	0.45	3.35	0°	-17°	Голубой	35	Да	
брекет VAM-22-43H (1 шт)		1.06	0.6	0.45	3.5	3°	1°	Синий	43	Да	
брекет VAM-22-44H (1 шт)		1.04	0.6	0.45	3.35	0°	-10°	Коричневый	44	Да	
брекет VAM-22-45H (1 шт)		1.1	0.6	0.45	3.35	0°	-11°	Голубой	45	Да	
брекет VAM-22-11 (1 шт)		0.9	0.6	0.43	3.2	3°	9°	Зеленый	11	Нет	
брекет VAM-22-12 (1 шт)		1.4	0.6	0.43	2.95	4°	12°	Черный	12	Нет	
брекет VAM-22-13H (1 шт)		0.9	0.6	0.45	3.5	4°	1°	Красный	13	Да	
брекет VAM-22-14H (2 шт)		1.2	0.6	0.46	3.5	2°	-10°	Фиолетовый	14, 15	Да	
брекет VAM-22-21 (1 шт)		1.1	0.6	0.43	3.2	2°	12°	Зеленый	21	Нет	
брекет VAM-22-22 (1 шт)		1.3	0.6	0.43	2.95	1°	7°	Черный	22	Нет	
брекет VAM-22-23H (1 шт)	1.04	0.6	0.45	3.5	1°	2°	Красный	23	Да		
брекет VAM-22-24H (2 шт)	1.2	0.6	0.46	3.5	0°	-10°	Фиолетовый	24, 25	Да		
Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Lower Roth 022, VPR-22-031	брекет VPR-22-31 (4 шт)	1.29	0.6	0.65	2.92	0°	-1°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет	
	брекет VPR-22-33H (1 шт)	1.02	0.6	0.65	3.36	7°	-11°	Синий	33	Да	
	брекет VPR-22-43H (1 шт)	1.02	0.6	0.65	3.36	7°	-11°	Синий	43	Да	
Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Upper Roth 022, VPR-22-301	брекет VPR-22-11 (1 шт)	0.6	0.6	0.61	3.15	8°	15°	Зеленый	11	Нет	

	брекет VPR-22-12 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	9°	8°	Черный	12	Нет
	брекет VPR-22-13H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	-2°	Красный	13	Да
	брекет VPR-22-21 (1 шт)	0.86	0.6	0.61	3.15	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет VPR-22-22 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет
	брекет VPR-22-23H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	-2°	Красный	23	Да
Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Upper/Lower Roth 022, VPR-22-331	брекет VPR-22-31 (4 шт)	1.29	0.6	0.65	2.92	0°	-1°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет VPR-22-33H (1 шт)	1.02	0.6	0.65	3.36	7°	-11°	Синий	33	Да
	брекет VPR-22-43H (1 шт)	1.02	0.6	0.65	3.36	7°	-11°	Синий	43	Да
	брекет VPR-22-11 (1 шт)	0.6	0.6	0.61	3.15	8°	15°	Зеленый	11	Нет
	брекет VPR-22-12 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	9°	8°	Черный	12	Нет
	брекет VPR-22-13H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	-2°	Красный	13	Да
	брекет VPR-22-21 (1 шт)	0.86	0.6	0.61	3.15	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет VPR-22-22 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет
	брекет VPR-22-23H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	-2°	Красный	23	Да
	Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Lower Roth 022, VPR-22-053	брекет VPR-22-31 (4 шт)	1.29	0.6	0.65	2.92	0°	-1°	Желтый	31, 32, 41, 42
брекет VPR-22-33H (1 шт)		1.02	0.6	0.65	3.36	7°	-11°	Синий	33	Да
брекет VPR-22-34H (1 шт)		0.84	0.6	0.65	3.21	0°	-17°	Коричневый	34	Да
брекет VPR-22-35H (1 шт)		0.94	0.6	0.65	3.21	0°	-22°	Голубой	35	Да
брекет VPR-22-43H (1 шт)		1.02	0.6	0.65	3.36	7°	-11°	Синий	43	Да
брекет VPR-22-44H (1 шт)		0.84	0.6	0.65	3.21	0°	-17°	Коричневый	44	Да
брекет VPR-22-45H (1 шт)		0.94	0.6	0.65	3.21	0°	-22°	Голубой	45	Да
брекет VPR-22-11 (1 шт)		0.6	0.6	0.61	3.15	8°	15°	Зеленый	11	Нет
Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Upper Roth 022, VPR-22-503	брекет VPR-22-12 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	9°	8°	Черный	12	Нет
	брекет VPR-22-13H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	-2°	Красный	13	Да
	брекет VPR-22-14H (2 шт)	0.85	0.6	0.65	3.20	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да
	брекет VPR-22-21 (1 шт)	0.86	0.6	0.61	3.15	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет VPR-22-22 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет
	брекет VPR-22-23H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	-2°	Красный	23	Да
	брекет VPR-22-24H (2 шт)	0.85	0.6	0.65	3.20	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да
	брекет VPR-22-31 (4 шт)	1.29	0.6	0.65	2.92	0°	-1°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Upper/Lower Roth 022, VPR-22-553	брекет VPR-22-33H (1 шт)	1.02	0.6	0.65	3.36	7°	-11°	Синий	33	Да
	брекет VPR-22-34H (1 шт)	0.84	0.6	0.65	3.21	0°	-17°	Коричневый	34	Да
	брекет VPR-22-35H (1 шт)	0.94	0.6	0.65	3.21	0°	-22°	Голубой	35	Да
	брекет VPR-22-43H (1 шт)	1.02	0.6	0.65	3.36	7°	-11°	Синий	43	Да

	брекет VPR-22-44H (1 шт)	0.84	0.6	0.65	3.21	0°	-17°	Коричневый	44	Да
	брекет VPR-22-45H (1 шт)	0.94	0.6	0.65	3.21	0°	-22°	Голубой	45	Да
	брекет VPR-22-11 (1 шт)	0.6	0.6	0.61	3.15	8°	15°	Зеленый	11	Нет
	брекет VPR-22-12 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	9°	8°	Черный	12	Нет
	брекет VPR-22-13H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	-2°	Красный	13	Да
	брекет VPR-22-14H (2 шт)	0.85	0.6	0.65	3.20	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да
	брекет VPR-22-21 (1 шт)	0.86	0.6	0.61	3.15	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет VPR-22-22 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет
	брекет VPR-22-23H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	-2°	Красный	23	Да
	брекет VPR-22-24H (2 шт)	0.85	0.6	0.65	3.20	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да
Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Lower MBT 022, VPM-22-031	брекет VPM-22-31 (4 шт)	1.29	0.6	0.65	2.90	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет VPM-22-33H (1 шт)	1.02	0.6	0.65	3.36	3°	0°	Синий	33	Да
	брекет VPM-22-43H (1 шт)	1.02	0.6	0.65	3.36	3°	0°	Синий	43	Да
Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Upper MBT 022, VPM-22-301	брекет VPM-22-11 (1 шт)	0.92	0.6	0.61	3.15	1°	14°	Зеленый	11	Нет
	брекет VPM-22-12 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	8°	10°	Черный	12	Нет
	брекет VPM-22-13H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	0°	Красный	13	Да
	брекет VPM-22-21 (1 шт)	0.92	0.6	0.61	3.15	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	брекет VPM-22-22 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	8°	10°	Черный	22	Нет
	брекет VPM-22-23H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	0°	Красный	23	Да
Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, VPM-22-331	брекет VPM-22-31 (4 шт)	1.29	0.6	0.65	2.90	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет VPM-22-33H (1 шт)	1.02	0.6	0.65	3.36	3°	0°	Синий	33	Да
	брекет VPM-22-43H (1 шт)	1.02	0.6	0.65	3.36	3°	0°	Синий	43	Да
	брекет VPM-22-11 (1 шт)	0.92	0.6	0.61	3.15	1°	14°	Зеленый	11	Нет
	брекет VPM-22-12 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	8°	10°	Черный	12	Нет
	брекет VPM-22-13H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	0°	Красный	13	Да
	брекет VPM-22-21 (1 шт)	0.92	0.6	0.61	3.15	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	брекет VPM-22-22 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	8°	10°	Черный	22	Нет
	брекет VPM-22-23H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	0°	Красный	23	Да
	брекет VPM-22-31 (4 шт)	1.29	0.6	0.65	2.90	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
Набор брекетов Venus-P 5-5 3H Lower MBT 022, VPM-22-051	брекет VPM-22-33H (1 шт)	1.02	0.6	0.65	3.36	3°	0°	Синий	33	Да
	брекет VPM-22-34 (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.21	0°	-12°	Коричневый	34	Да
	брекет VPM-22-35 (1 шт)	0.84	0.6	0.65	3.21	0°	-17°	Голубой	35	Да
	брекет VPM-22-43H (1 шт)	1.02	0.6	0.65	3.36	3°	0°	Синий	43	Да
	брекет VPM-22-44 (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.21	0°	-12°	Коричневый	44	Да

Набор брекетов Venus-P 5-5 3H Upper MBT 022, VPM-22-501	брекет VPM-22-45 (1 шт)	0.84	0.6	0.65	3.21	0°	-17°	Голубой	45	Да	
	брекет VPM-22-11 (1 шт)	0.92	0.6	0.61	3.15	1°	14°	Зеленый	11	Нет	
	брекет VPM-22-12 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	8°	10°	Черный	12	Нет	
	брекет VPR-22-13H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	0°	Красный	13	Да	
	брекет VPM-22-14 (2 шт)	0.85	0.6	0.65	3.20	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да	
	брекет VPM-22-21 (1 шт)	0.92	0.6	0.61	3.15	4°	17°	Зеленый	21	Нет	
	брекет VPM-22-22 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	8°	10°	Черный	22	Нет	
	брекет VPM-22-23H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	0°	Красный	23	Да	
	брекет VPM-22-24 (2 шт)	0.85	0.6	0.65	3.20	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да	
Набор брекетов Venus-P 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, VPM-22-551	брекет VPM-22-31 (4 шт)	1.29	0.6	0.65	2.90	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет	
	брекет VPM-22-33H (1 шт)	1.02	0.6	0.65	3.36	3°	0°	Синий	33	Да	
	брекет VPM-22-34 (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.21	0°	-12°	Коричневый	34	Да	
	брекет VPM-22-35 (1 шт)	0.84	0.6	0.65	3.21	0°	-17°	Голубой	35	Да	
	брекет VPM-22-43H (1 шт)	1.02	0.6	0.65	3.36	3°	0°	Синий	43	Да	
	брекет VPM-22-44 (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.21	0°	-12°	Коричневый	44	Да	
	брекет VPM-22-45 (1 шт)	0.84	0.6	0.65	3.21	0°	-17°	Голубой	45	Да	
	брекет VPM-22-11 (1 шт)	0.92	0.6	0.61	3.15	1°	14°	Зеленый	11	Нет	
	брекет VPM-22-12 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	8°	10°	Черный	12	Нет	
	брекет VPR-22-13H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	0°	Красный	13	Да	
	брекет VPM-22-14 (2 шт)	0.85	0.6	0.65	3.20	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да	
	брекет VPM-22-21 (1 шт)	0.92	0.6	0.61	3.15	4°	17°	Зеленый	21	Нет	
	брекет VPM-22-22 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	8°	10°	Черный	22	Нет	
	брекет VPM-22-23H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	0°	Красный	23	Да	
	брекет VPM-22-24 (2 шт)	0.85	0.6	0.65	3.20	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да	
	Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Lower MBT 022, VPM-22-553	брекет VPM-22-31 (4 шт)	1.29	0.6	0.65	2.90	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
		брекет VPM-22-33H (1 шт)	1.02	0.6	0.65	3.36	3°	0°	Синий	33	Да
брекет VPM-22-34H (1 шт)		0.80	0.6	0.65	3.21	0°	-12°	Коричневый	34	Да	
брекет VPM-22-35H (1 шт)		0.84	0.6	0.65	3.21	0°	-17°	Голубой	35	Да	
брекет VPM-22-43H (1 шт)		1.02	0.6	0.65	3.36	3°	0°	Синий	43	Да	
брекет VPM-22-44H (1 шт)		0.80	0.6	0.65	3.21	0°	-12°	Коричневый	44	Да	
брекет VPM-22-45H (1 шт)		0.84	0.6	0.65	3.21	0°	-17°	Голубой	45	Да	
Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Upper MBT 022, VPM-22-503		брекет VPM-22-11 (1 шт)	0.92	0.6	0.61	3.15	1°	14°	Зеленый	11	Нет
	брекет VPM-22-12 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	8°	10°	Черный	12	Нет	
	брекет VPR-22-13H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	0°	Красный	13	Да	

Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, VPM-22-553	брекет VPM-22-14H (2 шт)	0.85	0.6	0.65	3.20	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да	
	брекет VPM-22-21 (1 шт)	0.86	0.6	0.61	3.15	5°	11°	Зеленый	21	Нет	
	брекет VPM-22-22 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет	
	брекет VPM-22-23H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	-2°	Красный	23	Да	
	брекет VPM-22-24H (2 шт)	0.85	0.6	0.65	3.20	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да	
	брекет VPM-22-31 (4 шт)	1.29	0.6	0.65	2.90	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет	
	брекет VPM-22-33H (1 шт)	1.02	0.6	0.65	3.36	3°	0°	Синий	33	Да	
	брекет VPM-22-34H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.21	0°	-12°	Коричневый	34	Да	
	брекет VPM-22-35H (1 шт)	0.84	0.6	0.65	3.21	0°	-17°	Голубой	35	Да	
	брекет VPM-22-43H (1 шт)	1.02	0.6	0.65	3.36	3°	0°	Синий	43	Да	
	брекет VPM-22-44H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.21	0°	-12°	Коричневый	44	Да	
	брекет VPM-22-45H (1 шт)	0.84	0.6	0.65	3.21	0°	-17°	Голубой	45	Да	
	брекет VPM-22-11 (1 шт)	0.92	0.6	0.61	3.15	1°	14°	Зеленый	11	Нет	
	брекет VPM-22-12 (1 шт)	1.10	0.6	0.59	2.95	8°	10°	Черный	12	Нет	
	Набор брекетов Rose 3-3 3H Lower Roth 022, RCR-22-031	брекет RCR-22-13H (1 шт)	0.80	0.6	0.65	3.39	8°	0°	Красный	13	Да
брекет VPM-22-14H (2 шт)		0.85	0.6	0.65	3.20	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да	
брекет VPM-22-21 (1 шт)		0.86	0.6	0.61	3.15	5°	11°	Зеленый	21	Нет	
брекет VPM-22-22 (1 шт)		1.10	0.6	0.59	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет	
брекет VPM-22-23H (1 шт)		0.80	0.6	0.65	3.39	8°	-2°	Красный	23	Да	
брекет VPM-22-24H (2 шт)		0.85	0.6	0.65	3.20	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да	
Набор брекетов Rose 3-3 3H Upper Roth 022, RCR-22-301		брекет RCR-22-31 (4 шт)	1.1	0.6	0.82	2.75	1°	-1°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
		брекет RCR-22-33H (1 шт)	1.05	0.6	0.88	3.40	7°	-11°	Синий	33	Да
		брекет RCR-22-43H (1 шт)	1.05	0.6	0.88	3.40	7°	-11°	Синий	43	Да
Набор брекетов Rose 3-3 3H Upper/Lower Roth 022, RCR-22-331		брекет RCR-22-11 (1 шт)	0.7	0.6	0.6	3.05	5°	13°	Зеленый	11	Нет
		брекет RCR-22-12 (1 шт)	0.9	0.6	0.55	2.80	1°	8°	Черный	12	Нет
		брекет RCR-22-13H (1 шт)	0.87	0.6	0.88	3.35	0°	-7°	Красный	13	Да
		брекет RCR-22-21 (1 шт)	0.95	0.6	1.01	3.05	5°	11°	Зеленый	21	Нет
		брекет RCR-22-22 (1 шт)	1.27	0.6	0.89	2.80	9°	8°	Черный	22	Нет
		брекет RCR-22-23H (1 шт)	0.87	0.6	0.88	3.35	8°	-2°	Красный	23	Да
	брекет RCR-22-31 (4 шт)	1.1	0.6	0.82	2.75	1°	-1°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет	
Набор брекетов Rose 3-3 3H Upper/Lower Roth 022, RCR-22-331	брекет RCR-22-33H (1 шт)	1.05	0.6	0.88	3.40	7°	-11°	Синий	33	Да	
	брекет RCR-22-43H (1 шт)	1.05	0.6	0.88	3.40	7°	-11°	Синий	43	Да	
	брекет RCR-22-11 (1 шт)	0.7	0.6	0.6	3.05	5°	13°	Зеленый	11	Нет	
	брекет RCR-22-12 (1 шт)	0.9	0.6	0.55	2.80	1°	8°	Черный	12	Нет	

Набор брекетов Rose 5-5 345H Lower Roth 022, RCR-22-053	брекет RCR-22-13H (1 шт)	0.87	0.6	0.88	3.35	0°	-7°	Красный	13	Да
	брекет RCR-22-21 (1 шт)	0.95	0.6	1.01	3.05	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет RCR-22-22 (1 шт)	1.27	0.6	0.89	2.80	9°	8°	Черный	22	Нет
	брекет RCR-22-23H (1 шт)	0.87	0.6	0.88	3.35	8°	-2°	Красный	23	Да
	брекет RCR-22-31 (4 шт)	1.1	0.6	0.82	2.75	1°	-1°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет RCR-22-33H (1 шт)	1.05	0.6	0.88	3.40	7°	-11°	Синий	33	Да
	брекет RCR-22-34H (1 шт)	0.75	0.6	0.86	3.3	0°	-23°	Коричневый	34	Да
	брекет RCR-22-35H (1 шт)	0.95	0.6	0.95	3.3	1°	-34°	Голубой	35	Да
	брекет RCR-22-43H (1 шт)	1.05	0.6	0.88	3.40	7°	-11°	Синий	43	Да
	брекет RCR-22-44H (1 шт)	0.95	0.6	0.96	3.3	0°	-17°	Коричневый	44	Да
Набор брекетов Rose 5-5 345H Upper Roth 022, RCR-22-503	брекет RCR-22-11 (1 шт)	0.7	0.6	0.6	3.05	5°	13°	Зеленый	11	Нет
	брекет RCR-22-12 (1 шт)	0.9	0.6	0.55	2.80	1°	8°	Черный	12	Нет
	брекет RCR-22-13H (1 шт)	0.87	0.6	0.88	3.35	0°	-7°	Красный	13	Да
	брекет RCR-22-14H (2 шт)	0.85	0.6	0.8	3.3	1°	-2°	Фиолетовый	14, 15	Да
	брекет RCR-22-21 (1 шт)	0.95	0.6	1.01	3.05	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет RCR-22-22 (1 шт)	1.27	0.6	0.89	2.80	9°	8°	Черный	22	Нет
	брекет RCR-22-23H (1 шт)	0.87	0.6	0.88	3.35	8°	-2°	Красный	23	Да
	брекет RCR-22-24H (2 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да
	брекет RCR-22-31 (4 шт)	1.1	0.6	0.82	2.75	1°	-1°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет RCR-22-33H (1 шт)	1.05	0.6	0.88	3.40	7°	-11°	Синий	33	Да
Набор брекетов Rose 5-5 345H Upper/Lower Roth 022, RCR-22-553	брекет RCR-22-34H (1 шт)	0.75	0.6	0.86	3.3	0°	-23°	Коричневый	34	Да
	брекет RCR-22-35H (1 шт)	0.95	0.6	0.95	3.3	1°	-34°	Голубой	35	Да
	брекет RCR-22-43H (1 шт)	1.05	0.6	0.88	3.40	7°	-11°	Синий	43	Да
	брекет RCR-22-44H (1 шт)	0.95	0.6	0.96	3.3	0°	-17°	Коричневый	44	Да
	брекет RCR-22-45H (1 шт)	1.01	0.6	1.01	3.3	0°	-22°	Голубой	45	Да
	брекет RCR-22-11 (1 шт)	0.7	0.6	0.6	3.05	5°	13°	Зеленый	11	Нет
	брекет RCR-22-12 (1 шт)	0.9	0.6	0.55	2.80	1°	8°	Черный	12	Нет
	брекет RCR-22-13H (1 шт)	0.87	0.6	0.88	3.35	0°	-7°	Красный	13	Да
	брекет RCR-22-14H (2 шт)	0.85	0.6	0.8	3.3	1°	-2°	Фиолетовый	14, 15	Да
	брекет RCR-22-21 (1 шт)	0.95	0.6	1.01	3.05	5°	11°	Зеленый	21	Нет
брекет RCR-22-22 (1 шт)	1.27	0.6	0.89	2.80	9°	8°	Черный	22	Нет	
брекет RCR-22-23H (1 шт)	0.87	0.6	0.88	3.35	8°	-2°	Красный	23	Да	
брекет RCR-22-24H (2 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да	

Набор брекетов Rose 3-3 3H Lower MBT 022, RCM-22-031	брекет RCM-22-31 (4 шт)	1.5	0.6	0.83	2.75	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет RCM-22-33H (1 шт)	1.05	0.6	0.81	3.40	3°	0°	Синий	33	Да
	брекет RCM-22-43H (1 шт)	1.05	0.6	0.81	3.40	3°	0°	Синий	43	Да
Набор брекетов Rose 3-3 3H Upper MBT 022, RCM-22-301	брекет RCM-22-11 (1 шт)	0.85	0.6	0.85	3.05	1°	5°	Зеленый	11	Нет
	брекет RCM-22-12 (1 шт)	1.26	0.6	0.95	2.80	8°	10°	Черный	12	Нет
	брекет RCM-22-13H (1 шт)	0.87	0.6	0.92	3.35	8°	0°	Красный	13	Да
	брекет RCM-22-21 (1 шт)	1.01	0.6	1.01	3.05	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	брекет RCM-22-22 (1 шт)	1.26	0.6	0.95	2.80	8°	10°	Черный	22	Нет
	брекет RCM-22-23H (1 шт)	0.87	0.6	0.92	3.35	8°	0°	Красный	23	Да
	Набор брекетов Rose 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, RCM-22-331	брекет RCM-22-31 (4 шт)	1.5	0.6	0.83	2.75	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42
брекет RCM-22-33H (1 шт)		1.05	0.6	0.81	3.40	3°	0°	Синий	33	Да
брекет RCM-22-43H (1 шт)		1.05	0.6	0.81	3.40	3°	0°	Синий	43	Да
брекет RCM-22-11 (1 шт)		0.85	0.6	0.85	3.05	1°	5°	Зеленый	11	Нет
брекет RCM-22-12 (1 шт)		1.26	0.6	0.95	2.80	8°	10°	Черный	12	Нет
брекет RCM-22-13H (1 шт)		0.87	0.6	0.92	3.35	8°	0°	Красный	13	Да
брекет RCM-22-21 (1 шт)		1.01	0.6	1.01	3.05	4°	17°	Зеленый	21	Нет
брекет RCM-22-22 (1 шт)		1.26	0.6	0.95	2.80	8°	10°	Черный	22	Нет
брекет RCM-22-23H (1 шт)		0.87	0.6	0.92	3.35	8°	0°	Красный	23	Да
Набор брекетов Rose 5-5 3H Lower MBT 022, RCM-22-051	брекет RCM-22-31 (4 шт)	1.5	0.6	0.83	2.75	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет RCM-22-33H (1 шт)	1.05	0.6	0.81	3.40	3°	0°	Синий	33	Да
	брекет RCM-22-34 (1 шт)	0.92	0.6	0.93	3.3	0°	-12°	Коричневый	34	Нет
	брекет RCM-22-35 (1 шт)	0.95	0.6	0.95	3.3	0°	-17°	Голубой	35	Нет
	брекет RCM-22-43H (1 шт)	1.05	0.6	0.81	3.40	3°	0°	Синий	43	Да
	брекет RCM-22-44 (1 шт)	0.92	0.6	0.93	3.3	0°	-12°	Коричневый	44	Нет
	брекет RCM-22-45 (1 шт)	0.95	0.6	0.95	3.3	0°	-17°	Голубой	45	Нет
	Набор брекетов Rose 5-5 3H Upper MBT 022, RCM-22-501	брекет RCM-22-11 (1 шт)	0.85	0.6	0.85	3.05	1°	5°	Зеленый	11
брекет RCM-22-12 (1 шт)		1.26	0.6	0.95	2.80	8°	10°	Черный	12	Нет
брекет RCM-22-13H (1 шт)		0.87	0.6	0.92	3.35	8°	0°	Красный	13	Да
брекет RCM-22-14 (2 шт)		0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Нет
брекет RCM-22-21 (1 шт)		1.01	0.6	1.01	3.05	4°	17°	Зеленый	21	Нет
брекет RCM-22-22 (1 шт)		1.26	0.6	0.95	2.80	8°	10°	Черный	22	Нет
брекет RCM-22-23H (1 шт)		0.87	0.6	0.92	3.35	8°	0°	Красный	23	Да
брекет RCM-22-24 (2 шт)		0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Нет
Набор брекетов Rose 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, RCM-22-551	брекет RCM-22-31 (4 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет

	брекет RCM-22-33H (1 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Синий	33	Да
	брекет RCM-22-34 (1 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Коричневый	34	Нет
	брекет RCM-22-35 (1 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Голубой	35	Нет
	брекет RCM-22-43H (1 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Синий	43	Да
	брекет RCM-22-44 (1 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Коричневый	44	Нет
	брекет RCM-22-45 (1 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Голубой	45	Нет
	брекет RCM-22-11 (1 шт)	0.85	0.6	0.85	3.05	1°	5°	Зеленый	11	Нет
	брекет RCM-22-12 (1 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Черный	12	Нет
	брекет RCM-22-13H (1 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Красный	13	Да
	брекет RCM-22-14 (2 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Нет
	брекет RCM-22-21 (1 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Зеленый	21	Нет
	брекет RCM-22-22 (1 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Черный	22	Нет
	брекет RCM-22-23H (1 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Красный	23	Да
	брекет RCM-22-24 (2 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Нет
Набор брекетов Rose 5-5 345H Lower MBT 022, RCM-22-053	брекет RCM-22-31 (4 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет RCM-22-33H (1 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Синий	33	Да
	брекет RCM-22-34H (1 шт)	0.92	0.6	0.93	3.3	0°	-12°	Коричневый	34	Да
	брекет RCM-22-35H (1 шт)	0.95	0.6	0.95	3.3	0°	-17°	Голубой	35	Да
	брекет RCM-22-43H (1 шт)	1.05	0.6	0.81	3.40	3°	0°	Синий	43	Да
	брекет RCM-22-44H (1 шт)	0.92	0.6	0.93	3.3	0°	-12°	Коричневый	44	Да
	брекет RCM-22-45H (1 шт)	0.95	0.6	0.95	3.3	0°	-17°	Голубой	45	Да
Набор брекетов Rose 5-5 345H Upper MBT 022, RCM-22-503	брекет RCM-22-11 (1 шт)	0.85	0.6	0.85	3.05	1°	5°	Зеленый	11	Нет
	брекет RCM-22-12 (1 шт)	1.26	0.6	0.95	2.80	8°	10°	Черный	12	Нет
	брекет RCM-22-13H (1 шт)	0.87	0.6	0.92	3.35	8°	0°	Красный	13	Да
	брекет RCM-22-14H (2 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да
	брекет RCM-22-21 (1 шт)	1.01	0.6	1.01	3.05	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	брекет RCM-22-22 (1 шт)	1.26	0.6	0.95	2.80	8°	10°	Черный	22	Нет
	брекет RCM-22-23H (1 шт)	0.87	0.6	0.92	3.35	8°	0°	Красный	23	Да
	брекет RCM-22-24H (2 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да
Набор брекетов Rose 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, RCM-22-553	брекет RCM-22-31 (4 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет RCM-22-33H (1 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Синий	33	Да
	брекет RCM-22-34H (1 шт)	0.92	0.6	0.93	3.3	0°	-12°	Коричневый	34	Да
	брекет RCM-22-35H (1 шт)	0.95	0.6	0.95	3.3	0°	-17°	Голубой	35	Да
	брекет RCM-22-43H (1 шт)	1.05	0.6	0.81	3.40	3°	0°	Синий	43	Да

	брекет RCM-22-44H (1 шт)	0.92	0.6	0.93	3.3	0°	-12°	Коричневый	44	Да
	брекет RCM-22-45H (1 шт)	0.95	0.6	0.95	3.3	0°	-17°	Голубой	45	Да
	брекет RCM-22-11 (1 шт)	0.85	0.6	0.85	3.05	1°	5°	Зеленый	11	Нет
	брекет RCM-22-12 (1 шт)	1.26	0.6	0.95	2.80	8°	10°	Черный	12	Нет
	брекет RCM-22-13H (1 шт)	0.87	0.6	0.92	3.35	8°	0°	Красный	13	Да
	брекет RCM-22-14H (2 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да
	брекет RCM-22-21 (1 шт)	1.01	0.6	1.01	3.05	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	брекет RCM-22-22 (1 шт)	1.26	0.6	0.95	2.80	8°	10°	Черный	22	Нет
	брекет RCM-22-23H (1 шт)	0.87	0.6	0.92	3.35	8°	0°	Красный	23	Да
	брекет RCM-22-24H (2 шт)	0.95	0.6	0.86	3.3	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да
Набор брекетов Rosa 3-3 3H Lower Roth 018, RSR-18-031	брекет RSR-18-31 (4 шт)	1.5	0.5	0.7	2.85	0°	0°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет RSR-18-33H (1 шт)	0.79	0.5	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	33	Да
	брекет RSR-18-43H (1 шт)	1.04	0.5	0.7	3.2	3°	-17°	Синий	43	Да
Набор брекетов Rosa 3-3 3H Upper Roth 018, RSR-18-301	брекет RSR-18-11 (1 шт)	1.04	0.5	0.85	3.2	2°	11°	Зеленый	11	Нет
	брекет RSR-18-12 (1 шт)	1.39	0.5	0.8	2.95	9°	8°	Черный	12	Нет
	брекет RSR-18-13H (1 шт)	0.96	0.5	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	13	Да
	брекет RSR-18-21 (1 шт)	1.04	0.5	0.95	3.2	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет RSR-18-22 (1 шт)	1.39	0.5	0.8	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет
	брекет RSR-18-23H (1 шт)	0.96	0.5	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	23	Да
Набор брекетов Rosa 3-3 3H Upper/Lower Roth 018, RSR-18-331	брекет RSR-18-31 (4 шт)	1.5	0.5	0.7	2.85	0°	0°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет RSR-18-33H (1 шт)	0.79	0.5	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	33	Да
	брекет RSR-18-43H (1 шт)	1.04	0.5	0.7	3.2	3°	-17°	Синий	43	Да
	брекет RSR-18-11 (1 шт)	1.04	0.5	0.85	3.2	2°	11°	Зеленый	11	Нет
	брекет RSR-18-12 (1 шт)	1.39	0.5	0.8	2.95	9°	8°	Черный	12	Нет
	брекет RSR-18-13H (1 шт)	0.96	0.5	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	13	Да
	брекет RSR-18-21 (1 шт)	1.04	0.5	0.95	3.2	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет RSR-18-22 (1 шт)	1.39	0.5	0.8	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет
	брекет RSR-18-23H (1 шт)	0.96	0.5	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	23	Да
Набор брекетов Rosa 5-5 3H Lower Roth 018, RSR-18-051	брекет RSR-18-31 (4 шт)	1.5	0.5	0.7	2.85	0°	0°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет RSR-18-33H (1 шт)	0.79	0.5	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	33	Да
	брекет RSR-18-34 (1 шт)	1.04	0.5	0.7	3.2	3°	-17°	Коричневый	34	Нет
	брекет RSR-18-35 (1 шт)	1.04	0.5	0.7	3.2	6°	-21°	Голубой	35	Нет
	брекет RSR-18-43H (1 шт)	0.79	0.5	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	43	Да
	брекет RSR-18-44 (1 шт)	1.04	0.5	0.7	3.2	3°	-17°	Коричневый	44	Нет

Набор брекетов Rosa 5-5 3H Upper Roth 018, RSR-18-501	брекет RSR-18-45 (1 шт)	1.04	0.5	0.7	3.2	6°	-21°	Голубой	45	Нет	
	брекет RSR-18-11 (1 шт)	1.04	0.5	0.85	3.2	2°	11°	Зеленый	11	Нет	
	брекет RSR-18-12 (1 шт)	1.39	0.5	0.8	2.95	9°	8°	Черный	12	Нет	
	брекет RSR-18-13H (1 шт)	0.96	0.5	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	13	Да	
	брекет RSR-18-14 (2 шт)	0.96	0.5	0.8	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Нет	
	брекет RSR-18-21 (1 шт)	1.04	0.5	0.95	3.2	5°	11°	Зеленый	21	Нет	
	брекет RSR-18-22 (1 шт)	1.39	0.5	0.8	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет	
	брекет RSR-18-23H (1 шт)	0.96	0.5	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	23	Да	
	брекет RSR-18-24 (2 шт)	0.96	0.5	0.8	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Нет	
Набор брекетов Rosa 5-5 3H Upper/Lower Roth 018, RSR-18-551	брекет RSR-18-31 (4 шт)	1.5	0.5	0.7	2.85	0°	0°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет	
	брекет RSR-18-33H (1 шт)	0.79	0.5	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	33	Да	
	брекет RSR-18-34 (1 шт)	1.04	0.5	0.7	3.2	3°	-17°	Коричневый	34	Нет	
	брекет RSR-18-35 (1 шт)	1.04	0.5	0.7	3.2	6°	-21°	Голубой	35	Нет	
	брекет RSR-18-43H (1 шт)	0.79	0.5	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	43	Да	
	брекет RSR-18-44 (1 шт)	1.04	0.5	0.7	3.2	3°	-17°	Коричневый	44	Нет	
	брекет RSR-18-45 (1 шт)	1.04	0.5	0.7	3.2	6°	-21°	Голубой	45	Нет	
	брекет RSR-18-11 (1 шт)	1.04	0.5	0.85	3.2	2°	11°	Зеленый	11	Нет	
	брекет RSR-18-12 (1 шт)	1.39	0.5	0.8	2.95	9°	8°	Черный	12	Нет	
	брекет RSR-18-13H (1 шт)	0.96	0.5	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	13	Да	
	брекет RSR-18-14 (2 шт)	0.96	0.5	0.8	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Нет	
	брекет RSR-18-21 (1 шт)	1.04	0.5	0.95	3.2	5°	11°	Зеленый	21	Нет	
	брекет RSR-18-22 (1 шт)	1.39	0.5	0.8	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет	
	брекет RSR-18-23H (1 шт)	0.96	0.5	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	23	Да	
	брекет RSR-18-24 (2 шт)	0.96	0.5	0.8	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Нет	
	Набор брекетов Rosa 5-5 345H Lower Roth 018, RSR-18-051	брекет RSR-18-31 (4 шт)	1.5	0.5	0.7	2.85	0°	0°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
		брекет RSR-18-33H (1 шт)	0.79	0.5	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	33	Да
брекет RSR-18-34H (1 шт)		1.04	0.5	0.7	3.2	3°	-17°	Коричневый	34	Да	
брекет RSR-18-35H (1 шт)		1.04	0.5	0.7	3.2	6°	-21°	Голубой	35	Да	
брекет RSR-18-43H (1 шт)		0.79	0.5	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	43	Да	
брекет RSR-18-44H (1 шт)		1.04	0.5	0.7	3.2	3°	-17°	Коричневый	44	Да	
брекет RSR-18-45H (1 шт)		1.04	0.5	0.7	3.2	6°	-21°	Голубой	45	Да	
Набор брекетов Rosa 5-5 345H Upper Roth 018, RSR-18-503	брекет RSR-18-11 (1 шт)	1.04	0.5	0.85	3.2	2°	11°	Зеленый	11	Нет	
	брекет RSR-18-12 (1 шт)	1.39	0.5	0.8	2.95	9°	8°	Черный	12	Нет	
	брекет RSR-18-13H (1 шт)	0.96	0.5	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	13	Да	

	брекет RSR-18-14H (2 шт)	0.96	0.5	0.8	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да	
	брекет RSR-18-21 (1 шт)	1.04	0.5	0.95	3.2	5°	11°	Зеленый	21	Нет	
	брекет RSR-18-22 (1 шт)	1.39	0.5	0.8	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет	
	брекет RSR-18-23H (1 шт)	0.96	0.5	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	23	Да	
	брекет RSR-18-24H (2 шт)	0.96	0.5	0.8	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да	
Набор брекетов Rosa 5-5 345H Upper/Lower Roth 018, RSR-18-553	брекет RSR-18-31 (4 шт)	1.5	0.5	0.7	2.85	0°	0°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет	
	брекет RSR-18-33H (1 шт)	0.79	0.5	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	33	Да	
	брекет RSR-18-34H (1 шт)	1.04	0.5	0.7	3.2	3°	-17°	Коричневый	34	Да	
	брекет RSR-18-35H (1 шт)	1.04	0.5	0.7	3.2	6°	-21°	Голубой	35	Да	
	брекет RSR-18-43H (1 шт)	0.79	0.5	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	43	Да	
	брекет RSR-18-44H (1 шт)	1.04	0.5	0.7	3.2	3°	-17°	Коричневый	44	Да	
	брекет RSR-18-45H (1 шт)	1.04	0.5	0.7	3.2	6°	-21°	Голубой	45	Да	
	брекет RSR-18-11 (1 шт)	1.04	0.5	0.85	3.2	2°	11°	Зеленый	11	Нет	
	брекет RSR-18-12 (1 шт)	1.39	0.5	0.8	2.95	9°	8°	Черный	12	Нет	
	брекет RSR-18-13H (1 шт)	0.96	0.5	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	13	Да	
	брекет RSR-18-14H (2 шт)	0.96	0.5	0.8	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да	
	брекет RSR-18-21 (1 шт)	1.04	0.5	0.95	3.2	5°	11°	Зеленый	21	Нет	
	брекет RSR-18-22 (1 шт)	1.39	0.5	0.8	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет	
	брекет RSR-18-23H (1 шт)	0.96	0.5	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	23	Да	
	брекет RSR-18-24H (2 шт)	0.96	0.5	0.8	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да	
	Набор брекетов Rosa 3-3 3H Lower Roth 022, RSR-22-031	брекет RSR-22-31 (4 шт)	1.5	0.6	0.7	2.85	0°	0°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
		брекет RSR-22-33H (1 шт)	0.79	0.6	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	33	Да
		брекет RSR-22-43H (1 шт)	0.79	0.6	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	43	Да
Набор брекетов Rosa 3-3 3H Upper Roth 022, RSR-22-301	брекет RSR-22-11 (1 шт)	0.9	0.6	0.95	3.2	0°	8°	Зеленый	11	Нет	
	брекет RSR-22-12 (1 шт)	1.39	0.6	0.8	2.95	9°	8°	Черный	12	Нет	
	брекет RSR-22-13H (1 шт)	0.96	0.6	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	13	Да	
	брекет RSR-22-21 (1 шт)	1.04	0.6	0.95	3.2	5°	11°	Зеленый	21	Нет	
	брекет RSR-22-22 (1 шт)	1.39	0.6	0.8	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет	
	брекет RSR-22-23H (1 шт)	0.96	0.6	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	23	Да	
Набор брекетов Rosa 3-3 3H Upper/Lower Roth 022, RSR-22-331	брекет RSR-22-31 (4 шт)	1.5	0.6	0.7	2.85	0°	0°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет	
	брекет RSR-22-33H (1 шт)	0.79	0.6	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	33	Да	
	брекет RSR-22-43H (1 шт)	0.79	0.6	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	43	Да	
	брекет RSR-22-11 (1 шт)	0.9	0.6	0.95	3.2	0°	8°	Зеленый	11	Нет	
	брекет RSR-22-12 (1 шт)	1.39	0.6	0.8	2.95	9°	8°	Черный	12	Нет	

	брекет RSR-22-13H (1 шт)	0.96	0.6	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	13	Да
	брекет RSR-22-21 (1 шт)	1.04	0.6	0.95	3.2	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет RSR-22-22 (1 шт)	1.39	0.6	0.8	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет
	брекет RSR-22-23H (1 шт)	0.96	0.6	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	23	Да
Набор брекетов Rosa 5-5 3H Lower Roth 022, RSR-22-051	брекет RSR-22-31 (4 шт)	1.5	0.6	0.7	2.85	0°	0°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет RSR-22-33H (1 шт)	0.79	0.6	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	33	Да
	брекет RSR-22-34 (1 шт)	1.04	0.6	0.7	3.2	3°	-17°	Коричневый	34	Нет
	брекет RSR-22-35 (1 шт)	1.04	0.6	0.7	3.2	6°	-21°	Голубой	35	Нет
	брекет RSR-22-43H (1 шт)	0.79	0.6	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	43	Да
	брекет RSR-22-44 (1 шт)	1.04	0.6	0.7	3.2	3°	-17°	Коричневый	44	Нет
	брекет RSR-22-45 (1 шт)	1.04	0.6	0.7	3.2	6°	-21°	Голубой	45	Нет
	брекет RSR-22-11 (1 шт)	0.9	0.6	0.95	3.2	0°	8°	Зеленый	11	Нет
	брекет RSR-22-12 (1 шт)	1.39	0.6	0.8	2.95	9°	8°	Черный	12	Нет
	брекет RSR-22-13H (1 шт)	0.96	0.6	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	13	Да
Набор брекетов Rosa 5-5 3H Upper Roth 022, RSR-22-501	брекет RSR-22-14 (2 шт)	0.96	0.6	0.8	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Нет
	брекет RSR-22-21 (1 шт)	1.04	0.6	0.95	3.2	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет RSR-22-22 (1 шт)	1.39	0.6	0.8	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет
	брекет RSR-22-23H (1 шт)	0.96	0.6	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	23	Да
	брекет RSR-22-24 (2 шт)	0.96	0.6	0.8	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Нет
	брекет RSR-22-31 (4 шт)	1.5	0.6	0.7	2.85	0°	0°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет RSR-22-33H (1 шт)	0.79	0.6	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	33	Да
	брекет RSR-22-34 (1 шт)	1.04	0.6	0.7	3.2	3°	-17°	Коричневый	34	Нет
	брекет RSR-22-35 (1 шт)	1.04	0.6	0.7	3.2	6°	-21°	Голубой	35	Нет
	брекет RSR-22-43H (1 шт)	0.79	0.6	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	43	Да
Набор брекетов Rosa 5-5 3H Upper/Lower Roth 022, RSR-22-551	брекет RSR-22-44 (1 шт)	1.04	0.6	0.7	3.2	3°	-17°	Коричневый	44	Нет
	брекет RSR-22-45 (1 шт)	1.04	0.6	0.7	3.2	6°	-21°	Голубой	45	Нет
	брекет RSR-22-11 (1 шт)	0.9	0.6	0.95	3.2	0°	8°	Зеленый	11	Нет
	брекет RSR-22-12 (1 шт)	1.39	0.6	0.8	2.95	9°	8°	Черный	12	Нет
	брекет RSR-22-13H (1 шт)	0.96	0.6	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	13	Да
	брекет RSR-22-14 (2 шт)	0.96	0.6	0.8	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Нет
	брекет RSR-22-21 (1 шт)	1.04	0.6	0.95	3.2	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет RSR-22-22 (1 шт)	1.39	0.6	0.8	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет
	брекет RSR-22-23H (1 шт)	0.96	0.6	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	23	Да
	брекет RSR-22-24 (2 шт)	0.96	0.6	0.8	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Нет

Набор брекетов Rosa 5-5 345H Lower Roth 022, RSR-22-053	брекет RSR-22-31 (4 шт)	1.5	0.6	0.7	2.85	0°	0°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет RSR-22-33H (1 шт)	0.79	0.6	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	33	Да
	брекет RSR-22-34H (1 шт)	1.04	0.6	0.7	3.2	3°	-17°	Коричневый	34	Да
	брекет RSR-22-35H (1 шт)	1.04	0.6	0.7	3.2	6°	-21°	Голубой	35	Да
	брекет RSR-22-43H (1 шт)	0.79	0.6	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	43	Да
	брекет RSR-22-44H (1 шт)	1.04	0.6	0.7	3.2	3°	-17°	Коричневый	44	Да
	брекет RSR-22-45H (1 шт)	1.04	0.6	0.7	3.2	6°	-21°	Голубой	45	Да
Набор брекетов Rosa 5-5 345H Upper Roth 022, RSR-22-503	брекет RSR-22-11 (1 шт)	0.9	0.6	0.95	3.2	0°	8°	Зеленый	11	Нет
	брекет RSR-22-12 (1 шт)	1.39	0.6	0.8	2.95	9°	8°	Черный	12	Нет
	брекет RSR-22-13H (1 шт)	0.96	0.6	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	13	Да
	брекет RSR-22-14H (2 шт)	0.96	0.6	0.8	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да
	брекет RSR-22-21 (1 шт)	1.04	0.6	0.95	3.2	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет RSR-22-22 (1 шт)	1.39	0.6	0.8	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет
	брекет RSR-22-23H (1 шт)	0.96	0.6	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	23	Да
	брекет RSR-22-24H (2 шт)	0.96	0.6	0.8	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да
Набор брекетов Rosa 5-5 345H Upper/Lower Roth 022, RSR-22-553	брекет RSR-22-31 (4 шт)	1.5	0.6	0.7	2.85	0°	0°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет RSR-22-33H (1 шт)	0.79	0.6	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	33	Да
	брекет RSR-22-34H (1 шт)	1.04	0.6	0.7	3.2	3°	-17°	Коричневый	34	Да
	брекет RSR-22-35H (1 шт)	1.04	0.6	0.7	3.2	6°	-21°	Голубой	35	Да
	брекет RSR-22-43H (1 шт)	0.79	0.6	0.9	3.4	7°	-11°	Синий	43	Да
	брекет RSR-22-44H (1 шт)	1.04	0.6	0.7	3.2	3°	-17°	Коричневый	44	Да
	брекет RSR-22-45H (1 шт)	1.04	0.6	0.7	3.2	6°	-21°	Голубой	45	Да
	брекет RSR-22-11 (1 шт)	0.9	0.6	0.95	3.2	0°	8°	Зеленый	11	Нет
	брекет RSR-22-12 (1 шт)	1.39	0.6	0.8	2.95	9°	8°	Черный	12	Нет
	брекет RSR-22-13H (1 шт)	0.96	0.6	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	13	Да
	брекет RSR-22-14H (2 шт)	0.96	0.6	0.8	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да
	брекет RSR-22-21 (1 шт)	1.04	0.6	0.95	3.2	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет RSR-22-22 (1 шт)	1.39	0.6	0.8	2.95	9°	8°	Черный	22	Нет
	брекет RSR-22-23H (1 шт)	0.96	0.6	0.73	3.4	8°	-2°	Красный	23	Да
брекет RSR-22-24H (2 шт)	0.96	0.6	0.8	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да	
Набор брекетов Rosa 3-3 3H Lower MBT 018, RSM-18-031	брекет RSM-18-31 (4 шт)	1.5	0.5	0.8	2.85	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет RSM-18-33H (1 шт)	0.79	0.5	0.91	3.4	3°	0°	Синий	33	Да
	брекет RSM-18-43H (1 шт)	0.79	0.5	0.91	3.4	3°	0°	Синий	43	Да
Набор брекетов Rosa 3-3 3H Upper MBT 018, RSM-18-301	брекет RSM-18-11 (1 шт)	0.85	0.55	1	3.2	7°	18°	Зеленый	11	Нет

	бретер RSM-18-12 (1 шт)	1.39	0.5	0.85	2.95	8°	10°	Черный	12	Нет
	бретер RSM-18-13H (1 шт)	0.96	0.5	0.8	3.4	8°	0°	Красный	13	Да
	бретер RSM-18-21 (1 шт)	1.04	0.5	1.05	3.2	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	бретер RSM-18-22 (1 шт)	1.39	0.5	0.85	2.95	8°	10°	Черный	22	Нет
	бретер RSM-18-23H (1 шт)	0.96	0.5	0.8	3.4	8°	0	Красный	23	Да
Набор бретеров Rosa 3-3 3H Upper/Lower MBT 018, RSM-18-331	бретер RSM-18-31 (4 шт)	1.5	0.5	0.8	2.85	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	бретер RSM-18-33H (1 шт)	0.79	0.5	0.91	3.4	3°	0°	Синий	33	Да
	бретер RSM-18-43H (1 шт)	0.79	0.5	0.91	3.4	3°	0°	Синий	43	Да
	бретер RSM-18-11 (1 шт)	0.85	0.55	1	3.2	7°	18°	Зеленый	11	Нет
	бретер RSM-18-12 (1 шт)	1.39	0.5	0.85	2.95	8°	10°	Черный	12	Нет
	бретер RSM-18-13H (1 шт)	0.96	0.5	0.8	3.4	8°	0°	Красный	13	Да
	бретер RSM-18-21 (1 шт)	1.04	0.5	1.05	3.2	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	бретер RSM-18-22 (1 шт)	1.39	0.5	0.85	2.95	8°	10°	Черный	22	Нет
	бретер RSM-18-23H (1 шт)	0.96	0.5	0.8	3.4	8°	0	Красный	23	Да
	Набор бретеров Rosa 5-5 3H Lower MBT 018, RSM-18-051	бретер RSM-18-31 (4 шт)	1.5	0.5	0.8	2.85	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42
бретер RSM-18-33H (1 шт)		0.79	0.5	0.91	3.4	3°	0°	Синий	33	Да
бретер RSM-18-34 (1 шт)		1.04	0.5	0.9	3.2	0°	-12°	Коричневый	34	Нет
бретер RSM-18-35 (1 шт)		1.04	0.5	0.9	3.2	0°	-17°	Голубой	35	Нет
бретер RSM-18-43H (1 шт)		0.79	0.5	0.91	3.4	3°	0°	Синий	43	Да
бретер RSM-18-44 (1 шт)		1.04	0.5	0.9	3.2	0°	-12°	Коричневый	44	Нет
бретер RSM-18-45 (1 шт)		1.04	0.5	0.9	3.2	0°	-17°	Голубой	45	Нет
Набор бретеров Rosa 5-5 3H Upper MBT 018, RSM-18-501		бретер RSM-18-11 (1 шт)	0.85	0.55	1	3.2	7°	18°	Зеленый	11
	бретер RSM-18-12 (1 шт)	1.39	0.5	0.85	2.95	8°	10°	Черный	12	Нет
	бретер RSM-18-13H (1 шт)	0.96	0.5	0.8	3.4	8°	0°	Красный	13	Да
	бретер RSM-18-14 (2 шт)	0.96	0.5	0.9	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Нет
	бретер RSM-18-21 (1 шт)	1.04	0.5	1.05	3.2	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	бретер RSM-18-22 (1 шт)	1.39	0.5	0.85	2.95	8°	10°	Черный	22	Нет
	бретер RSM-18-23H (1 шт)	0.96	0.5	0.8	3.4	8°	0	Красный	23	Да
	бретер RSM-18-24 (2 шт)	0.96	0.5	0.9	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Нет
	Набор бретеров Rosa 5-5 3H Upper/Lower MBT 018, RSM-18-551	бретер RSM-18-31 (4 шт)	1.5	0.5	0.8	2.85	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42
бретер RSM-18-33H (1 шт)		0.79	0.5	0.91	3.4	3°	0°	Синий	33	Да
бретер RSM-18-34 (1 шт)		1.04	0.5	0.9	3.2	0°	-12°	Коричневый	34	Нет
бретер RSM-18-35 (1 шт)		1.04	0.5	0.9	3.2	0°	-17°	Голубой	35	Нет
бретер RSM-18-43H (1 шт)		0.79	0.5	0.91	3.4	3°	0°	Синий	43	Да

	бретер RSM-18-44 (1 шт)	1.04	0.5	0.9	3.2	0°	-12°	Коричневый	44	Нет
	бретер RSM-18-45 (1 шт)	1.04	0.5	0.9	3.2	0°	-17°	Голубой	45	Нет
	бретер RSM-18-11 (1 шт)	0.85	0.55	1	3.2	7°	18°	Зеленый	11	Нет
	бретер RSM-18-12 (1 шт)	1.39	0.5	0.85	2.95	8°	10°	Черный	12	Нет
	бретер RSM-18-13H (1 шт)	0.96	0.5	0.8	3.4	8°	0°	Красный	13	Да
	бретер RSM-18-14 (2 шт)	0.96	0.5	0.9	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Нет
	бретер RSM-18-21 (1 шт)	1.04	0.5	1.05	3.2	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	бретер RSM-18-22 (1 шт)	1.39	0.5	0.85	2.95	8°	10°	Черный	22	Нет
	бретер RSM-18-23H (1 шт)	0.96	0.5	0.8	3.4	8°	0	Красный	23	Да
	бретер RSM-18-24 (2 шт)	0.96	0.5	0.9	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Нет
Набор бретеров Rosa 5-5 345H Lower MBT 018, RSM-18-053	бретер RSM-18-31 (4 шт)	1.5	0.5	0.8	2.85	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	бретер RSM-18-33H (1 шт)	0.79	0.5	0.91	3.4	3°	0°	Синий	33	Да
	бретер RSM-18-34H (1 шт)	1.04	0.5	0.9	3.2	0°	-12°	Коричневый	34	Да
	бретер RSM-18-35H (1 шт)	1.04	0.5	0.9	3.2	0°	-17°	Голубой	35	Да
	бретер RSM-18-43H (1 шт)	0.79	0.5	0.91	3.4	3°	0°	Синий	43	Да
	бретер RSM-18-44H (1 шт)	1.04	0.5	0.9	3.2	0°	-12°	Коричневый	44	Да
	бретер RSM-18-45H (1 шт)	1.04	0.5	0.9	3.2	0°	-17°	Голубой	45	Да
Набор бретеров Rosa 5-5 345H Upper MBT 018, RSM-18-503	бретер RSM-18-11 (1 шт)	0.85	0.55		3.2	7°	18°	Зеленый	11	Нет
	бретер RSM-18-12 (1 шт)	1.39	0.5	0.85	2.95	8°	10°	Черный	12	Нет
	бретер RSM-18-13H (1 шт)	0.96	0.5	0.8	3.4	8°	0°	Красный	13	Да
	бретер RSM-18-14H (2 шт)	0.96	0.5	0.9	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да
	бретер RSM-18-21 (1 шт)	1.04	0.5	1.05	3.2	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	бретер RSM-18-22 (1 шт)	1.39	0.5	0.85	2.95	8°	10°	Черный	22	Нет
	бретер RSM-18-23H (1 шт)	0.96	0.5	0.8	3.4	8°	0	Красный	23	Да
	бретер RSM-18-24H (2 шт)	0.96	0.5	0.9	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да
Набор бретеров Rosa 5-5 345H Upper/Lower MBT 018, RSM-18-553	бретер RSM-18-31 (4 шт)	1.5	0.5	0.8	2.85	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	бретер RSM-18-33H (1 шт)	0.79	0.5	0.91	3.4	3°	0°	Синий	33	Да
	бретер RSM-18-34H (1 шт)	1.04	0.5	0.9	3.2	0°	-12°	Коричневый	34	Да
	бретер RSM-18-35H (1 шт)	1.04	0.5	0.9	3.2	0°	-17°	Голубой	35	Да
	бретер RSM-18-43H (1 шт)	0.79	0.5	0.91	3.4	3°	0°	Синий	43	Да
	бретер RSM-18-44H (1 шт)	1.04	0.5	0.9	3.2	0°	-12°	Коричневый	44	Да
	бретер RSM-18-45H (1 шт)	1.04	0.5	0.9	3.2	0°	-17°	Голубой	45	Да
	бретер RSM-18-11 (1 шт)	0.85	0.55	1	3.2	7°	18°	Зеленый	11	Нет
	бретер RSM-18-12 (1 шт)	1.39	0.5	0.85	2.95	8°	10°	Черный	12	Нет

	бретер RSM-18-13H (1 шт)	0.96	0.5	0.8	3.4	8°	0°	Красный	13	Да
	бретер RSM-18-14H (2 шт)	0.96	0.5	0.9	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да
	бретер RSM-18-21 (1 шт)	1.04	0.5	1.05	3.2	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	бретер RSM-18-22 (1 шт)	1.39	0.5	0.85	2.95	8°	10°	Черный	22	Нет
	бретер RSM-18-23H (1 шт)	0.96	0.5	0.8	3.4	8°	0	Красный	23	Да
	бретер RSM-18-24H (2 шт)	0.96	0.5	0.9	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да
Набор брекетов Rosa 3-3 3H Lower MBT 022, RSM-22-031	бретер RSM-22-31 (4 шт)	1.5	0.6	0.8	2.85	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	бретер RSM-22-33H (1 шт)	0.79	0.6	0.91	3.4	3°	0°	Синий	33	Да
	бретер RSM-22-43H (1 шт)	0.79	0.6	0.91	3.4	3°	0°	Синий	43	Да
Набор брекетов Rosa 3-3 3H Upper MBT 022, RSM-22-301	бретер RSM-22-11 (1 шт)	1.04	0.6	1.05	3.2	0°	18°	Зеленый	11	Нет
	бретер RSM-22-12 (1 шт)	1.39	0.6	0.85	2.95	8°	10°	Черный	12	Нет
	бретер RSM-22-13H (1 шт)	0.96	0.6	0.8	3.4	8°	0°	Красный	13	Да
	бретер RSM-22-21 (1 шт)	1.04	0.6	1.05	3.2	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	бретер RSM-22-22 (1 шт)	1.39	0.6	0.85	2.95	8°	10°	Черный	22	Нет
	бретер RSM-22-23H (1 шт)	0.96	0.6	0.8	3.4	8°	0°	Красный	23	Да
	бретер RSM-22-31 (4 шт)	1.5	0.6	0.8	2.85	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
Набор брекетов Rosa 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, RSM-22-331	бретер RSM-22-33H (1 шт)	0.79	0.6	0.91	3.4	3°	0°	Синий	33	Да
	бретер RSM-22-43H (1 шт)	0.79	0.6	0.91	3.4	3°	0°	Синий	43	Да
	бретер RSM-22-11 (1 шт)	1.04	0.6	1.05	3.2	0°	18°	Зеленый	11	Нет
	бретер RSM-22-12 (1 шт)	1.39	0.6	0.85	2.95	8°	10°	Черный	12	Нет
	бретер RSM-22-13H (1 шт)	0.96	0.6	0.8	3.4	8°	0°	Красный	13	Да
	бретер RSM-22-21 (1 шт)	1.04	0.6	1.05	3.2	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	бретер RSM-22-22 (1 шт)	1.39	0.6	0.85	2.95	8°	10°	Черный	22	Нет
	бретер RSM-22-23H (1 шт)	0.96	0.6	0.8	3.4	8°	0°	Красный	23	Да
	бретер RSM-22-31 (4 шт)	1.5	0.6	0.8	2.85	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	бретер RSM-22-33H (1 шт)	0.79	0.6	0.91	3.4	3°	0°	Синий	33	Да
Набор брекетов Rosa 5-5 3H Lower MBT 022, RSM-22-051	бретер RSM-22-34 (1 шт)	1.04	0.6	0.9	3.2	0°	-12°	Коричневый	34	Нет
	бретер RSM-22-35 (1 шт)	1.04	0.6	0.9	3.2	0°	-17°	Голубой	35	Нет
	бретер RSM-22-43H (1 шт)	0.79	0.6	0.91	3.4	3°	0°	Синий	43	Да
	бретер RSM-22-44 (1 шт)	1.04	0.6	0.9	3.2	0°	-12°	Коричневый	44	Нет
	бретер RSM-22-45 (1 шт)	1.04	0.6	0.9	3.2	0°	-17°	Голубой	45	Нет
	бретер RSM-22-11 (1 шт)	1.04	0.6	1.05	3.2	0°	18°	Зеленый	11	Нет
	бретер RSM-22-12 (1 шт)	1.39	0.6	0.85	2.95	8°	10°	Черный	12	Нет
	бретер RSM-22-13H (1 шт)	0.96	0.6	0.8	3.4	8°	0°	Красный	13	Да
Набор брекетов Rosa 5-5 3H Upper MBT 022, RSM-22-501	бретер RSM-22-11 (1 шт)	1.04	0.6	1.05	3.2	0°	18°	Зеленый	11	Нет
бретер RSM-22-12 (1 шт)	1.39	0.6	0.85	2.95	8°	10°	Черный	12	Нет	
бретер RSM-22-13H (1 шт)	0.96	0.6	0.8	3.4	8°	0°	Красный	13	Да	

	брекет RSM-22-14 (2 шт)	0.96	0.6	0.9	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Нет
	брекет RSM-22-21 (1 шт)	1.04	0.6	1.05	3.2	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	брекет RSM-22-22 (1 шт)	1.39	0.6	0.85	2.95	8°	10°	Черный	22	Нет
	брекет RSM-22-23H (1 шт)	0.96	0.6	0.8	3.4	8°	0°	Красный	23	Да
	брекет RSM-22-24 (2 шт)	0.96	0.6	0.9	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Нет
Набор брекетов Rosa 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, RSM-22-551	брекет RSM-22-31 (4 шт)	1.5	0.6	0.8	2.85	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет RSM-22-33H (1 шт)	0.79	0.6	0.91	3.4	3°	0°	Синий	33	Да
	брекет RSM-22-34 (1 шт)	1.04	0.6	0.9	3.2	0°	-12°	Коричневый	34	Нет
	брекет RSM-22-35 (1 шт)	1.04	0.6	0.9	3.2	0°	-17°	Голубой	35	Нет
	брекет RSM-22-43H (1 шт)	0.79	0.6	0.91	3.4	3°	0°	Синий	43	Да
	брекет RSM-22-44 (1 шт)	1.04	0.6	0.9	3.2	0°	-12°	Коричневый	44	Нет
	брекет RSM-22-45 (1 шт)	1.04	0.6	0.9	3.2	0°	-17°	Голубой	45	Нет
	брекет RSM-22-11 (1 шт)	1.04	0.6	1.05	3.2	0°	18°	Зеленый	11	Нет
	брекет RSM-22-12 (1 шт)	1.39	0.6	0.85	2.95	8°	10°	Черный	12	Нет
	брекет RSM-22-13H (1 шт)	0.96	0.6	0.8	3.4	8°	0°	Красный	13	Да
	брекет RSM-22-14 (2 шт)	0.96	0.6	0.9	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Нет
	брекет RSM-22-21 (1 шт)	1.04	0.6	1.05	3.2	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	брекет RSM-22-22 (1 шт)	1.39	0.6	0.85	2.95	8°	10°	Черный	22	Нет
	брекет RSM-22-23H (1 шт)	0.96	0.6	0.8	3.4	8°	0°	Красный	23	Да
	брекет RSM-22-24 (2 шт)	0.96	0.6	0.9	3.2	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Нет
	Набор брекетов Rosa 5-5 345H Lower MBT 022, RSM-22-053	брекет RSM-22-31 (4 шт)	1.5	0.6	0.8	2.85	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42
брекет RSM-22-33H (1 шт)		0.79	0.6	0.91	3.4	3°	0°	Синий	33	Да
брекет RSM-22-34H (1 шт)		1.04	0.6	0.9	3.2	0°	-12°	Коричневый	34	Да
брекет RSM-22-35H (1 шт)		1.04	0.6	0.9	3.2	0°	-17°	Голубой	35	Да
брекет RSM-22-43H (1 шт)		0.79	0.6	0.91	3.4	3°	0°	Синий	43	Да
брекет RSM-22-44H (1 шт)		1.04	0.6	0.9	3.2	0°	-12°	Коричневый	44	Да
брекет RSM-22-45H (1 шт)		1.04	0.6	0.9	3.2	0°	-17°	Голубой	45	Да
Набор брекетов Rosa 5-5 345H Upper MBT 022, RSM-22-503	брекет RSM-22-11 (1 шт)	1.04	0.6	1.05	3.2	0°	18°	Зеленый	11	Нет
	брекет RSM-22-12 (1 шт)	1.50	0.6	0.43	2.7	9°	8°	Черный	12	Нет
	брекет RSM-22-13H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	-2°	Красный	13	Да
	брекет RSM-22-14H (2 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да
	брекет RSM-22-21 (1 шт)	1.19	0.6	0.43	2.90	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет RSM-22-22 (1 шт)	1.50	0.6	0.43	2.7	9°	8°	Черный	22	Нет
	брекет RSM-22-23H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	-2°	Красный	23	Да

Набор брекетов Rosa 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, RSM-22-553	брекет RSM-22-24H (2 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да
	брекет RSM-22-31 (4 шт)	1.5	0.6	0.8	2.85	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет RSM-22-33H (1 шт)	0.79	0.6	0.91	3.4	3°	0°	Синий	33	Да
	брекет RSM-22-34H (1 шт)	1.04	0.6	0.9	3.2	0°	-12°	Коричневый	34	Да
	брекет RSM-22-35H (1 шт)	1.04	0.6	0.9	3.2	0°	-17°	Голубой	35	Да
	брекет RSM-22-43H (1 шт)	0.79	0.6	0.91	3.4	3°	0°	Синий	43	Да
	брекет RSM-22-44H (1 шт)	1.04	0.6	0.9	3.2	0°	-12°	Коричневый	44	Да
	брекет RSM-22-45H (1 шт)	1.04	0.6	0.9	3.2	0°	-17°	Голубой	45	Да
	брекет RSM-22-11 (1 шт)	1.04	0.6	1.05	3.2	0°	18°	Зеленый	11	Нет
	брекет RSM-22-12 (1 шт)	1.50	0.6	0.43	2.7	9°	8°	Черный	12	Нет
	брекет RSM-22-13H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	-2°	Красный	13	Да
	брекет RSM-22-14H (2 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да
	брекет RSM-22-21 (1 шт)	1.19	0.6	0.43	2.90	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет RSM-22-22 (1 шт)	1.50	0.6	0.43	2.7	9°	8°	Черный	22	Нет
Набор брекетов Zeus-A 3-3 3H Lower Roth 022, ZAR-22-031	брекет ZAR-22-31 (4 шт)	1.51	0.6	0.48	2.50	0°	0°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет ZAR-22-33H (1 шт)	1.0	0.6	0.5	2.95	7°	-11°	Синий	33	Да
	брекет ZAR-22-43H (1 шт)	1.0	0.6	0.5	2.95	7°	-11°	Синий	43	Да
	брекет ZAR-22-24H (2 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да
Набор брекетов Zeus-A 3-3 3H Upper Roth 022, ZAR-22-301	брекет ZAR-22-11 (1 шт)	1.19	0.7	0.6	2.90	5°	11°	Зеленый	11	Нет
	брекет ZAR-22-12 (1 шт)	1.50	0.6	0.43	2.7	9°	8°	Черный	12	Нет
	брекет ZAR-22-13H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	-2°	Красный	13	Да
	брекет ZAR-22-21 (1 шт)	1.19	0.6	0.43	2.90	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет ZAR-22-22 (1 шт)	1.50	0.6	0.43	2.7	9°	8°	Черный	22	Нет
	брекет ZAR-22-23H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	-2°	Красный	23	Да
	брекет ZAR-22-24H (2 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да
Набор брекетов Zeus-A 3-3 3H Upper/Lower Roth 022, ZAR-22-331	брекет ZAR-22-31 (4 шт)	1.51	0.6	0.48	2.50	0°	0°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет ZAR-22-33H (1 шт)	1.0	0.6	0.5	2.95	7°	-11°	Синий	33	Да
	брекет ZAR-22-43H (1 шт)	1.0	0.6	0.5	2.95	7°	-11°	Синий	43	Да
	брекет ZAR-22-11 (1 шт)	1.19	0.7	0.6	2.90	5°	11°	Зеленый	11	Нет
	брекет ZAR-22-12 (1 шт)	1.50	0.6	0.43	2.7	9°	8°	Черный	12	Нет
	брекет ZAR-22-13H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	-2°	Красный	13	Да
	брекет ZAR-22-21 (1 шт)	1.19	0.6	0.43	2.90	5°	11°	Зеленый	21	Нет
	брекет ZAR-22-22 (1 шт)	1.50	0.6	0.43	2.7	9°	8°	Черный	22	Нет
	брекет ZAR-22-23H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	-2°	Красный	23	Да

Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Lower Roth 022, ZAR-22-053	брекет ZAR-22-31 (4 шт)	1.51	0.6	0.48	2.50	0°	0°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет	
	брекет ZAR-22-33H (1 шт)	1.0	0.6	0.5	2.95	7°	-11°	Синий	33	Да	
	брекет ZAR-22-34H (1 шт)	1.11	0.6	0.47	2.95	0°	-17°	Коричневый	34	Да	
	брекет ZAR-22-35H (1 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-22°	Голубой	35	Да	
	брекет ZAR-22-43H (1 шт)	1.0	0.6	0.5	2.95	7°	-11°	Синий	43	Да	
	брекет ZAR-22-44H (1 шт)	1.11	0.6	0.47	2.95	0°	-17°	Коричневый	44	Да	
	брекет ZAR-22-45H (1 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-22°	Голубой	45	Да	
Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Upper Roth 022, ZAR-22-503	брекет ZAR-22-11 (1 шт)	1.19	0.7	0.6	2.90	5°	11°	Зеленый	11	Нет	
	брекет ZAR-22-12 (1 шт)	1.50	0.6	0.43	2.7	9°	8°	Черный	12	Нет	
	брекет ZAR-22-13H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	-2°	Красный	13	Да	
	брекет ZAR-22-14H (2 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да	
	брекет ZAR-22-21 (1 шт)	1.19	0.6	0.43	2.90	5°	11°	Зеленый	21	Нет	
	брекет ZAR-22-22 (1 шт)	1.50	0.6	0.43	2.7	9°	8°	Черный	22	Нет	
	брекет ZAR-22-23H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	-2°	Красный	23	Да	
	брекет ZAR-22-24H (2 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да	
Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Upper/Lower Roth 022, ZAR-22-553	брекет ZAR-22-31 (4 шт)	1.51	0.6	0.48	2.50	0°	0°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет	
	брекет ZAR-22-33H (1 шт)	1.0	0.6	0.5	2.95	7°	-11°	Синий	33	Да	
	брекет ZAR-22-34H (1 шт)	1.11	0.6	0.47	2.95	0°	-17°	Коричневый	34	Да	
	брекет ZAR-22-35H (1 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-22°	Голубой	35	Да	
	брекет ZAR-22-43H (1 шт)	1.0	0.6	0.5	2.95	7°	-11°	Синий	43	Да	
	брекет ZAR-22-44H (1 шт)	1.11	0.6	0.47	2.95	0°	-17°	Коричневый	44	Да	
	брекет ZAR-22-45H (1 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-22°	Голубой	45	Да	
	брекет ZAR-22-11 (1 шт)	1.19	0.7	0.6	2.90	5°	11°	Зеленый	11	Нет	
	брекет ZAR-22-12 (1 шт)	1.50	0.6	0.43	2.7	9°	8°	Черный	12	Нет	
	брекет ZAR-22-13H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	-2°	Красный	13	Да	
	брекет ZAR-22-14H (2 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да	
	брекет ZAR-22-21 (1 шт)	1.19	0.6	0.43	2.90	5°	11°	Зеленый	21	Нет	
	брекет ZAR-22-22 (1 шт)	1.50	0.6	0.43	2.7	9°	8°	Черный	22	Нет	
	брекет ZAR-22-23H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	-2°	Красный	23	Да	
	брекет ZAR-22-24H (2 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да	
	Набор брекетов Zeus-A 3-3 3H Lower MBT 022, ZAM-22-031	брекет ZAM-22-31 (4 шт)	1.52	0.6	0.48	2.50	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
		брекет ZAM-22-33H (1 шт)	1.14	0.6	0.5	2.95	3°	0°	Синий	33	Да
брекет ZAM-22-43H (1 шт)		1.14	0.6	0.5	2.95	3°	0°	Синий	43	Да	
Набор брекетов Zeus-A 3-3 3H Upper MBT 022, ZAM-22-301	брекет ZAM-22-11 (1 шт)	1	0.7	0.43	2.90	1°	11°	Зеленый	11	Нет	

	бретер ZAM-22-12 (1 шт)	1.55	0.6	0.43	2.7	8°	10°	Черный	12	Нет
	бретер ZAM-22-13H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	0°	Красный	13	Да
	бретер ZAM-22-21 (1 шт)	1.25	0.6	0.43	2.90	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	бретер ZAM-22-22 (1 шт)	1.55	0.6	0.43	2.7	8°	10°	Черный	22	Нет
	бретер ZAM-22-23H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	0°	Красный	23	Да
Набор бретеров Zeus-A 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, ZAM-22-331	бретер ZAM-22-31 (4 шт)	1.52	0.6	0.48	2.50	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	бретер ZAM-22-33H (1 шт)	1.14	0.6	0.5	2.95	3°	0°	Синий	33	Да
	бретер ZAM-22-43H (1 шт)	1.14	0.6	0.5	2.95	3°	0°	Синий	43	Да
	бретер ZAM-22-11 (1 шт)	1	0.7	0.43	2.90	1°	11°	Зеленый	11	Нет
	бретер ZAM-22-12 (1 шт)	1.55	0.6	0.43	2.7	8°	10°	Черный	12	Нет
	бретер ZAM-22-13H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	0°	Красный	13	Да
	бретер ZAM-22-21 (1 шт)	1.25	0.6	0.43	2.90	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	бретер ZAM-22-22 (1 шт)	1.55	0.6	0.43	2.7	8°	10°	Черный	22	Нет
	бретер ZAM-22-23H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	0°	Красный	23	Да
Набор бретеров Zeus-A 5-5 3H Lower MBT 022, ZAM-22-051	бретер ZAM-22-31 (4 шт)	1.52	0.6	0.48	2.50	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	бретер ZAM-22-33H (1 шт)	1.14	0.6	0.5	2.95	3°	0°	Синий	33	Да
	бретер ZAM-22-34 (1 шт)	1.12	0.6	0.47	2.95	0°	-12°	Коричневый	34	Нет
	бретер ZAM-22-35 (1 шт)	1.11	0.6	0.47	2.95	0°	-17°	Голубой	35	Нет
	бретер ZAM-22-43H (1 шт)	1.14	0.6	0.5	2.95	3°	0°	Синий	43	Да
	бретер ZAM-22-44 (1 шт)	1.12	0.6	0.47	2.95	0°	-12°	Коричневый	44	Нет
	бретер ZAM-22-45 (1 шт)	1.11	0.6	0.47	2.95	0°	-17°	Голубой	45	Нет
Набор бретеров Zeus-A 5-5 3H Upper MBT 022, ZAM-22-501	бретер ZAM-22-11 (1 шт)	1	0.7	0.43	2.90	1°	11°	Зеленый	11	Нет
	бретер ZAM-22-12 (1 шт)	1.55	0.6	0.43	2.7	8°	10°	Черный	12	Нет
	бретер ZAM-22-13H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	0°	Красный	13	Да
	бретер ZAM-22-14 (2 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Нет
	бретер ZAM-22-21 (1 шт)	1.25	0.6	0.43	2.90	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	бретер ZAM-22-22 (1 шт)	1.55	0.6	0.43	2.7	8°	10°	Черный	22	Нет
	бретер ZAM-22-23H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	0°	Красный	23	Да
	бретер ZAM-22-24 (2 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Нет
Набор бретеров Zeus-A 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, ZAM-22-551	бретер ZAM-22-31 (4 шт)	1.52	0.6	0.48	2.50	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	бретер ZAM-22-33H (1 шт)	1.14	0.6	0.5	2.95	3°	0°	Синий	33	Да
	бретер ZAM-22-34 (1 шт)	1.12	0.6	0.47	2.95	0°	-12°	Коричневый	34	Нет
	бретер ZAM-22-35 (1 шт)	1.11	0.6	0.47	2.95	0°	-17°	Голубой	35	Нет
	бретер ZAM-22-43H (1 шт)	1.14	0.6	0.5	2.95	3°	0°	Синий	43	Да

	брекет ZAM-22-44 (1 шт)	1.12	0.6	0.47	2.95	0°	-12°	Коричневый	44	Нет
	брекет ZAM-22-45 (1 шт)	1.11	0.6	0.47	2.95	0°	-17°	Голубой	45	Нет
	брекет ZAM-22-11 (1 шт)	1	0.7	0.43	2.90	1°	11°	Зеленый	11	Нет
	брекет ZAM-22-12 (1 шт)	1.55	0.6	0.43	2.7	8°	10°	Черный	12	Нет
	брекет ZAM-22-13H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	0°	Красный	13	Да
	брекет ZAM-22-14 (2 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Нет
	брекет ZAM-22-21 (1 шт)	1.25	0.6	0.43	2.90	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	брекет ZAM-22-22 (1 шт)	1.55	0.6	0.43	2.7	8°	10°	Черный	22	Нет
	брекет ZAM-22-23H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	0°	Красный	23	Да
	брекет ZAM-22-24 (2 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Нет
Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Lower MBT 022, ZAM-22-053	брекет ZAM-22-31 (4 шт)	1.52	0.6	0.48	2.50	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
	брекет ZAM-22-33H (1 шт)	1.14	0.6	0.5	2.95	3°	0°	Синий	33	Да
	брекет ZAM-22-34H (1 шт)	1.12	0.6	0.47	2.95	0°	-12°	Коричневый	34	Да
	брекет ZAM-22-35H (1 шт)	1.11	0.6	0.47	2.95	0°	-17°	Голубой	35	Да
	брекет ZAM-22-43H (1 шт)	1.14	0.6	0.5	2.95	3°	0°	Синий	43	Да
	брекет ZAM-22-44H (1 шт)	1.12	0.6	0.47	2.95	0°	-12°	Коричневый	44	Да
	брекет ZAM-22-45H (1 шт)	1.11	0.6	0.47	2.95	0°	-17°	Голубой	45	Да
	брекет ZAM-22-11 (1 шт)	1	0.7	0.43	2.90	1°	11°	Зеленый	11	Нет
Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Upper MBT 022, ZAM-22-503	брекет ZAM-22-12 (1 шт)	1.55	0.6	0.43	2.7	8°	10°	Черный	12	Нет
	брекет ZAM-22-13H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	0°	Красный	13	Да
	брекет ZAM-22-14H (2 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да
	брекет ZAM-22-21 (1 шт)	1.25	0.6	0.43	2.90	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	брекет ZAM-22-22 (1 шт)	1.55	0.6	0.43	2.7	8°	10°	Черный	22	Нет
	брекет ZAM-22-23H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	0°	Красный	23	Да
	брекет ZAM-22-24H (2 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да
	брекет ZAM-22-31 (4 шт)	1.52	0.6	0.48	2.50	0°	-6°	Желтый	31, 32, 41, 42	Нет
Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, ZAM-22-553	брекет ZAM-22-33H (1 шт)	1.14	0.6	0.5	2.95	3°	0°	Синий	33	Да
	брекет ZAM-22-34H (1 шт)	1.12	0.6	0.47	2.95	0°	-12°	Коричневый	34	Да
	брекет ZAM-22-35H (1 шт)	1.11	0.6	0.47	2.95	0°	-17°	Голубой	35	Да
	брекет ZAM-22-43H (1 шт)	1.14	0.6	0.5	2.95	3°	0°	Синий	43	Да
	брекет ZAM-22-44H (1 шт)	1.12	0.6	0.47	2.95	0°	-12°	Коричневый	44	Да
	брекет ZAM-22-45H (1 шт)	1.11	0.6	0.47	2.95	0°	-17°	Голубой	45	Да
	брекет ZAM-22-11 (1 шт)	1	0.7	0.43	2.90	1°	11°	Зеленый	11	Нет
	брекет ZAM-22-12 (1 шт)	1.55	0.6	0.43	2.7	8°	10°	Черный	12	Нет

	бретек ZAM-22-13H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	0°	Красный	13	Да
	бретек ZAM-22-14H (2 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-7°	Фиолетовый	14, 15	Да
	бретек ZAM-22-21 (1 шт)	1.25	0.6	0.43	2.90	4°	17°	Зеленый	21	Нет
	бретек ZAM-22-22 (1 шт)	1.55	0.6	0.43	2.7	8°	10°	Черный	22	Нет
	бретек ZAM-22-23H (1 шт)	1.0	0.6	0.45	2.95	8°	0°	Красный	23	Да
	бретек ZAM-22-24H (2 шт)	1.15	0.6	0.47	2.95	0°	-7°	Фиолетовый	24, 25	Да
Набор брекетов Zeus-P 3-3 3H Lower Roth 018, ZPR-18-031	бретек ZPR-18-31 (4 шт)	0.83	0.5	0.48	2.60	0°	-2°	Черный	31, 32	Нет
								Зеленый	41, 42	
	бретек ZPR-18-33H (1 шт)	0.71	0.5	0.50	2.80	7°	-11°	Черный	33	Да
Набор брекетов Zeus-P 3-3 3H Upper Roth 018, ZPR-18-301	бретек ZPR-18-43H (1 шт)	0.71	0.5	0.50	2.80	7°	-11°	Зеленый	43	Да
	бретек ZPR-18-11 (1 шт)	0.84	0.55	1.2	3.00	7°	10°	Желтый	11	Нет
	бретек ZPR-18-12 (1 шт)	0.83	0.5	0.59	2.80	9°	8°	Желтый	12	Нет
	бретек ZPR-18-13H (1 шт)	0.60	0.5	0.54	3.00	8°	0°	Желтый	13	Да
	бретек ZPR-18-21 (1 шт)	0.84	0.5	0.61	3.00	5°	12°	Красный	21	Нет
	бретек ZPR-18-22 (1 шт)	0.83	0.5	0.59	2.80	9°	8°	Красный	22	Нет
Набор брекетов Zeus-P 3-3 3H Upper/Lower Roth 018, ZPR-18-331	бретек ZPR-18-23H (1 шт)	0.60	0.5	0.54	3.00	8°	0°	Красный	23	Да
	бретек ZPR-18-31 (4 шт)	0.83	0.5	0.48	2.60	0°	-2°	Черный	31, 32	Нет
								Зеленый	41, 42	
	бретек ZPR-18-33H (1 шт)	0.71	0.5	0.50	2.80	7°	-11°	Черный	33	Да
	бретек ZPR-18-43H (1 шт)	0.71	0.5	0.50	2.80	7°	-11°	Зеленый	43	Да
	бретек ZPR-18-11 (1 шт)	0.84	0.55	1.2	3.00	7°	10°	Желтый	11	Нет
	бретек ZPR-18-12 (1 шт)	0.83	0.5	0.59	2.80	9°	8°	Желтый	12	Нет
	бретек ZPR-18-13H (1 шт)	0.60	0.5	0.54	3.00	8°	0°	Желтый	13	Да
	бретек ZPR-18-21 (1 шт)	0.84	0.5	0.61	3.00	5°	12°	Красный	21	Нет
	бретек ZPR-18-22 (1 шт)	0.83	0.5	0.59	2.80	9°	8°	Красный	22	Нет
Набор брекетов Zeus-P 5-5 345H Lower Roth 018, ZPR-18-053	бретек ZPR-18-23H (1 шт)	0.60	0.5	0.54	3.00	8°	0°	Красный	23	Да
	бретек ZPR-18-31 (4 шт)	0.83	0.5	0.48	2.60	0°	-2°	Черный	31, 32	Нет
								Зеленый	41, 42	
	бретек ZPR-18-33H (1 шт)	0.71	0.5	0.50	2.80	7°	-11°	Черный	33	Да
	бретек ZPR-18-34H (1 шт)	0.74	0.5	0.47	2.80	0°	-17°	Черный	34	Да
	бретек ZPR-18-35H (1 шт)	0.74	0.5	0.47	2.80	0°	-22°	Черный	35	Да
	бретек ZPR-18-43H (1 шт)	0.71	0.5	0.50	2.80	7°	-11°	Зеленый	43	Да
	бретек ZPR-18-44H (1 шт)	0.74	0.5	0.47	2.80	0°	-17°	Зеленый	44	Да
Набор брекетов Zeus-P 5-5 345H Upper Roth 018, ZPR-18-503	бретек ZPR-18-45H (1 шт)	0.74	0.5	0.47	2.80	0°	-22°	Зеленый	45	Да
	бретек ZPR-18-11 (1 шт)	0.84	0.55	1.2	3.00	7°	10°	Желтый	11	Нет
	бретек ZPR-18-12 (1 шт)	0.83	0.5	0.59	2.80	9°	8°	Желтый	12	Нет
	бретек ZPR-18-13H (1 шт)	0.60	0.5	0.54	3.00	8°	0°	Желтый	13	Да

	брекет ZPR-18-14H (2 шт)	0.67	0.5	0.47	2.80	0°	-7°	Желтый	14, 15	Да	
	брекет ZPR-18-21 (1 шт)	0.84	0.5	0.61	3.00	5°	12°	Красный	21	Нет	
	брекет ZPR-18-22 (1 шт)	0.83	0.5	0.59	2.80	9°	8°	Красный	22	Нет	
	брекет ZPR-18-23H (1 шт)	0.60	0.5	0.54	3.00	8°	0°	Красный	23	Да	
	брекет ZPR-18-24H (2 шт)	0.67	0.5	0.47	2.80	0°	-7°	Красный	24, 25	Да	
Набор брекетов Zeus-P 5-5 345H Upper/Lower Roth 018, ZPR-18-553	брекет ZPR-18-31 (4 шт)	0.83	0.5	0.48	2.60	0°	-2°	Черный	31, 32	Нет	
								Зеленый	41, 42		
	брекет ZPR-18-33H (1 шт)	0.71	0.5	0.50	2.80	7°	-11°	Черный	33	Да	
	брекет ZPR-18-34H (1 шт)	0.74	0.5	0.47	2.80	0°	-17°	Черный	34	Да	
	брекет ZPR-18-35H (1 шт)	0.74	0.5	0.47	2.80	0°	-22°	Черный	35	Да	
	брекет ZPR-18-43H (1 шт)	0.71	0.5	0.50	2.80	7°	-11°	Зеленый	43	Да	
	брекет ZPR-18-44H (1 шт)	0.74	0.5	0.47	2.80	0°	-17°	Зеленый	44	Да	
	брекет ZPR-18-45H (1 шт)	0.74	0.5	0.47	2.80	0°	-22°	Зеленый	45	Да	
	брекет ZPR-18-11 (1 шт)	0.84	0.55	1.2	3.00	7°	10°	Желтый	11	Нет	
	брекет ZPR-18-12 (1 шт)	0.83	0.5	0.59	2.80	9°	8°	Желтый	12	Нет	
	брекет ZPR-18-13H (1 шт)	0.60	0.5	0.54	3.00	8°	0°	Желтый	13	Да	
	брекет ZPR-18-14H (2 шт)	0.67	0.5	0.47	2.80	0°	-7°	Желтый	14, 15	Да	
	брекет ZPR-18-21 (1 шт)	0.84	0.5	0.61	3.00	5°	12°	Красный	21	Нет	
	брекет ZPR-18-22 (1 шт)	0.83	0.5	0.59	2.80	9°	8°	Красный	22	Нет	
		брекет ZPR-18-23H (1 шт)	0.60	0.5	0.54	3.00	8°	0°	Красный	23	Да
		брекет ZPR-18-24H (2 шт)	0.67	0.5	0.47	2.80	0°	-7°	Красный	24, 25	Да
Набор брекетов Zeus-P 3-3 3H Lower Roth 022, ZPR-22-031	брекет ZPR-22-31 (4 шт)	0.83	0.5	0.48	2,60	0	-1	Черный	31, 32	Нет	
								Зеленый	41, 42		
	брекет ZPR-22-33H (1 шт)	0.71	0.5	0.5	2,80	5	-11	Черный	33	Да	
	брекет ZPR-22-43H (1 шт)	0.71	0.5	0.5	2,80	5	-11	Зеленый	43	Да	
Набор брекетов Zeus-P 3-3 3H Upper Roth 022, ZPR-22-301	брекет ZPR-22-11 (1 шт)	0.84	0.6	0.61	3.00	5°	12°	Желтый	11	Нет	
	брекет ZPR-22-12 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.80	9°	8°	Желтый	12	Нет	
	брекет ZPR-22-13H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3.00	8°	0°	Желтый	13	Да	
	брекет ZPR-22-21 (1 шт)	1	0.6	1	3.00	5°	14°	Красный	21	Нет	
	брекет ZPR-22-22 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.80	9°	8°	Красный	22	Нет	
	брекет ZPR-22-23H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3.00	8°	0°	Красный	23	Да	
		брекет ZPR-22-31 (4 шт)	0.83	0.6	0.48	2.60	0°	-2°	Черный	31, 32	Нет
								Зеленый	41, 42		
	брекет ZPR-22-33H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	7°	-11°	Черный	33	Да	
	брекет ZPR-22-43H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	7°	-11°	Зеленый	43	Да	
Набор брекетов Zeus-P 3-3 3H Upper/Lower Roth 022, ZPR-22-331	брекет ZPR-22-11 (1 шт)	0.84	0.6	0.61	3.00	5°	12°	Желтый	11	Нет	
	брекет ZPR-22-12 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.80	9°	8°	Желтый	12	Нет	

	брекет ZPR-22-13H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3.00	8°	0°	Желтый	13	Да	
	брекет ZPR-22-21 (1 шт)	1	0.6	1	3.00	5°	14°	Красный	21	Нет	
	брекет ZPR-22-22 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.80	9°	8°	Красный	22	Нет	
	брекет ZPR-22-23H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3.00	8°	0°	Красный	23	Да	
Набор брекетов Zeus-P 5-5 3H Lower Roth 022, ZPR-22-051	брекет ZPR-22-31 (4 шт)	0.83	0.6	0.48	2.60	0°	-2°	Черный	31, 32	Нет	
								Зеленый	41, 42		
	брекет ZPR-22-33H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	7°	-11°	Черный	33	Да	
	брекет ZPR-22-34 (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-17°	Черный	34	Нет	
	брекет ZPR-22-35 (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-22°	Черный	35	Нет	
	брекет ZPR-22-43H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	7°	-11°	Зеленый	43	Да	
	брекет ZPR-22-44 (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-17°	Зеленый	44	Нет	
	брекет ZPR-22-45 (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-22°	Зеленый	45	Нет	
	Набор брекетов Zeus-P 5-5 3H Upper Roth 022, ZPR-22-501	брекет ZPR-22-11 (1 шт)	0.83	0.6	0.48	2.60	0°	-2°	Желтый	11	Нет
		брекет ZPR-22-12 (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	7°	-11°	Желтый	12	Нет
брекет ZPR-22-13H (1 шт)		0.71	0.6	0.50	2.80	7°	-11°	Желтый	13	Да	
брекет ZPR-22-14 (2 шт)		0.84	0.6	0.61	3.00	5°	12°	Желтый	14, 15	Нет	
брекет ZPR-22-21 (1 шт)		1	0.6	1	3.00	5°	14°	Красный	21	Нет	
брекет ZPR-22-22 (1 шт)		0.60	0.6	0.54	3.00	8°	0°	Красный	22	Нет	
брекет ZPR-22-23H (1 шт)		0.84	0.6	0.61	3.00	5°	12°	Красный	23	Да	
брекет ZPR-22-24 (2 шт)		0.83	0.6	0.59	2.80	9°	8°	Красный	24, 25	Нет	
Набор брекетов Zeus-P 5-5 3H Upper/Lower Roth 022, ZPR-22-551		брекет ZPR-22-31 (4 шт)	0.83	0.6	0.48	2.60	0°	-2°	Черный	31, 32	Нет
									Зеленый	41, 42	
	брекет ZPR-22-33H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	7°	-11°	Черный	33	Да	
	брекет ZPR-22-34 (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-17°	Черный	34	Нет	
	брекет ZPR-22-35 (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-22°	Черный	35	Нет	
	брекет ZPR-22-43H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	7°	-11°	Зеленый	43	Да	
	брекет ZPR-22-44 (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-17°	Зеленый	44	Нет	
	брекет ZPR-22-45 (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-22°	Зеленый	45	Нет	
	Набор брекетов Zeus-P 5-5 345H Lower Roth 022,	брекет ZPR-22-11 (1 шт)	0.83	0.6	0.48	2.60	0°	-2°	Желтый	11	Нет
		брекет ZPR-22-12 (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	7°	-11°	Желтый	12	Нет
брекет ZPR-22-13H (1 шт)		0.71	0.6	0.50	2.80	7°	-11°	Желтый	13	Да	
брекет ZPR-22-14 (2 шт)		0.84	0.6	0.61	3.00	5°	12°	Желтый	14, 15	Нет	
брекет ZPR-22-21 (1 шт)		1	0.6	1	3.00	5°	14°	Красный	21	Нет	
брекет ZPR-22-22 (1 шт)		0.60	0.6	0.54	3.00	8°	0°	Красный	22	Нет	
брекет ZPR-22-23H (1 шт)		0.84	0.6	0.61	3.00	5°	12°	Красный	23	Да	
брекет ZPR-22-24 (2 шт)		0.83	0.6	0.59	2.80	9°	8°	Красный	24, 25	Нет	
брекет ZPR-22-31 (4 шт)		0.83	0.6	0.48	2.60	0°	-2°	Черный	31, 32	Нет	

ZPR-22-053	брекет ZPR-22-33H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	7°	-11°	Зеленый	41, 42	
	брекет ZPR-22-34H (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-17°	Черный	33	Да
	брекет ZPR-22-35H (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-22°	Черный	34	Да
	брекет ZPR-22-43H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	7°	-11°	Черный	35	Да
	брекет ZPR-22-44H (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-17°	Зеленый	43	Да
	брекет ZPR-22-44H (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-17°	Зеленый	44	Да
	брекет ZPR-22-45H (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-22°	Зеленый	45	Да
Набор брекетов Zeus-P 5-5 345H Upper Roth 022, ZPR-22-503	брекет ZPR-22-11 (1 шт)	0.84	0.6	0.61	3.00	5°	12°	Желтый	11	Нет
	брекет ZPR-22-12 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.80	9°	8°	Желтый	12	Нет
	брекет ZPR-22-13H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3.00	8°	0°	Желтый	13	Да
	брекет ZPR-22-14H (2 шт)	0.67	0.6	0.47	2.80	0°	-7°	Желтый	14, 15	Да
	брекет ZPR-22-21 (1 шт)	1	0.6	1	3.00	5°	14°	Красный	21	Нет
	брекет ZPR-22-22 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.80	9°	8°	Красный	22	Нет
	брекет ZPR-22-23H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3.00	8°	0°	Красный	23	Да
Набор брекетов Zeus-P 5-5 345H Upper/Lower Roth 022, ZPR-22-553	брекет ZPR-22-24H (2 шт)	0.67	0.6	0.47	2.80	0°	-7°	Красный	24, 25	Да
	брекет ZPR-22-31 (4 шт)	0.83	0.6	0.48	2.60	0°	-2°	Черный	31, 32	Нет
	брекет ZPR-22-31 (4 шт)	0.83	0.6	0.48	2.60	0°	-2°	Зеленый	41, 42	Нет
	брекет ZPR-22-33H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	7°	-11°	Черный	33	Да
	брекет ZPR-22-34H (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-17°	Черный	34	Да
	брекет ZPR-22-35H (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-22°	Черный	35	Да
	брекет ZPR-22-43H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	7°	-11°	Зеленый	43	Да
Набор брекетов Zeus-P 3-3 3H Lower MBT 022, ZPM-22-031	брекет ZPR-22-44H (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-17°	Зеленый	44	Да
	брекет ZPR-22-45H (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-22°	Зеленый	45	Да
	брекет ZPR-22-11 (1 шт)	0.84	0.6	0.61	3.00	5°	12°	Желтый	11	Нет
	брекет ZPR-22-12 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.80	9°	8°	Желтый	12	Нет
	брекет ZPR-22-13H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3.00	8°	0°	Желтый	13	Да
	брекет ZPR-22-14H (2 шт)	0.67	0.6	0.47	2.80	0°	-7°	Желтый	14, 15	Да
	брекет ZPR-22-21 (1 шт)	1	0.6	1	3.00	5°	14°	Красный	21	Нет
Набор брекетов Zeus-P 3-3 3H Lower MBT 022, ZPM-22-031	брекет ZPR-22-22 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.80	9°	8°	Красный	22	Нет
	брекет ZPR-22-23H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3.00	8°	0°	Красный	23	Да
	брекет ZPR-22-24H (2 шт)	0.67	0.6	0.47	2.80	0°	-7°	Красный	24, 25	Да
	брекет ZPM-22-31 (4 шт)	0.83	0.6	0.48	2.6	0°	-6°	Черный	31, 32	Нет
	брекет ZPM-22-31 (4 шт)	0.83	0.6	0.48	2.6	0°	-6°	Зеленый	41, 42	Нет
	брекет ZPM-22-33H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.8	3°	0°	Черный	33	Да
	брекет ZPM-22-43H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	3°	0°	Зеленый	43	Да
Набор брекетов Zeus-P 3-3 3H Upper MBT 022, ZPM-22-301	брекет ZPM-22-11 (шт)	0.84	0.6	0.61	2.8	2°	17°	Желтый	11	Нет
	брекет ZPM-22-12 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	12	Нет

Набор брекетов Zeus-P 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, ZPM-22-331	брекет ZPM-22-13H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3	8°	0°	Желтый	13	Да	
	брекет ZPM-22-21 (1 шт)	0.84	0.6	0.61	3	4°	17°	Красный	21	Нет	
	брекет ZPM-22-22 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.80	8°	10°	Красный	22	Нет	
	брекет ZPM-22-23H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3	8°	0°	Красный	23	Да	
	брекет ZPM-22-31 (4 шт)	0.83	0.6	0.48	2.6	0°	-6°	Черный	31, 32	Нет	
								Зеленый	41, 42		
	брекет ZPM-22-33H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.8	3°	0°	Черный	33	Да	
	брекет ZPM-22-43H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	3°	0°	Зеленый	43	Да	
	брекет ZPM-22-11 (шт)	0.84	0.6	0.61	2.8	2°	17°	Желтый	11	Нет	
	брекет ZPM-22-12 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	12	Нет	
	брекет ZPM-22-13H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3	8°	0°	Желтый	13	Да	
	брекет ZPM-22-21 (1 шт)	0.84	0.6	0.61	3	4°	17°	Красный	21	Нет	
	брекет ZPM-22-22 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.80	8°	10°	Красный	22	Нет	
Набор брекетов Zeus-P 5-5 3H Lower MBT 022, ZPM-22-051	брекет ZPM-22-23H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3	8°	0°	Красный	23	Да	
	брекет ZPM-22-31 (4 шт)	0.83	0.6	0.48	2.6	0°	-6°	Черный	31, 32	Нет	
								Зеленый	41, 42		
	брекет ZPM-22-33H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.8	3°	0°	Черный	33	Да	
	брекет ZPM-22-34 (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-12°	Черный	34	Нет	
	брекет ZPM-22-35 (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-17°	Черный	35	Нет	
	брекет ZPM-22-43H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	3°	0°	Зеленый	43	Да	
	брекет ZPM-22-44 (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-12°	Зеленый	44	Нет	
	брекет ZPM-22-45 (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-17°	Зеленый	45	Нет	
	Набор брекетов Zeus-P 5-5 3H Upper MBT 022, ZPM-22-501	брекет ZPM-22-11 (1 шт)	0.84	0.6	0.61	2.8	2°	17°	Желтый	11	Нет
		брекет ZPM-22-12 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	12	Нет
		брекет ZPM-22-13H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3	8°	0°	Желтый	13	Да
		брекет ZPM-22-14 (2 шт)	0.67	0.6	0.47	2.80	0°	-7°	Желтый	14, 15	Нет
брекет ZPM-22-21 (1 шт)		0.84	0.6	0.61	3	4°	17°	Красный	21	Нет	
брекет ZPM-22-22 (1 шт)		0.83	0.6	0.59	2.80	8°	10°	Красный	22	Нет	
брекет ZPM-22-23H (1 шт)		0.60	0.6	0.54	3	8°	0°	Красный	23	Да	
брекет ZPM-22-24 (2 шт)		0.67	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Нет	
Набор брекетов Zeus-P 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, ZPM-22-551		брекет ZPM-22-31 (4 шт)	0.83	0.6	0.48	2.6	0°	-6°	Черный	31, 32	Нет
									Зеленый	41, 42	
	брекет ZPM-22-33H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.8	3°	0°	Черный	33	Да	
	брекет ZPM-22-34 (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-12°	Черный	34	Нет	
	брекет ZPM-22-35 (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-17°	Черный	35	Нет	
	брекет ZPM-22-43H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	3°	0°	Зеленый	43	Да	
брекет ZPM-22-44 (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-12°	Зеленый	44	Нет		

	бркет ZPM-22-45 (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-17°	Зеленый	45	Нет
	бркет ZPM-22-11 (1 шт)	0.84	0.6	0.61	2.8	2°	17°	Желтый	11	Нет
	бркет ZPM-22-12 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	12	Нет
	бркет ZPM-22-13H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3	8°	0°	Желтый	13	Да
	бркет ZPM-22-14 (2 шт)	0.67	0.6	0.47	2.80	0°	-7°	Желтый	14, 15	Нет
	бркет ZPM-22-21 (1 шт)	0.84	0.6	0.61	3	4°	17°	Красный	21	Нет
	бркет ZPM-22-22 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.80	8°	10°	Красный	22	Нет
	бркет ZPM-22-23H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3	8°	0°	Красный	23	Да
	бркет ZPM-22-24 (2 шт)	0.67	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Нет
Набор брекетов Zeus-P 5-5 345H Lower MBT 022, ZPM-22-053	бркет ZPM-22-31 (4 шт)	0.83	0.6	0.48	2.6	0°	-6°	Черный	31, 32	Нет
								Зеленый	41, 42	
	бркет ZPM-22-33H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.8	3°	0°	Черный	33	Да
	бркет ZPM-22-34H (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-12°	Черный	34	Да
	бркет ZPM-22-35H (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-17°	Черный	35	Да
	бркет ZPM-22-43H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	3°	0°	Зеленый	43	Да
	бркет ZPM-22-44H (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-12°	Зеленый	44	Да
	бркет ZPM-22-45H (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-17°	Зеленый	45	Да
I Набор брекетов Zeus-P 5-5 345H Upper MBT 022, ZPM-22-503	бркет ZPM-22-11 (1 шт)	0.84	0.6	0.61	2.8	2°	17°	Желтый	11	Нет
	бркет ZPM-22-12 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	12	Нет
	бркет ZPM-22-13H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3	8°	0°	Желтый	13	Да
	бркет ZPM-22-14H (2 шт)	0.67	0.6	0.47	2.80	0°	-7°	Желтый	14, 15	Да
	бркет ZPM-22-21 (1 шт)	0.84	0.6	0.61	3	4°	17°	Красный	21	Нет
	бркет ZPM-22-22 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.80	8°	10°	Красный	22	Нет
	бркет ZPM-22-23H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3	8°	0°	Красный	23	Да
	бркет ZPM-22-24H (2 шт)	0.67	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Да
Набор брекетов Zeus-P 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, ZPM-22-553	бркет ZPM-22-31 (4 шт)	0.83	0.6	0.48	2.6	0°	-6°	Черный	31, 32	Нет
								Зеленый	41, 42	
	бркет ZPM-22-33H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.8	3°	0°	Черный	33	Да
	бркет ZPM-22-34H (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-12°	Черный	34	Да
	бркет ZPM-22-35H (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-17°	Черный	35	Да
	бркет ZPM-22-43H (1 шт)	0.71	0.6	0.50	2.80	3°	0°	Зеленый	43	Да
	бркет ZPM-22-44H (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-12°	Зеленый	44	Да
	бркет ZPM-22-45H (1 шт)	0.74	0.6	0.47	2.80	0°	-17°	Зеленый	45	Да
	бркет ZPM-22-11 (1 шт)	0.84	0.6	0.61	2.8	2°	17°	Желтый	11	Нет
	бркет ZPM-22-12 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	12	Нет
	бркет ZPM-22-13H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3	8°	0°	Желтый	13	Да

	брекет ZPM-22-14H (2 шт)	0.67	0.6	0.47	2.80	0°	-7°	Желтый	14, 15	Да
	брекет ZPM-22-21 (1 шт)	0.84	0.6	0.61	3	4°	17°	Красный	21	Нет
	брекет ZPM-22-22 (1 шт)	0.83	0.6	0.59	2.80	8°	10°	Красный	22	Нет
	брекет ZPM-22-23H (1 шт)	0.60	0.6	0.54	3	8°	0°	Красный	23	Да
	брекет ZPM-22-24H (2 шт)	0.67	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Да
Набор брекетов Meta 3-3 3H Lower Roth 018, M1R-18-031	брекет M1R-18-31 (4 шт)	1.18	0.5	0.48	2.4	0°	-1°	Черный	31, 32	Нет
								Зеленый	41, 42	
	брекет M1R-18-33H (1 шт)	0.8	0.5	0.50	2.8	7°	-11°	Черный	33	Да
	брекет M1R-18-43H (1 шт)	0.8	0.5	0.50	2.8	7°	-11°	Зеленый	43	Да
Набор брекетов Meta 3-3 3H Upper Roth 018, M1R-18-301	брекет M1R-18-11 (1 шт)	0.8	0.5	0.61	3	1°	14°	Желтый	11	Нет
	брекет M1R-18-12 (1 шт)	1.18	0.5	0.59	2.8	9°	8°	Желтый	12	Нет
	брекет M1R-18-13H (1 шт)	0.8	0.5	0.54	3	11°	-2°	Желтый	13	Да
	брекет M1R-18-21 (1 шт)	0.8	0.5	0.61	3	5°	12°	Красный	21	Нет
	брекет M1R-18-22 (1 шт)	1.18	0.5	0.59	2.8	9°	8°	Красный	22	Нет
	брекет M1R-18-23H (1 шт)	0.8	0.5	0.54	3	11°	-2°	Красный	23	Да
		брекет M1R-18-31 (4 шт)	1.18	0.5	0.48	2.4	0°	-1°	Черный	31, 32
								Зеленый	41, 42	
	брекет M1R-18-33H (1 шт)	0.8	0.5	0.50	2.8	7°	-11°	Черный	33	Да
	брекет M1R-18-43H (1 шт)	0.8	0.5	0.50	2.8	7°	-11°	Зеленый	43	Да
	брекет M1R-18-11 (1 шт)	0.8	0.5	0.61	3	1°	14°	Желтый	11	Нет
	брекет M1R-18-12 (1 шт)	1.18	0.5	0.59	2.8	9°	8°	Желтый	12	Нет
	брекет M1R-18-13H (1 шт)	0.8	0.5	0.54	3	11°	-2°	Желтый	13	Да
	брекет M1R-18-21 (1 шт)	0.8	0.5	0.61	3	5°	12°	Красный	21	Нет
	брекет M1R-18-22 (1 шт)	1.18	0.5	0.59	2.8	9°	8°	Красный	22	Нет
	брекет M1R-18-23H (1 шт)	0.8	0.5	0.54	3	11°	-2°	Красный	23	Да
Набор брекетов Meta 3-3 3H Upper/Lower Roth 018, M1R-18-331	брекет M1R-18-31 (4 шт)	1.18	0.5	0.48	2.4	0°	-1°	Черный	31, 32	Нет
								Зеленый	41, 42	
	брекет M1R-18-33H (1 шт)	0.8	0.5	0.50	2.8	7°	-11°	Черный	33	Да
	брекет M1R-18-43H (1 шт)	0.8	0.5	0.50	2.8	7°	-11°	Зеленый	43	Да
	брекет M1R-18-11 (1 шт)	0.8	0.5	0.61	3	1°	14°	Желтый	11	Нет
	брекет M1R-18-12 (1 шт)	1.18	0.5	0.59	2.8	9°	8°	Желтый	12	Нет
	брекет M1R-18-13H (1 шт)	0.8	0.5	0.54	3	11°	-2°	Желтый	13	Да
	брекет M1R-18-21 (1 шт)	0.8	0.5	0.61	3	5°	12°	Красный	21	Нет
	брекет M1R-18-22 (1 шт)	1.18	0.5	0.59	2.8	9°	8°	Красный	22	Нет
	брекет M1R-18-23H (1 шт)	0.8	0.5	0.54	3	11°	-2°	Красный	23	Да
Набор брекетов Meta 5-5 3H Lower Roth 018, M1R-18-051	брекет M1R-18-31 (4 шт)	1.18	0.5	0.48	2.4	0°	-1°	Черный	31, 32	Нет
								Зеленый	41, 42	
	брекет M1R-18-33H (1 шт)	0.8	0.5	0.50	2.8	7°	-11°	Черный	33	Да
	брекет M1R-18-34 (1 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-17°	Черный	34	Нет
	брекет M1R-18-35 (1 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-17°	Черный	35	Нет
	брекет M1R-18-43H (1 шт)	0.8	0.5	0.50	2.8	7°	-11°	Зеленый	43	Да
	брекет M1R-18-44 (1 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-17°	Зеленый	44	Нет
	брекет M1R-18-45 (1 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-17°	Зеленый	45	Нет
		брекет M1R-18-11 (1 шт)	0.8	0.5	0.61	3	1°	14°	Желтый	11
Набор брекетов Meta 5-5 3H Upper Roth 018, M1R-18-501	брекет M1R-18-12 (1 шт)	1.18	0.5	0.59	2.8	9°	8°	Желтый	12	Нет
	брекет M1R-18-13H (1 шт)	0.8	0.5	0.54	3	11°	-2°	Желтый	13	Да
	брекет M1R-18-14 (2 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-7°	Желтый	14, 15	Нет

	брекет MIR-18-21 (1 шт)	0.8	0.5	0.61	3	5°	12°	Красный	21	Нет
	брекет MIR-18-22 (1 шт)	1.18	0.5	0.59	2.8	9°	8°	Красный	22	Нет
	брекет MIR-18-23H (1 шт)	0.8	0.5	0.54	3	11°	-2°	Красный	23	Да
	брекет MIR-18-24 (2 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Нет
Набор брекетов Meta 5-5 3H Upper/Lower Roth 018, MIR-18-551	брекет MIR-18-31 (4 шт)	1.18	0.5	0.48	2.4	0°	-1°	Черный Зеленый	31, 32 41, 42	Нет
	брекет MIR-18-33H (1 шт)	0.8	0.5	0.50	2.8	7°	-11°	Черный	33	Да
	брекет MIR-18-34 (1 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-17°	Черный	34	Нет
	брекет MIR-18-35 (1 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-17°	Черный	35	Нет
	брекет MIR-18-43H (1 шт)	0.8	0.5	0.50	2.8	7°	-11°	Зеленый	43	Да
	брекет MIR-18-44 (1 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-17°	Зеленый	44	Нет
	брекет MIR-18-45 (1 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-17°	Зеленый	45	Нет
	брекет MIR-18-11 (1 шт)	0.8	0.5	0.61	3	1°	14°	Желтый	11	Нет
	брекет MIR-18-12 (1 шт)	1.18	0.5	0.59	2.8	9°	8°	Желтый	12	Нет
	брекет MIR-18-13H (1 шт)	0.8	0.5	0.54	3	11°	-2°	Желтый	13	Да
	брекет MIR-18-14 (2 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-7°	Желтый	14, 15	Нет
	брекет MIR-18-21 (1 шт)	0.8	0.5	0.61	3	5°	12°	Красный	21	Нет
	брекет MIR-18-22 (1 шт)	1.18	0.5	0.59	2.8	9°	8°	Красный	22	Нет
	брекет MIR-18-23H (1 шт)	0.8	0.5	0.54	3	11°	-2°	Красный	23	Да
	брекет MIR-18-24 (2 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Нет
	Набор брекетов Meta 5-5 345H Lower Roth 018, MIR-18-053	брекет MIR-18-31 (4 шт)	1.18	0.5	0.48	2.4	0°	-1°	Черный Зеленый	31, 32 41, 42
брекет MIR-18-33H (1 шт)		0.8	0.5	0.50	2.8	7°	-11°	Черный	33	Да
брекет MIR-18-34H (1 шт)		0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-17°	Черный	34	Да
брекет MIR-18-35H (1 шт)		0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-17°	Черный	35	Да
брекет MIR-18-43H (1 шт)		0.8	0.5	0.50	2.8	7°	-11°	Зеленый	43	Да
брекет MIR-18-44H (1 шт)		0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-17°	Зеленый	44	Да
брекет MIR-18-45H (1 шт)		0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-17°	Зеленый	45	Да
брекет MIR-18-11 (1 шт)		0.8	0.5	0.61	3	1°	14°	Желтый	11	Нет
Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper Roth 018, MIR-18-503	брекет MIR-18-12 (1 шт)	1.18	0.5	0.59	2.8	9°	8°	Желтый	12	Нет
	брекет MIR-18-13H (1 шт)	0.8	0.5	0.54	3	11°	-2°	Желтый	13	Да
	брекет MIR-18-14H (2 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-7°	Желтый	14, 15	Да
	брекет MIR-18-21 (1 шт)	0.8	0.5	0.61	3	5°	12°	Красный	21	Нет
	брекет MIR-18-22 (1 шт)	1.18	0.5	0.59	2.8	9°	8°	Красный	22	Нет
	брекет MIR-18-23H (1 шт)	0.8	0.5	0.54	3	11°	-2°	Красный	23	Да
	брекет MIR-18-24H (2 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Да
	брекет MIR-18-31 (4 шт)	1.18	0.5	0.48	2.4	0°	-1°	Черный	31, 32	Нет
Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper/Lower Roth	брекет MIR-18-31 (4 шт)	1.18	0.5	0.48	2.4	0°	-1°	Черный	31, 32	Нет

	брекет MIR-18-33H (1 шт)	0.8	0.5	0.50	2.8	7°	-11°	Зеленый	41, 42	
	брекет MIR-18-34H (1 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-17°	Черный	34	Да
	брекет MIR-18-35H (1 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-17°	Черный	35	Да
	брекет MIR-18-43H (1 шт)	0.8	0.5	0.50	2.8	7°	-11°	Зеленый	43	Да
	брекет MIR-18-44H (1 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-17°	Зеленый	44	Да
	брекет MIR-18-45H (1 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-17°	Зеленый	45	Да
	брекет MIR-18-11 (1 шт)	0.8	0.5	0.61	3	1°	14°	Желтый	11	Нет
	брекет MIR-18-12 (1 шт)	1.18	0.5	0.59	2.8	9°	8°	Желтый	12	Нет
	брекет MIR-18-13H (1 шт)	0.8	0.5	0.54	3	11°	-2°	Желтый	13	Да
	брекет MIR-18-14H (2 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-7°	Желтый	14, 15	Да
	брекет MIR-18-21 (1 шт)	0.8	0.5	0.61	3	5°	12°	Красный	21	Нет
	брекет MIR-18-22 (1 шт)	1.18	0.5	0.59	2.8	9°	8°	Красный	22	Нет
	брекет MIR-18-23H (1 шт)	0.8	0.5	0.54	3	11°	-2°	Красный	23	Да
	брекет MIR-18-24H (2 шт)	0.8	0.5	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Да
Набор брекетов Meta 3-3 3H Lower Roth 022, MIR-22-031	брекет MIR-22-31 (4 шт)	1.18	0.6	0.48	2.4	0°	-1°	Черный	31, 32	Нет
								Зеленый	41, 42	
	брекет MIR-22-33H (1 шт)	0.8	0.6	0.50	2.8	7°	-11°	Черный	33	Да
Набор брекетов Meta 3-3 3H Upper Roth 022, MIR-22-301	брекет MIR-22-11 (1 шт)	0.8	0.6	0.61	3	1°	17°	Желтый	11	Нет
	брекет MIR-22-12 (1 шт)	1.18	0.6	0.59	2.8	9°	8°	Желтый	12	Нет
	брекет MIR-22-13H (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Желтый	13	Да
	брекет MIR-22-21 (1 шт)	0.8	0.6	0.61	3	5°	12°	Красный	21	Нет
	брекет MIR-22-22 (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Красный	22	Нет
	брекет MIR-22-23H (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Красный	23	Да
	брекет MIR-22-31 (4 шт)	1.18	0.6	0.48	2.4	0°	-1°	Черный	31, 32	Нет
							Зеленый	41, 42		
Набор брекетов Meta 3-3 3H Upper/Lower Roth 022, MIR-22-331	брекет MIR-22-33H (1 шт)	0.8	0.6	0.50	2.8	7°	-11°	Черный	33	Да
	брекет MIR-22-43H (1 шт)	0.8	0.6	0.50	2.8	7°	-11°	Зеленый	43	Да
	брекет MIR-22-11 (1 шт)	0.8	0.6	0.61	3	1°	17°	Желтый	11	Нет
	брекет MIR-22-12 (1 шт)	1.18	0.6	0.59	2.8	9°	8°	Желтый	12	Нет
	брекет MIR-22-13H (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Желтый	13	Да
	брекет MIR-22-21 (1 шт)	0.8	0.6	0.61	3	5°	12°	Красный	21	Нет
	брекет MIR-22-22 (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Красный	22	Нет
	брекет MIR-22-23H (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Красный	23	Да
	брекет MIR-22-31 (4 шт)	1.18	0.6	0.48	2.4	0°	-1°	Черный	31, 32	Нет
							Зеленый	41, 42		
Набор брекетов Meta 5-5 3H Lower Roth 022, MIR-22-051	брекет MIR-22-33H (1 шт)	0.8	0.6	0.50	2.8	7°	-11°	Черный	33	Да

	брекет M1R-22-34 (1 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-17°	Черный	34	Нет
	брекет M1R-22-35 (1 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-17°	Черный	35	Нет
	брекет M1R-22-43H (1 шт)	0.8	0.6	0.50	2.8	7°	-11°	Зеленый	43	Да
	брекет M1R-22-44 (1 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-17°	Зеленый	44	Нет
	брекет M1R-22-45 (1 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-17°	Зеленый	45	Нет
Набор брекетов Meta 5-5 3H Upper Roth 022, M1R-22-501	брекет M1R-22-11 (1 шт)	0.8	0.6	0.61	3	1°	17°	Желтый	11	Нет
	брекет M1R-22-12 (1 шт)	1.18	0.6	0.59	2.8	9°	8°	Желтый	12	Нет
	брекет M1R-22-13H (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Желтый	13	Да
	брекет M1R-22-14 (2 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Желтый	14, 15	Нет
	брекет M1R-22-21 (1 шт)	0.8	0.6	0.61	3	5°	12°	Красный	21	Нет
	брекет M1R-22-22 (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Красный	22	Нет
	брекет M1R-22-23H (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Красный	23	Да
	брекет M1R-22-24 (2 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Нет
	брекет M1R-22-31 (4 шт)	0.8	0.6	0.48	2.4	0°	-1°	Черный	31, 32	Нет
								Зеленый	41, 42	
Набор брекетов Meta 5-5 3H Upper/Lower Roth 022, M1R-22-551	брекет M1R-22-33H (1 шт)	0.8	0.6	0.50	2.8	7°	-11°	Черный	33	Да
	брекет M1R-22-34 (1 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-17°	Черный	34	Нет
	брекет M1R-22-35 (1 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-17°	Черный	35	Нет
	брекет M1R-22-43H (1 шт)	0.8	0.6	0.50	2.8	7°	-11°	Зеленый	43	Да
	брекет M1R-22-44 (1 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-17°	Зеленый	44	Нет
	брекет M1R-22-45 (1 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-17°	Зеленый	45	Нет
	брекет M1R-22-11 (1 шт)	0.8	0.6	0.61	3	1°	17°	Желтый	11	Нет
	брекет M1R-22-12 (1 шт)	1.18	0.6	0.59	2.8	9°	8°	Желтый	12	Нет
	брекет M1R-22-13H (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Желтый	13	Да
	брекет M1R-22-14 (2 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Желтый	14, 15	Нет
	брекет M1R-22-21 (1 шт)	0.8	0.6	0.61	3	5°	12°	Красный	21	Нет
	брекет M1R-22-22 (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Красный	22	Нет
	брекет M1R-22-23H (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Красный	23	Да
	брекет M1R-22-24 (2 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Нет
	брекет M1R-22-31 (4 шт)	1.18	0.6	0.48	2.4	0°	-1°	Черный	31, 32	Нет
								Зеленый	41, 42	
Набор брекетов Meta 5-5 345H Lower Roth 022, M1R-22-053	брекет M1R-22-33H (1 шт)	0.8	0.6	0.50	2.8	7°	-11°	Черный	33	Да
	брекет M1R-22-34H (1 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-17°	Черный	34	Да
	брекет M1R-22-35H (1 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-17°	Черный	35	Да
	брекет M1R-22-43H (1 шт)	0.8	0.6	0.50	2.8	7°	-11°	Зеленый	43	Да
	брекет M1R-22-44H (1 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-17°	Зеленый	44	Да

	брекет M1R-22-45H (1 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-17°	Зеленый	45	Да	
Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper Roth 022, M1R-22-503	брекет M1R-22-11 (1 шт)	0.8	0.6	0.61	3	1°	17°	Желтый	11	Нет	
	брекет M1R-22-12 (1 шт)	1.18	0.6	0.59	2.8	9°	8°	Желтый	12	Нет	
	брекет M1R-22-13H (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Желтый	13	Да	
	брекет M1R-22-14H (2 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Желтый	14, 15	Да	
	брекет M1R-22-21 (1 шт)	0.8	0.6	0.61	3	5°	12°	Красный	21	Нет	
	брекет M1R-22-22 (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Красный	22	Нет	
	брекет M1R-22-23H (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Красный	23	Да	
	брекет M1R-22-24H (2 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Да	
Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper/Lower Roth 022, M1R-22-553	брекет M1R-22-31 (4 шт)	1.18	0.6	0.48	2.4	0°	-1°	Черный	31, 32	Нет	
								Зеленый	41, 42		
	брекет M1R-22-33H (1 шт)	0.8	0.6	0.50	2.8	7°	-11°	Черный	33	Да	
	брекет M1R-22-34H (1 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-17°	Черный	34	Да	
	брекет M1R-22-35H (1 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-17°	Черный	35	Да	
	брекет M1R-22-43H (1 шт)	0.8	0.6	0.50	2.8	7°	-11°	Зеленый	43	Да	
	брекет M1R-22-44H (1 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-17°	Зеленый	44	Да	
	брекет M1R-22-45H (1 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-17°	Зеленый	45	Да	
	брекет M1R-22-11 (1 шт)	0.8	0.6	0.61	3	1°	17°	Желтый	11	Нет	
	брекет M1R-22-12 (1 шт)	1.18	0.6	0.59	2.8	9°	8°	Желтый	12	Нет	
	брекет M1R-22-13H (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Желтый	13	Да	
	брекет M1R-22-14H (2 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Желтый	14, 15	Да	
	брекет M1R-22-21 (1 шт)	0.8	0.6	0.61	3	5°	12°	Красный	21	Нет	
	брекет M1R-22-22 (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Красный	22	Нет	
	брекет M1R-22-23H (1 шт)	0.8	0.6	0.54	3	11°	-2°	Красный	23	Да	
	брекет M1R-22-24H (2 шт)	0.8	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Да	
	Набор брекетов Meta 3-3 3H Lower MBT 018, M1M-18-031	брекет M1M-18-31 (4 шт)	0.9	0.5	0.48	2.2	0°	-6°	Черный	31, 32	Нет
									Зеленый	41, 42	
		брекет M1M-18-33H (1 шт)	0.7	0.5	0.50	2.8	3°	0°	Черный	33	Да
	брекет M1M-18-43H (1 шт)	0.7	0.5	0.50	2.8	3°	0°	Зеленый	43	Да	
Набор брекетов Meta 3-3 3H Upper MBT 018, M1M-18-301	брекет M1M-18-11 (1 шт)	0.6	0.5	0.7	3.3	4°	18°	Желтый	11	Нет	
	брекет M1M-18-12 (1 шт)	1.08	0.5	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	12	Нет	
	брекет M1M-18-13H (1 шт)	0.7	0.5	0.54	2.8	8°	0°	Желтый	13	Да	
	брекет M1M-18-21 (1 шт)	0.7	0.5	0.61	3.1	4°	17°	Красный	21	Нет	
	брекет M1M-18-22 (1 шт)	1.08	0.5	0.59	2.8	8°	10°	Красный	22	Нет	
	брекет M1M-18-23H (1 шт)	0.7	0.5	0.54	2.8	8°	0°	Красный	23	Да	
Набор брекетов Meta 3-3 3H Upper/Lower MBT 018, M1M-18-331	брекет M1M-18-31 (4 шт)	0.9	0.5	0.48	2.2	0°	-6°	Черный	31, 32	Нет	
								Зеленый	41, 42		

	брекет M1M-18-33H (1 шт)	0.7	0.5	0.50	2.8	3°	0°	Черный	33	Да
	брекет M1M-18-43H (1 шт)	0.7	0.5	0.50	2.8	3°	0°	Зеленый	43	Да
	брекет M1M-18-11 (1 шт)	0.6	0.5	0.7	3.3	4°	18°	Желтый	11	Нет
	брекет M1M-18-12 (1 шт)	1.08	0.5	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	12	Нет
	брекет M1M-18-13H (1 шт)	0.7	0.5	0.54	2.8	8°	0°	Желтый	13	Да
	брекет M1M-18-21 (1 шт)	0.7	0.5	0.61	3.1	4°	17°	Красный	21	Нет
	брекет M1M-18-22 (1 шт)	1.08	0.5	0.59	2.8	8°	10°	Красный	22	Нет
	брекет M1M-18-23H (1 шт)	0.7	0.5	0.54	2.8	8°	0°	Красный	23	Да
Набор брекетов Meta 5-5 3H Lower MBT 018, M1M-18-051	брекет M1M-18-31 (4 шт)	0.9	0.5	0.48	2.2	0°	-6°	Черный Зеленый	31, 32 41, 42	Нет
	брекет M1M-18-33H (1 шт)	0.7	0.5	0.50	2.8	3°	0°	Черный	33	Да
	брекет M1M-18-34 (1 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-12°	Черный	34	Нет
	брекет M1M-18-35 (1 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-12°	Черный	35	Нет
	брекет M1M-18-43H (1 шт)	0.7	0.5	0.50	2.8	3°	0°	Зеленый	43	Да
	брекет M1M-18-44 (1 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	44	Нет
	брекет M1M-18-45 (1 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	45	Нет
	брекет M1M-18-11 (1 шт)	0.6	0.5	0.7	3.3	4°	18°	Желтый	11	Нет
Набор брекетов Meta 5-5 3H Upper MBT 018, M1M-18-501	брекет M1M-18-12 (1 шт)	1.08	0.5	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	12	Нет
	брекет M1M-18-13H (1 шт)	0.7	0.5	0.54	2.8	8°	0°	Желтый	13	Да
	брекет M1M-18-14 (2 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-7°	Желтый	14, 15	Нет
	брекет M1M-18-21 (1 шт)	0.7	0.5	0.61	3.1	4°	17°	Красный	21	Нет
	брекет M1M-18-22 (1 шт)	1.08	0.5	0.59	2.8	8°	10°	Красный	22	Нет
	брекет M1M-18-23H (1 шт)	0.7	0.5	0.54	2.8	8°	0°	Красный	23	Да
	брекет M1M-18-24 (2 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Нет
	брекет M1M-18-31 (4 шт)	0.9	0.5	0.48	2.2	0°	-6°	Черный Зеленый	31, 32 41, 42	Нет
Набор брекетов Meta 5-5 3H Upper Lower MBT 018, M1M-18-551	брекет M1M-18-33H (1 шт)	0.7	0.5	0.50	2.8	3°	0°	Черный	33	Да
	брекет M1M-18-34 (1 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-12°	Черный	34	Нет
	брекет M1M-18-35 (1 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-12°	Черный	35	Нет
	брекет M1M-18-43H (1 шт)	0.7	0.5	0.50	2.8	3°	0°	Зеленый	43	Да
	брекет M1M-18-44 (1 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	44	Нет
	брекет M1M-18-45 (1 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	45	Нет
	брекет M1M-18-11 (1 шт)	0.6	0.5	0.7	3.3	4°	18°	Желтый	11	Нет
	брекет M1M-18-12 (1 шт)	1.08	0.5	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	12	Нет
	брекет M1M-18-13H (1 шт)	0.7	0.5	0.54	2.8	8°	0°	Желтый	13	Да
	брекет M1M-18-14 (2 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-7°	Желтый	14, 15	Нет

Набор брекетов Meta 5-5 345H Lower MBT 018, M1M-18-053	брекет M1M-18-21 (1 шт)	0.7	0.5	0.61	3.1	4°	17°	Красный	21	Нет
	брекет M1M-18-22 (1 шт)	1.08	0.5	0.59	2.8	8°	10°	Красный	22	Нет
	брекет M1M-18-23H (1 шт)	0.7	0.5	0.54	2.8	8°	0°	Красный	23	Да
	брекет M1M-18-24 (2 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Нет
	брекет M1M-18-31 (4 шт)	0.9	0.5	0.48	2.2	0°	-6°	Черный	31, 32	Нет
								Зеленый	41, 42	
	брекет M1M-18-33H (1 шт)	0.7	0.5	0.50	2.8	3°	0°	Черный	33	Да
	брекет M1M-18-34H (1 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-12°	Черный	34	Да
	брекет M1M-18-35H (1 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-12°	Черный	35	Да
	брекет M1M-18-43H (1 шт)	0.7	0.5	0.50	2.8	3°	0°	Зеленый	43	Да
брекет M1M-18-44H (1 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	44	Да	
брекет M1M-18-45H (1 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	45	Да	
Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper MBT 018, M1M-18-503	брекет M1M-18-11 (1 шт)	0.6	0.5	0.7	3.3	4°	18°	Желтый	11	Нет
	брекет M1M-18-12 (1 шт)	1.08	0.5	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	12	Нет
	брекет M1M-18-13H (1 шт)	0.7	0.5	0.54	2.8	8°	0°	Желтый	13	Да
	брекет M1M-18-14H (2 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-7°	Желтый	14, 15	Да
	брекет M1M-18-21 (1 шт)	0.7	0.5	0.61	3.1	4°	17°	Красный	21	Нет
	брекет M1M-18-22 (1 шт)	1.08	0.5	0.59	2.8	8°	10°	Красный	22	Нет
	брекет M1M-18-23H (1 шт)	0.7	0.5	0.54	2.8	8°	0°	Красный	23	Да
	брекет M1M-18-24H (2 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Да
	брекет M1M-18-31 (4 шт)	0.9	0.5	0.48	2.2	0°	-6°	Черный	31, 32	Нет
								Зеленый	41, 42	
Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper/Lower MBT 018, M1M-18-553	брекет M1M-18-33H (1 шт)	0.7	0.5	0.50	2.8	3°	0°	Черный	33	Да
	брекет M1M-18-34H (1 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-12°	Черный	34	Да
	брекет M1M-18-35H (1 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-12°	Черный	35	Да
	брекет M1M-18-43H (1 шт)	0.7	0.5	0.50	2.8	3°	0°	Зеленый	43	Да
	брекет M1M-18-44H (1 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	44	Да
	брекет M1M-18-45H (1 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	45	Да
	брекет M1M-18-11 (1 шт)	0.6	0.5	0.7	3.3	4°	18°	Желтый	11	Нет
	брекет M1M-18-12 (1 шт)	1.08	0.5	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	12	Нет
	брекет M1M-18-13H (1 шт)	0.7	0.5	0.54	2.8	8°	0°	Желтый	13	Да
	брекет M1M-18-14H (2 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-7°	Желтый	14, 15	Да
Набор брекетов Meta 3-3 3H Lower MBT 022,	брекет M1M-18-21 (1 шт)	0.7	0.5	0.61	3.1	4°	17°	Красный	21	Нет
	брекет M1M-18-22 (1 шт)	1.08	0.5	0.59	2.8	8°	10°	Красный	22	Нет
	брекет M1M-18-23H (1 шт)	0.7	0.5	0.54	2.8	8°	0°	Красный	23	Да
	брекет M1M-18-24H (2 шт)	0.7	0.5	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Да
	брекет M1M-22-31 (4 шт)	0.7	0.6	0.61	3.1	4°	17°	Черный	31, 32	Нет

MIM-22-031	брекет MIM-22-33H (1 шт)	1.08	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Зеленый	41, 42	
	брекет MIM-22-43H (1 шт)	0.7	0.6	0.54	2.8	8°	0°	Черный	33	Да
Набор брекетов Meta 3-3 3H Upper MBT 022, MIM-22-301	брекет MIM-22-11 (1 шт)	0.7	0.6	0.61	3.3	4°	20°	Зеленый	43	Да
	брекет MIM-22-12 (1 шт)	1.08	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	11	Нет
	брекет MIM-22-13H (1 шт)	0.7	0.6	0.54	2.8	8°	0°	Желтый	12	Нет
	брекет MIM-22-21 (1 шт)	0.7	0.6	0.61	3.1	4°	17°	Желтый	13	Да
	брекет MIM-22-22 (1 шт)	1.08	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Красный	21	Нет
	брекет MIM-22-22 (1 шт)	1.08	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Красный	22	Нет
	брекет MIM-22-23H (1 шт)	0.7	0.6	0.54	2.8	8°	0°	Красный	23	Да
Набор брекетов Meta 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, MIM-22-331	брекет MIM-22-31 (4 шт)	0.7	0.6	0.61	3.1	4°	17°	Красный	23	Да
	брекет MIM-22-33H (1 шт)	1.08	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Черный	31, 32	Нет
	брекет MIM-22-43H (1 шт)	0.7	0.6	0.54	2.8	8°	0°	Зеленый	41, 42	
	брекет MIM-22-11 (1 шт)	0.7	0.6	0.61	3.3	4°	20°	Черный	33	Да
	брекет MIM-22-12 (1 шт)	1.08	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Зеленый	43	Да
	брекет MIM-22-13H (1 шт)	0.7	0.6	0.54	2.8	8°	0°	Желтый	11	Нет
	брекет MIM-22-21 (1 шт)	0.7	0.6	0.61	3.1	4°	17°	Желтый	12	Нет
	брекет MIM-22-22 (1 шт)	1.08	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	13	Да
	брекет MIM-22-23H (1 шт)	0.7	0.6	0.54	2.8	8°	0°	Красный	21	Нет
	брекет MIM-22-23H (1 шт)	0.7	0.6	0.54	2.8	8°	0°	Красный	22	Нет
Набор брекетов Meta 5-5 3H Lower MBT 022, MIM-22-051	брекет MIM-22-31 (4 шт)	0.9	0.6	0.48	2.2	0°	-6°	Красный	23	Да
	брекет MIM-22-33H (1 шт)	0.7	0.6	0.50	2.8	3°	0°	Черный	31, 32	Нет
	брекет MIM-22-34 (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	41, 42	
	брекет MIM-22-35 (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Черный	33	Да
	брекет MIM-22-43H (1 шт)	0.7	0.6	0.50	2.8	3°	0°	Черный	34	Нет
	брекет MIM-22-44 (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Черный	35	Нет
	брекет MIM-22-45 (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	43	Да
	брекет MIM-22-44 (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	44	Нет
	брекет MIM-22-45 (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	45	Нет
Набор брекетов Meta 5-5 3H Upper MBT 022, MIM-22-501	брекет MIM-22-11 (1 шт)	0.7	0.6	0.61	3.3	4°	20°	Желтый	11	Нет
	брекет MIM-22-12 (1 шт)	1.08	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	12	Нет
	брекет MIM-22-13H (1 шт)	0.7	0.6	0.54	2.8	8°	0°	Желтый	13	Да
	брекет MIM-22-14 (2 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Желтый	14, 15	Нет
	брекет MIM-22-21 (1 шт)	0.7	0.6	0.61	3.1	4°	17°	Красный	21	Нет
	брекет MIM-22-22 (1 шт)	1.08	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Красный	22	Нет
	брекет MIM-22-23H (1 шт)	0.7	0.6	0.54	2.8	8°	0°	Красный	23	Да
	брекет MIM-22-24 (2 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Нет
Набор брекетов Meta 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, MIM-22-551	брекет MIM-22-31 (4 шт)	0.9	0.6	0.48	2.2	0°	-6°	Красный	23	Да
	брекет MIM-22-33H (1 шт)	0.7	0.6	0.50	2.8	3°	0°	Черный	31, 32	Нет
	брекет MIM-22-33H (1 шт)	0.7	0.6	0.50	2.8	3°	0°	Зеленый	41, 42	
	брекет MIM-22-33H (1 шт)	0.7	0.6	0.50	2.8	3°	0°	Черный	33	Да

	брекет M1M-22-34 (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Черный	34	Нет
	брекет M1M-22-35 (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Черный	35	Нет
	брекет M1M-22-43H (1 шт)	0.7	0.6	0.50	2.8	3°	0°	Зеленый	43	Да
	брекет M1M-22-44 (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	44	Нет
	брекет M1M-22-45 (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	45	Нет
	брекет M1M-22-11 (1 шт)	0.7	0.6	0.61	3.3	4°	20°	Желтый	11	Нет
	брекет M1M-22-12 (1 шт)	1.08	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	12	Нет
	брекет M1M-22-13H (1 шт)	0.7	0.6	0.54	2.8	8°	0°	Желтый	13	Да
	брекет M1M-22-14 (2 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Желтый	14, 15	Нет
	брекет M1M-22-21 (1 шт)	0.7	0.6	0.61	3.1	4°	17°	Красный	21	Нет
	брекет M1M-22-22 (1 шт)	1.08	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Красный	22	Нет
	брекет M1M-22-23H (1 шт)	0.7	0.6	0.54	2.8	8°	0°	Красный	23	Да
	брекет M1M-22-24 (2 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Нет
Набор брекетов Meta 5-5 345H Lower MBT 022, M1M-22-053	брекет M1M-22-31 (4 шт)	0.9	0.6	0.48	2.2	0°	-6°	Черный	31, 32	Нет
								Зеленый	41, 42	
	брекет M1M-22-33H (1 шт)	0.7	0.6	0.50	2.8	3°	0°	Черный	33	Да
	брекет M1M-22-34H (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Черный	34	Да
	брекет M1M-22-35H (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Черный	35	Да
	брекет M1M-22-43H (1 шт)	0.7	0.6	0.50	2.8	3°	0°	Зеленый	43	Да
	брекет M1M-22-44H (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	44	Да
	брекет M1M-22-45H (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	45	Да
Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper MBT 022, M1M-22-503	брекет M1M-22-11 (1 шт)	0.7	0.6	0.61	3.3	4°	20°	Желтый	11	Нет
	брекет M1M-22-12 (1 шт)	1.08	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	12	Нет
	брекет M1M-22-13H (1 шт)	0.7	0.6	0.54	2.8	8°	0°	Желтый	13	Да
	брекет M1M-22-14H (2 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Желтый	14, 15	Да
	брекет M1M-22-21 (1 шт)	0.7	0.6	0.61	3.1	4°	17°	Красный	21	Нет
	брекет M1M-22-22 (1 шт)	1.08	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Красный	22	Нет
	брекет M1M-22-23H (1 шт)	0.7	0.6	0.54	2.8	8°	0°	Красный	23	Да
	брекет M1M-22-24H (2 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Да
Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, M1M-22-553	брекет M1M-22-31 (4 шт)	0.9	0.6	0.48	2.2	0°	-6°	Черный	31, 32	Нет
								Зеленый	41, 42	
	брекет M1M-22-33H (1 шт)	0.7	0.6	0.50	2.8	3°	0°	Черный	33	Да
	брекет M1M-22-34H (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Черный	34	Да
	брекет M1M-22-35H (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Черный	35	Да
	брекет M1M-22-43H (1 шт)	0.7	0.6	0.50	2.8	3°	0°	Зеленый	43	Да
	брекет M1M-22-44H (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	44	Да

брекет M1M-22-45H (1 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-12°	Зеленый	45	Да
брекет M1M-22-11 (1 шт)	0.7	0.6	0.61	3.3	4°	20°	Желтый	11	Нет
брекет M1M-22-12 (1 шт)	1.08	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Желтый	12	Нет
брекет M1M-22-13H (1 шт)	0.7	0.6	0.54	2.8	8°	0°	Желтый	13	Да
брекет M1M-22-14H (2 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Желтый	14, 15	Да
брекет M1M-22-21 (1 шт)	0.7	0.6	0.61	3.1	4°	17°	Красный	21	Нет
брекет M1M-22-22 (1 шт)	1.08	0.6	0.59	2.8	8°	10°	Красный	22	Нет
брекет M1M-22-23H (1 шт)	0.7	0.6	0.54	2.8	8°	0°	Красный	23	Да
брекет M1M-22-24H (2 шт)	0.7	0.6	0.47	2.8	0°	-7°	Красный	24, 25	Да

Информация получена с официального сайта  
 Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
[www.goszdravnadzor.gov.ru](http://www.goszdravnadzor.gov.ru)

## 8. Технические характеристики

На поверхности образца не должно быть инородных тел, трещин, царапин и вредных дефектов в процессе эксплуатации.

Упаковка должна обеспечивать защиту содержимого от повреждения и от загрязнений при транспортировании и хранении в соответствии с принятой коммерческой практикой.

## 9. Комплект поставки

Брекет ортодонтический GNI в наборах

### I. Варианты исполнения:

1. Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Lower Roth 022, VAR-22-031  
состав: брекет VAR-22-31 (4 шт), брекет VAR-22-33H (1 шт), брекет VAR-22-43H (1 шт);
2. Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Upper Roth 022, VAR-22-301  
состав: брекет VAR-22-11 (1 шт), брекет VAR-22-12 (1 шт), брекет VAR-22-13H (1 шт), брекет VAR-22-21 (1 шт), брекет VAR-22-22 (1 шт), брекет VAR-22-23H (1 шт);
3. Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Upper/Lower Roth 022, VAR-22-331  
состав: брекет VAR-22-31 (4 шт), брекет VAR-22-33H (1 шт), брекет VAR-22-43H (1 шт), брекет VAR-22-11 (1 шт), брекет VAR-22-12 (1 шт), брекет VAR-22-13H (1 шт), брекет VAR-22-21 (1 шт), брекет VAR-22-22 (1 шт), брекет VAR-22-23H (1 шт);
4. Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Lower Roth 022, VAR-22-053  
состав: брекет VAR-22-31 (4 шт), брекет VAR-22-33H (1 шт), брекет VAR-22-34H (1 шт), брекет VAR-22-35H (1 шт), брекет VAR-22-43H (1 шт), брекет VAR-22-44H (1 шт), брекет VAR-22-45H (1 шт);
5. Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Upper Roth 022, VAR-22-503  
состав: брекет VAR-22-11 (1 шт), брекет VAR-22-12 (1 шт), брекет VAR-22-13H (1 шт), брекет VAR-22-14H (2 шт), брекет VAR-22-21 (1 шт), брекет VAR-22-22 (1 шт), брекет VAR-22-23H (1 шт), брекет VAR-22-24H (2 шт);
6. Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Upper/Lower Roth 022, VAR-22-553  
состав: брекет VAR-22-31 (4 шт), брекет VAR-22-33H (1 шт), брекет VAR-22-34H (1 шт), брекет VAR-22-35H (1 шт), брекет VAR-22-43H (1 шт), брекет VAR-22-44H (1 шт), брекет VAR-22-45H (1 шт), брекет VAR-22-11 (1 шт), брекет VAR-22-12 (1 шт), брекет VAR-22-13H (1 шт), брекет VAR-22-14H (2 шт), брекет VAR-22-21 (1 шт), брекет VAR-22-22 (1 шт), брекет VAR-22-23H (1 шт), брекет VAR-22-24H (2 шт);
7. Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Lower MBT 022, VAM-22-031  
состав: брекет VAM-22-31 (4 шт), брекет VAM-22-33H (1 шт), брекет VAM-22-43H (1 шт);
8. Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Upper MBT 022, VAM-22-301  
состав: брекет VAM-22-11 (1 шт), брекет VAM-22-12 (1 шт), брекет VAM-22-13H (1 шт), брекет VAM-22-21 (1 шт), брекет VAM-22-22 (1 шт), брекет VAM-22-23H (1 шт);
9. Набор брекетов Venus-A 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, VAM-22-331  
состав: брекет VAM-22-31 (4 шт), брекет VAM-22-33H (1 шт), брекет VAM-22-43H (1 шт), брекет VAM-22-11 (1 шт), брекет VAM-22-12 (1 шт), брекет VAM-22-13H (1 шт), брекет VAM-22-21 (1 шт), брекет VAM-22-22 (1 шт), брекет VAM-22-23H (1 шт);
10. Набор брекетов Venus-A 5-5 3H Lower MBT 022, VAM-22-051  
состав: брекет VAM-22-31 (4 шт), брекет VAM-22-33H (1 шт), брекет VAM-22-34 (1 шт), брекет VAM-22-35 (1 шт), брекет VAM-22-43H (1 шт), брекет VAM-22-44 (1 шт), брекет VAM-22-45 (1 шт);
11. Набор брекетов Venus-A 5-5 3H Upper MBT 022, VAM-22-501  
состав: брекет VAM-22-11 (1 шт), брекет VAM-22-12 (1 шт), брекет VAM-22-13H (1 шт), брекет VAM-22-14 (2 шт), брекет VAM-22-21 (1 шт), брекет VAM-22-22 (1 шт), брекет VAM-22-23H (1 шт), брекет VAM-22-24 (2 шт);
12. Набор брекетов Venus-A 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, VAM-22-551  
состав: брекет VAM-22-31 (4 шт), брекет VAM-22-33H (1 шт), брекет VAM-22-34 (1 шт), брекет VAM-22-35 (1 шт), брекет VAM-22-43H (1 шт), брекет VAM-22-44 (1 шт), брекет VAM-22-45 (1 шт), брекет VAM-22-11 (1 шт), брекет VAM-22-12 (1 шт), брекет VAM-22-13H (1 шт), брекет VAM-22-14 (2 шт), брекет VAM-22-21 (1 шт), брекет VAM-22-22 (1 шт), брекет VAM-22-23H (1 шт), брекет VAM-22-24 (2 шт);
13. Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Lower MBT 022, VAM-22-053  
состав: брекет VAM-22-31 (4 шт), брекет VAM-22-33H (1 шт), брекет VAM-22-34H (1 шт), брекет VAM-22-35H (1 шт), брекет VAM-22-43H (1 шт), брекет VAM-22-44H (1 шт), брекет VAM-22-45H (1 шт);
14. Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Lower MBT 022, VAM-22-503  
состав: брекет VAM-22-11 (1 шт), брекет VAM-22-12 (1 шт), брекет VAM-22-13H (1 шт), брекет VAM-22-14H (2 шт), брекет VAM-22-21 (1 шт), брекет VAM-22-22 (1 шт), брекет VAM-22-23H (1 шт), брекет VAM-22-24H (2 шт);

15. Набор брекетов Venus-A 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, VAM-22-553  
состав: брекет VAM-22-31 (4 шт), брекет VAM-22-33H (1 шт), брекет VAM-22-34H (1 шт), брекет VAM-22-35H (1 шт), брекет VAM-22-43H (1 шт), брекет VAM-22-44H (1 шт), брекет VAM-22-45H (1 шт), брекет VAM-22-11 (1 шт), брекет VAM-22-12 (1 шт), брекет VAM-22-13H (1 шт), брекет VAM-22-14H (2 шт), брекет VAM-22-21 (1 шт), брекет VAM-22-22 (1 шт), брекет VAM-22-23H (1 шт), брекет VAM-22-24H (2 шт);
16. Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Lower Roth 022, VPR-22-031  
состав: брекет VPR-22-31 (4 шт), брекет VPR-22-33H (1 шт), брекет VPR-22-43H (1 шт);
17. Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Upper Roth 022, VPR-22-301  
состав: брекет VPR-22-11 (1 шт), брекет VPR-22-12 (1 шт), брекет VPR-22-13H (1 шт), брекет VPR-22-21 (1 шт), брекет VPR-22-22 (1 шт), брекет VPR-22-23H (1 шт);
18. Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Upper/Lower Roth 022, VPR-22-331  
состав: брекет VPR-22-31 (4 шт), брекет VPR-22-33H (1 шт), брекет VPR-22-43H (1 шт), брекет VPR-22-11 (1 шт), брекет VPR-22-12 (1 шт), брекет VPR-22-13H (1 шт), брекет VPR-22-21 (1 шт), брекет VPR-22-22 (1 шт), брекет VPR-22-23H (1 шт);
19. Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Lower Roth 022, VPR-22-053  
состав: брекет VPR-22-31 (4 шт), брекет VPR-22-33H (1 шт), брекет VPR-22-34H (1 шт), брекет VPR-22-35H (1 шт), брекет VPR-22-43H (1 шт), брекет VPR-22-44H (1 шт), брекет VPR-22-45H (1 шт);
20. Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Upper Roth 022, VPR-22-503  
состав: брекет VPR-22-11 (1 шт), брекет VPR-22-12 (1 шт), брекет VPR-22-13H (1 шт), брекет VPR-22-14H (2 шт), брекет VPR-22-21 (1 шт), брекет VPR-22-22 (1 шт), брекет VPR-22-23H (1 шт), брекет VPR-22-24H (2 шт);
21. Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Upper/Lower Roth 022, VPR-22-553  
состав: брекет VPR-22-31 (4 шт), брекет VPR-22-33H (1 шт), брекет VPR-22-34H (1 шт), брекет VPR-22-35H (1 шт), брекет VPR-22-43H (1 шт), брекет VPR-22-44H (1 шт), брекет VPR-22-45H (1 шт), брекет VPR-22-11 (1 шт), брекет VPR-22-12 (1 шт), брекет VPR-22-13H (1 шт), брекет VPR-22-14H (2 шт), брекет VPR-22-21 (1 шт), брекет VPR-22-22 (1 шт), брекет VPR-22-23H (1 шт), брекет VPR-22-24H (2 шт);
22. Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Lower MBT 022, VPM-22-031  
состав: брекет VPM-22-31 (4 шт), брекет VPM-22-33H (1 шт), брекет VPM-22-43H (1 шт);
23. Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Upper MBT 022, VPM-22-301  
состав: брекет VPM-22-11 (1 шт), брекет VPM-22-12 (1 шт), брекет VPM-22-13H (1 шт), брекет VPM-22-21 (1 шт), брекет VPM-22-22 (1 шт), брекет VPM-22-23H (1 шт);
24. Набор брекетов Venus-P 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, VPM-22-331  
состав: брекет VPM-22-31 (4 шт), брекет VPM-22-33H (1 шт), брекет VPM-22-43H (1 шт), брекет VPM-22-11 (1 шт), брекет VPM-22-12 (1 шт), брекет VPM-22-13H (1 шт), брекет VPM-22-21 (1 шт), брекет VPM-22-22 (1 шт), брекет VPM-22-23H (1 шт);
25. Набор брекетов Venus-P 5-5 3H Lower MBT 022, VPM-22-051  
состав: брекет VPM-22-31 (4 шт), брекет VPM-22-33H (1 шт), брекет VPM-22-34 (1 шт), брекет VPM-22-35 (1 шт), брекет VPM-22-43H (1 шт), брекет VPM-22-44 (1 шт), брекет VPM-22-45 (1 шт);
26. Набор брекетов Venus-P 5-5 3H Upper MBT 022, VPM-22-501  
состав: брекет VPM-22-11 (1 шт), брекет VPM-22-12 (1 шт), брекет VPM-22-13H (1 шт), брекет VPM-22-14 (2 шт), брекет VPM-22-21 (1 шт), брекет VPM-22-22 (1 шт), брекет VPM-22-23H (1 шт), брекет VPM-22-24 (2 шт);
27. Набор брекетов Venus-P 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, VPM-22-551  
состав: брекет VPM-22-31 (4 шт), брекет VPM-22-33H (1 шт), брекет VPM-22-34 (1 шт), брекет VPM-22-35 (1 шт), брекет VPM-22-43H (1 шт), брекет VPM-22-44 (1 шт), брекет VPM-22-45 (1 шт), брекет VPM-22-11 (1 шт), брекет VPM-22-12 (1 шт), брекет VPM-22-13H (1 шт), брекет VPM-22-14 (2 шт), брекет VPM-22-21 (1 шт), брекет VPM-22-22 (1 шт), брекет VPM-22-23H (1 шт), брекет VPM-22-24 (2 шт);
28. Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Lower MBT 022, VPM-22-053  
состав: брекет VPM-22-31 (4 шт), брекет VPM-22-33H (1 шт), брекет VPM-22-34H (1 шт), брекет VPM-22-35H (1 шт), брекет VPM-22-43H (1 шт), брекет VPM-22-44H (1 шт), брекет VPM-22-45H (1 шт);
29. Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Upper MBT 022, VPM-22-503  
состав: брекет VPM-22-11 (1 шт), брекет VPM-22-12 (1 шт), брекет VPM-22-13H (1 шт), брекет VPM-22-14H (2 шт), брекет VPM-22-21 (1 шт), брекет VPM-22-22 (1 шт), брекет VPM-22-23H (1 шт), брекет VPM-22-24H (2 шт);
30. Набор брекетов Venus-P 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, VPM-22-553  
состав: брекет VPM-22-31 (4 шт), брекет VPM-22-33H (1 шт), брекет VPM-22-34H (1 шт), брекет VPM-22-35H (1 шт), брекет VPM-22-43H (1 шт), брекет VPM-22-44H (1 шт), брекет VPM-22-45H (1 шт), брекет VPM-22-11 (1 шт), брекет VPM-22-12 (1 шт), брекет VPM-22-13H (1 шт), брекет VPM-22-14H (2 шт), брекет VPM-22-21 (1 шт), брекет VPM-22-22 (1 шт), брекет VPM-22-23H (1 шт), брекет VPM-22-24H (2 шт).

31. Набор брекетов Rose 3-3 3H Lower Roth 022, RCR-22-031  
состав: брекет RCR-22-31 (4 шт), брекет RCR-22-33H (1 шт), брекет RCR-22-43H (1 шт);
32. Набор брекетов Rose 3-3 3H Upper Roth 022, RCR-22-301  
состав: брекет RCR-22-11 (1 шт), брекет RCR-22-12 (1 шт), брекет RCR-22-13H (1 шт), брекет RCR-22-21 (1 шт), брекет RCR-22-22 (1 шт), брекет RCR-22-23H (1 шт);
33. Набор брекетов Rose 3-3 3H Upper/Lower Roth 022, RCR-22-331  
состав: брекет RCR-22-31 (4 шт), брекет RCR-22-33H (1 шт), брекет RCR-22-43H (1 шт), брекет RCR-22-11 (1 шт), брекет RCR-22-12 (1 шт), брекет RCR-22-13H (1 шт), брекет RCR-22-21 (1 шт), брекет RCR-22-22 (1 шт), брекет RCR-22-23H (1 шт);
34. Набор брекетов Rose 5-5 345H Lower Roth 022, RCR-22-053  
состав: брекет RCR-22-31 (4 шт), брекет RCR-22-33H (1 шт), брекет RCR-22-34H (1 шт), брекет RCR-22-35H (1 шт), брекет RCR-22-43H (1 шт), брекет RCR-22-44H (1 шт), брекет RCR-22-45H (1 шт);
35. Набор брекетов Rose 5-5 345H Upper Roth 022, RCR-22-503  
состав: брекет RCR-22-11 (1 шт), брекет RCR-22-12 (1 шт), брекет RCR-22-13H (1 шт), брекет RCR-22-14H (2 шт), брекет RCR-22-21 (1 шт), брекет RCR-22-22 (1 шт), брекет RCR-22-23H (1 шт), брекет RCR-22-24H (2 шт);
36. Набор брекетов Rose 5-5 345H Upper/Lower Roth 022, RCR-22-553  
состав: брекет RCR-22-31 (4 шт), брекет RCR-22-33H (1 шт), брекет RCR-22-34H (1 шт), брекет RCR-22-35H (1 шт), брекет RCR-22-43H (1 шт), брекет RCR-22-44H (1 шт), брекет RCR-22-45H (1 шт), брекет RCR-22-11 (1 шт), брекет RCR-22-12 (1 шт), брекет RCR-22-13H (1 шт), брекет RCR-22-14H (2 шт), брекет RCR-22-21 (1 шт), брекет RCR-22-22 (1 шт), брекет RCR-22-23H (1 шт), брекет RCR-22-24H (2 шт);
37. Набор брекетов Rose 3-3 3H Lower MBT 022, RCM-22-031  
состав: брекет RCM-22-31 (4 шт), брекет RCM-22-33H (1 шт), брекет RCM-22-43H (1 шт);
38. Набор брекетов Rose 3-3 3H Upper MBT 022, RCM-22-301  
состав: брекет RCM-22-11 (1 шт), брекет RCM-22-12 (1 шт), брекет RCM-22-13H (1 шт), брекет RCM-22-21 (1 шт), брекет RCM-22-22 (1 шт), брекет RCM-22-23H (1 шт);
39. Набор брекетов Rose 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, RCM-22-331  
состав: брекет RCM-22-31 (4 шт), брекет RCM-22-33H (1 шт), брекет RCM-22-43H (1 шт), брекет RCM-22-11 (1 шт), брекет RCM-22-12 (1 шт), брекет RCM-22-13H (1 шт), брекет RCM-22-21 (1 шт), брекет RCM-22-22 (1 шт), брекет RCM-22-23H (1 шт);
40. Набор брекетов Rose 5-5 3H Lower MBT 022, RCM-22-051  
состав: брекет RCM-22-31 (4 шт), брекет RCM-22-33H (1 шт), брекет RCM-22-34 (1 шт), брекет RCM-22-35 (1 шт), брекет RCM-22-43H (1 шт), брекет RCM-22-44 (1 шт), брекет RCM-22-45 (1 шт);
41. Набор брекетов Rose 5-5 3H Upper MBT 022, RCM-22-501  
состав: брекет RCM-22-11 (1 шт), брекет RCM-22-12 (1 шт), брекет RCM-22-13H (1 шт), брекет RCM-22-14 (2 шт), брекет RCM-22-21 (1 шт), RCM-22-22 (1 шт), брекет RCM-22-23H (1 шт), брекет RCM-22-24 (2 шт);
42. Набор брекетов Rose 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, RCM-22-551  
состав: брекет RCM-22-31 (4 шт), брекет RCM-22-33H (1 шт), брекет RCM-22-34 (1 шт), брекет RCM-22-35 (1 шт), брекет RCM-22-43H (1 шт), брекет RCM-22-44 (1 шт), брекет RCM-22-45 (1 шт), брекет RCM-22-11 (1 шт), брекет RCM-22-12 (1 шт), RCM-22-22 (1 шт), брекет RCM-22-13H (1 шт), брекет RCM-22-14 (2 шт), брекет RCM-22-21 (1 шт), брекет RCM-22-23H (1 шт), брекет RCM-22-24 (2 шт);
43. Набор брекетов Rose 5-5 345H Lower MBT 022, RCM-22-053  
состав: брекет RCM-22-31 (4 шт), брекет RCM-22-33H (1 шт), брекет RCM-22-34H (1 шт), брекет RCM-22-35H (1 шт), брекет RCM-22-43H (1 шт), брекет RCM-22-44H (1 шт), брекет RCM-22-45H (1 шт);
44. Набор брекетов Rose 5-5 345H Upper MBT 022, RCM-22-503  
состав: брекет RCM-22-11 (1 шт), брекет RCM-22-12 (1 шт), брекет RCM-22-13H (1 шт), брекет RCM-22-14H (2 шт), брекет RCM-22-21 (1 шт), брекет RCM-22-22 (1 шт), брекет RCM-22-23H (1 шт), брекет RCM-22-24H (2 шт);
45. Набор брекетов Rose 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, RCM-22-553  
состав: брекет RCM-22-31 (4 шт), брекет RCM-22-33H (1 шт), брекет RCM-22-34H (1 шт), брекет RCM-22-35H (1 шт), брекет RCM-22-43H (1 шт), брекет RCM-22-44H (1 шт), брекет RCM-22-45H (1 шт), брекет RCM-22-11 (1 шт), брекет RCM-22-12 (1 шт), брекет RCM-22-13H (1 шт), брекет RCM-22-14H (2 шт), брекет RCM-22-21 (1 шт), брекет RCM-22-22 (1 шт), брекет RCM-22-23H (1 шт), брекет RCM-22-24H (2 шт);
46. Набор брекетов Rosa 3-3 3H Lower Roth 018, RSR-18-031  
состав: брекет RSR-18-31 (4 шт), брекет RSR-18-33H (1 шт), брекет RSR-18-43H (1 шт);
47. Набор брекетов Rosa 3-3 3H Upper Roth 018, RSR-18-301  
состав: брекет RSR-18-11 (1 шт), брекет RSR-18-12 (1 шт), брекет RSR-18-13H (1 шт), брекет RSR-18-21 (1 шт), брекет RSR-18-22 (1 шт), брекет RSR-18-23H (1 шт);
48. Набор брекетов Rosa 3-3 3H Upper/Lower Roth 018, RSR-18-331





состав: брекет RSM-22-11 (1 шт), брекет RSM-22-12 (1 шт), брекет RSM-22-13H (1 шт), брекет RSM-22-14H (2 шт), брекет RSM-22-21 (1 шт), брекет RSM-22-22 (1 шт), брекет RSM-22-23H (1 шт), брекет RSM-22-24H (2 шт);

81. Набор брекетов Rosa 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, RSM-22-553

состав: брекет RSM-22-31 (4 шт), брекет RSM-22-33H (1 шт), брекет RSM-22-34H (1 шт), брекет RSM-22-35H (1 шт), брекет RSM-22-43H (1 шт), брекет RSM-22-44H (1 шт), брекет RSM-22-45H (1 шт), брекет RSM-22-11 (1 шт), брекет RSM-22-12 (1 шт), брекет RSM-22-13H (1 шт), брекет RSM-22-14H (2 шт), брекет RSM-22-21 (1 шт), брекет RSM-22-22 (1 шт), брекет RSM-22-23H (1 шт), брекет RSM-22-24H (2 шт);

82. Набор брекетов Zeus-A 3-3 3H Lower Roth 022, ZAR-22-031

состав: брекет ZAR-22-31 (4 шт), брекет ZAR-22-33H (1 шт), брекет ZAR-22-43H (1 шт);

83. Набор брекетов Zeus-A 3-3 3H Upper Roth 022, ZAR-22-301

состав: брекет ZAR-22-11 (1 шт), брекет ZAR-22-12 (1 шт), брекет ZAR-22-13H (1 шт), брекет ZAR-22-21 (1 шт), брекет ZAR-22-22 (1 шт), брекет ZAR-22-23H (1 шт);

84. Набор брекетов Zeus-A 3-3 3H Upper/Lower Roth 022, ZAR-22-331

состав: брекет ZAR-22-31 (4 шт), брекет ZAR-22-33H (1 шт), брекет ZAR-22-43H (1 шт), брекет ZAR-22-11 (1 шт), брекет ZAR-22-12 (1 шт), брекет ZAR-22-13H (1 шт), брекет ZAR-22-21 (1 шт), брекет ZAR-22-22 (1 шт), брекет ZAR-22-23H (1 шт);

85. Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Lower Roth 022, ZAR-22-053

состав: брекет ZAR-22-31 (4 шт), брекет ZAR-22-33H (1 шт), брекет ZAR-22-34H (1 шт), брекет ZAR-22-35H (1 шт), брекет ZAR-22-43H (1 шт), брекет ZAR-22-44H (1 шт), брекет ZAR-22-45H (1 шт);

86. Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Upper Roth 022, ZAR-22-503

состав: брекет ZAR-22-11 (1 шт), брекет ZAR-22-12 (1 шт), брекет ZAR-22-13H (1 шт), брекет ZAR-22-14H (2 шт), брекет ZAR-22-21 (1 шт), брекет ZAR-22-22 (1 шт), брекет ZAR-22-23H (1 шт), брекет ZAR-22-24H (2 шт);

87. Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Upper/Lower Roth 022, ZAR-22-553

состав: брекет ZAR-22-31 (4 шт), брекет ZAR-22-33H (1 шт), брекет ZAR-22-34H (1 шт), брекет ZAR-22-35H (1 шт), брекет ZAR-22-43H (1 шт), брекет ZAR-22-44H (1 шт), брекет ZAR-22-45H (1 шт), брекет ZAR-22-11 (1 шт), брекет ZAR-22-12 (1 шт), брекет ZAR-22-13H (1 шт), брекет ZAR-22-14H (2 шт), брекет ZAR-22-21 (1 шт), брекет ZAR-22-22 (1 шт), брекет ZAR-22-23H (1 шт), брекет ZAR-22-24H (2 шт);

88. Набор брекетов Zeus-A 3-3 3H Lower MBT 022, ZAM-22-031

состав: брекет ZAM-22-31 (4 шт), брекет ZAM-22-33H (1 шт), брекет ZAM-22-43H (1 шт);

89. Набор брекетов Zeus-A 3-3 3H Upper MBT 022, ZAM-22-301

состав: брекет ZAM-22-11 (1 шт), брекет ZAM-22-12 (1 шт), брекет ZAM-22-13H (1 шт), брекет ZAM-22-21 (1 шт), брекет ZAM-22-22 (1 шт), брекет ZAM-22-23H (1 шт);

90. Набор брекетов Zeus-A 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, ZAM-22-331

состав: брекет ZAM-22-31 (4 шт), брекет ZAM-22-33H (1 шт), брекет ZAM-22-43H (1 шт), брекет ZAM-22-11 (1 шт), брекет ZAM-22-12 (1 шт), брекет ZAM-22-13H (1 шт), брекет ZAM-22-21 (1 шт), брекет ZAM-22-22 (1 шт), брекет ZAM-22-23H (1 шт);

91. Набор брекетов Zeus-A 5-5 3H Lower MBT 022, ZAM-22-051

состав: брекет ZAM-22-31 (4 шт), брекет ZAM-22-33H (1 шт), брекет ZAM-22-34 (1 шт), брекет ZAM-22-35 (1 шт), брекет ZAM-22-43H (1 шт), брекет ZAM-22-44 (1 шт), брекет ZAM-22-45 (1 шт);

92. Набор брекетов Zeus-A 5-5 3H Upper MBT 022, ZAM-22-501

состав: брекет ZAM-22-11 (1 шт), брекет ZAM-22-12 (1 шт), брекет ZAM-22-13H (1 шт), брекет ZAM-22-14 (2 шт), брекет ZAM-22-21 (1 шт), брекет ZAM-22-22 (1 шт), брекет ZAM-22-23H (1 шт), брекет ZAM-22-24 (2 шт);

93. Набор брекетов Zeus-A 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, ZAM-22-551

состав: брекет ZAM-22-31 (4 шт), брекет ZAM-22-33H (1 шт), брекет ZAM-22-34 (1 шт), брекет ZAM-22-35 (1 шт), брекет ZAM-22-43H (1 шт), брекет ZAM-22-44 (1 шт), брекет ZAM-22-45 (1 шт), брекет ZAM-22-11 (1 шт), брекет ZAM-22-12 (1 шт), брекет ZAM-22-13H (1 шт), брекет ZAM-22-14 (2 шт), брекет ZAM-22-21 (1 шт), брекет ZAM-22-22 (1 шт), брекет ZAM-22-23H (1 шт), брекет ZAM-22-24 (2 шт);

94. Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Lower MBT 022, ZAM-22-053

состав: брекет ZAM-22-31 (4 шт), брекет ZAM-22-33H (1 шт), брекет ZAM-22-34H (1 шт), брекет ZAM-22-35H (1 шт), брекет ZAM-22-43H (1 шт), брекет ZAM-22-44H (1 шт), брекет ZAM-22-45H (1 шт);

95. Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Upper MBT 022, ZAM-22-503

состав: брекет ZAM-22-11 (1 шт), брекет ZAM-22-12 (1 шт), брекет ZAM-22-13H (1 шт), брекет ZAM-22-14H (2 шт), брекет ZAM-22-21 (1 шт), брекет ZAM-22-22 (1 шт), брекет ZAM-22-23H (1 шт), брекет ZAM-22-24H (2 шт);

96. Набор брекетов Zeus-A 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, ZAM-22-553







состав: брекет M1M-18-31 (4 шт), брекет M1M-18-33H (1 шт), брекет M1M-18-34H (1 шт), брекет M1M-18-35H (1 шт), брекет M1M-18-43H (1 шт), брекет M1M-18-44H (1 шт), брекет M1M-18-45H (1 шт);

146. Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper MBT 018, M1M-18-503

состав: брекет M1M-18-11 (1 шт), брекет M1M-18-12 (1 шт), брекет M1M-18-13H (1 шт), брекет M1M-18-14H (2 шт), брекет M1M-18-21 (1 шт), брекет M1M-18-22 (1 шт), брекет M1M-18-23H (1 шт), брекет M1M-18-24H (2 шт);

147. Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper/Lower MBT 018, M1M-18-553

состав: брекет M1M-18-31 (4 шт), брекет M1M-18-33H (1 шт), брекет M1M-18-34H (1 шт), брекет M1M-18-35H (1 шт), брекет M1M-18-43H (1 шт), брекет M1M-18-44H (1 шт), брекет M1M-18-45H (1 шт); брекет M1M-18-11 (1 шт), брекет M1M-18-12 (1 шт), брекет M1M-18-13H (1 шт), брекет M1M-18-14H (2 шт), брекет M1M-18-21 (1 шт), брекет M1M-18-22 (1 шт), брекет M1M-18-23H (1 шт), брекет M1M-18-24H (2 шт);

148. Набор брекетов Meta 3-3 3H Lower MBT 022, M1M-22-031

состав: брекет M1M-22-31 (4 шт), брекет M1M-22-33H (1 шт), брекет M1M-22-43H (1 шт);

149. Набор брекетов Meta 3-3 3H Upper MBT 022, M1M-22-301

состав: брекет M1M-22-11 (1 шт), брекет M1M-22-12 (1 шт), брекет M1M-22-13H (1 шт), брекет M1M-22-21 (1 шт), брекет M1M-22-22 (1 шт), брекет M1M-22-23H (1 шт);

150. Набор брекетов Meta 3-3 3H Upper/Lower MBT 022, M1M-22-331

состав: брекет M1M-22-31 (4 шт), брекет M1M-22-33H (1 шт), брекет M1M-22-43H (1 шт), брекет M1M-22-11 (1 шт), брекет M1M-22-12 (1 шт), брекет M1M-22-13H (1 шт), брекет M1M-22-21 (1 шт), брекет M1M-22-22 (1 шт), брекет M1M-22-23H (1 шт);

151. Набор брекетов Meta 5-5 3H Lower MBT 022, M1M-22-051

состав: брекет M1M-22-31 (4 шт), брекет M1M-22-33H (1 шт), брекет M1M-22-34 (1 шт), брекет M1M-22-35 (1 шт), брекет M1M-22-43H (1 шт), брекет M1M-22-44 (1 шт), брекет M1M-22-45 (1 шт);

152. Набор брекетов Meta 5-5 3H Upper MBT 022, M1M-22-501

состав: брекет M1M-22-11 (1 шт), брекет M1M-22-12 (1 шт), брекет M1M-22-13H (1 шт), брекет M1M-22-14 (2 шт), брекет M1M-22-21 (1 шт), брекет M1M-22-22 (1 шт), брекет M1M-22-23H (1 шт), брекет M1M-22-24 (2 шт);

153. Набор брекетов Meta 5-5 3H Upper/Lower MBT 022, M1M-22-551

состав: брекет M1M-22-31 (4 шт), брекет M1M-22-33H (1 шт), брекет M1M-22-34 (1 шт), брекет M1M-22-35 (1 шт), брекет M1M-22-43H (1 шт), брекет M1M-22-44 (1 шт), брекет M1M-22-45 (1 шт), брекет M1M-22-11 (1 шт), брекет M1M-22-12 (1 шт), брекет M1M-22-13H (1 шт), брекет M1M-22-14 (2 шт), брекет M1M-22-21 (1 шт), брекет M1M-22-22 (1 шт), брекет M1M-22-23H (1 шт), брекет M1M-22-24 (2 шт);

154. Набор брекетов Meta 5-5 345H Lower MBT 022, M1M-22-053

состав: брекет M1M-22-31 (4 шт), брекет M1M-22-33H (1 шт), брекет M1M-22-34H (1 шт), брекет M1M-22-35H (1 шт), брекет M1M-22-43H (1 шт), брекет M1M-22-44H (1 шт), брекет M1M-22-45H (1 шт);

155. Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper MBT 022, M1M-22-503

состав: брекет M1M-22-11 (1 шт), брекет M1M-22-12 (1 шт), брекет M1M-22-13H (1 шт), брекет M1M-22-14H (2 шт), брекет M1M-22-21 (1 шт), брекет M1M-22-22 (1 шт), брекет M1M-22-23H (1 шт), брекет M1M-22-24H (2 шт);

156. Набор брекетов Meta 5-5 345H Upper/Lower MBT 022, M1M-22-553





состав: брекет M1M-22-31 (4 шт), брекет M1M-22-33H (1 шт), брекет M1M-22-34H (1 шт), брекет M1M-22-35H (1 шт), брекет M1M-22-43H (1 шт), брекет M1M-22-44H (1 шт), брекет M1M-22-45H (1 шт), брекет M1M-22-11 (1 шт), брекет M1M-22-12 (1 шт), брекет M1M-22-13H (1 шт), брекет M1M-22-14H (2 шт), брекет M1M-22-21 (1 шт), брекет M1M-22-22 (1 шт), брекет M1M-22-23H (1 шт), брекет M1M-22-24H (2 шт);

II. Инструкция по применению – на бумажном носителе (1 экземпляр на транспортную упаковку) и в электронном виде.

## 10. Расшифровка символов, применяемых в маркировке упаковок

Таблица 5 – Обозначения и символы

	Код партии		Номер по каталогу
	Дата изготовления		Изготовитель

 eIFU идентификатор	Обратитесь к инструкции по применению или обратитесь к инструкции по применению в электронном виде		Не стерильно
	Запрет на повторное применение		Не допускать воздействия солнечного света
	Использовать до		

## 10. Условия хранения, транспортировки и эксплуатации

### Хранение

Изделия и приспособления следует хранить в чистом виде и в чистом месте.

- температура: от 0 до +40°C;
- относительная влажность воздуха: 0 - 85 %;
- атмосферное давление: от 800 до 1060 гПа.

### Транспортирование

При транспортировке не бросать. Транспортирование изделий и приспособлений, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

- температура: от 0 до +40°C;
- относительная влажность воздуха: 0 - 85 %;
- атмосферное давление: от 800 до 1060 гПа.

### Эксплуатация

Изделия применяются в лечебно-профилактических учреждениях и стоматологических клиниках.

- температура: от 0 до +40°C;
- относительная влажность воздуха: 0 - 85 %;
- атмосферное давление: от 800 до 1060 гПа.

## 11. Очистка, дезинфекция и стерилизация изделия

Медицинские изделия предназначены для одноразового использования и поставляются нестерильными.

Очистка и дезинфекция:

Перед установкой медицинское изделие необходимо продезинфицировать 70% этиловым спиртом.

## 12. Утилизация

Медицинские изделия после использования их по назначению относятся к эпидемиологически опасным отходам (изделия, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, а также изделия, контактирующие с пациентами с инфекционными болезнями).

В данном случае медицинская организация осуществляет только сбор, обеззараживание и временное хранение вышеуказанных отходов. Обеззараживание должно проводиться в соответствии с требованиями санитарных правил и иных нормативных правовых актов той или иной страны во всех лечебно-профилактических учреждениях независимо от их профиля. Сбор осуществляют в пакеты или в контейнеры однократного применения с цветовой маркировкой, принятой для опасных медицинских отходов в помещении или в местах для временного хранения медицинских отходов до последующего транспортирования к месту уничтожения или утилизации.

Транспортированием медицинских отходов (использованных имплантатов или компонентов) из медицинских учреждений, их утилизацией занимаются специализированные

организации, имеющие лицензию на обращение с опасными в эпидемиологическом отношении медицинскими отходами.

Потребительская упаковка, бракованные изделия относятся к эпидемиологически безопасным отходам (неопасным отходам, не имеющим контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными), приближенным по составу к твердым бытовым отходам (ТБО). Однако, рекомендуется утилизировать их отдельно как промышленный отход через специализированные организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

Сбор эпидемиологически безопасных отходов осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты (за исключением пакетов цвета, принятого для опасных отходов). Порядок мытья и дезинфекции многоразовой тары определяется в соответствии со схемой обращения отходов в каждой конкретной организации. Порядок сбора и хранения эпидемиологически безопасных отходов определяется в соответствии со схемой обращения отходов в каждой конкретной организации.

Транспортирование и утилизация осуществляются с учетом требований, принятыми для данной территории, в соответствии с санитарным законодательством той или иной страны к содержанию территорий населенных мест и обращению с отходами производства и потребления.

### **13. Срок годности**

Срок годности изделий не ограничен.

### **14. Техническое обслуживание и ремонт**

Изделие одноразовое, не требует технического обслуживания.

### **15. Перечень международных стандартов, которым соответствует медицинское изделие**

EN ISO 13485, EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-3, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-10, EN ISO 10993-11, EN 1641, EN ISO 7405, EN ISO 27020, EN ISO 22674, EN ISO 10271, EN 62366, EN ISO 15223-1, EN 1041, MEDDEV 2.7/1 Ред. 4, MEDDEV 2.12/1 Ред. 8, MEDDEV 2.12/2 Ред. 2, ISTA 2017 2A.

*Примечание:* Стандарты используются в последней редакции: организация сохраняет и обновляет список справочных стандартов как запись собственной системы управления в соответствии с ISO 13485.

수원시 영통구 동수원로 540  
법조빌딩 1층  
[별지 제43호서식]

공증  
인가  
법무법인 효원

(TEL) (031)214-7733  
(FAX) (031)214-7732

등부 2025년 제 106호

Registered No. 2025-106

인 증

NOTARIAL CERTIFICATE

위 문서-----에

Seo Donghoon -----

기재된 주식회사 지앤드아이

대표이사 김덕수

attorney-in-fact of

KIM, DUG SOO -----

CEO -----

GNI Co., LTD -----

의 대리인 서동훈 -----은

본 공증인의 앞에서 위 본인이

기명날인한 사실을 인정했다.

appeared before me and admitted

said principal's subscription to

the attached A Document -----

2025년 01월 13일

이 사무소에서 위 인증한다.

This is hereby attested on this  
13th day of Jan. 2025 at this office.

공증사무소 명칭

공증  
인가  
법무법인 효원

Name of the office

HYOWON LAW FIRM & NOTARY OFFICE

소 속 수원지방검찰청

Belong to Suwon

District Prosecutor's Office

소재지표시

수원시 영통구 동수원로 540


Address of the office

540, Dongsuwon-ro

Suwon-si, Gyeonggi-do, KOREA

법조빌딩 1층

김원익

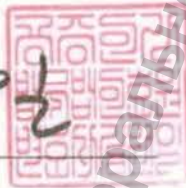

Kim Won-ik



공증인 공증담당변호사

Signature of the Notary Public

Kim Won-ik

본 사무소는 인가번호 제15150호에 의거하여  
2020년 02월 07일 법무부 장관으로부터  
공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.

This office has been authorized by the  
Minister of Justice, the Republic of  
Korea, to act as Notary Public Since  
7, Feb. 2020 Under Law No.15150.

[Перевод с английского и корейского языков на русский язык]

1 этаж, 540 Донсуwon-ро,  
Ёнтон-гу, Суwon-си  
[Форма № 41]

**ЮРИДИЧЕСКАЯ И НОТАРИАЛЬНАЯ  
КОМПАНИЯ «ХЁВОН»**

Тел.: (031) 214-7733  
Факс: (031) 214-7732

Регистрационный номер: 2025 - 106

[Печать: Юридическая и нотариальная компания «ХЁВОН», нотариус Ким Вон Иль]

## НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ЮРИДИЧЕСКАЯ И НОТАРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ХЁВОН»  
(HYOWON LAW FIRM AND NOTARY OFFICE)

540 Донсуwon-ро, Суwon-си, Кёнги-до, КОРЕЯ  
(540 Dongsuwon-ro, Suwon-si, Gyeonggi-do, KOREA)

[Тисненая печать: ЮРИДИЧЕСКАЯ И НОТАРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ХЁВОН»]

20.12.2024 г.

«Утверждено»

*/подпись/ (подпись)*

Ким Дуг Су (Kim Dug Soo)

Генеральный директор

[Печать компании «ДэсиЭнАй Ко., Лтд.»]

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**Брекеты ортодонтические GNI в наборах**

[Печать: Юридическая и нотариальная компания «ХЕВОН», нотариус Ким Вон Иль]

Версия 2

[Текст документа на русском языке]

[Текст документа на корейском и английском языках идентичен]

Регистрационный номер: 2025 - 106

## НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Со Донгон (Seo Donghoon),  
поверенный КИМ ДУГ СУ, генерального директора  
«ДжиЭнАй Ко., Лтд.»,  
лично явившийся ко мне, признал указанную  
подпись доверителя на прилагаемом документе.

Настоящим засвидетельствовано 13 января 2025 г. в указанной нотариальной конторе.

Наименование нотариальной конторы  
**ЮРИДИЧЕСКАЯ И НОТАРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ХЁВОН»**  
Относится к Прокуратуре округа Сувон  
Адрес конторы:  
540 Донсувон-ро, Сувон-си, Кёнги-до, КОРЕЯ

[Печать: Юридическая и нотариальная компания «ХЁВОН», нотариус Ким Вон Иль]  
[Печать: Юридическая и нотариальная компания «ХЁВОН», нотариус Ким Вон Иль]

/подпись/

Подпись нотариуса  
**Ким Вон Иль (Kim Won Il)**

Настоящая нотариальная контора уполномочена Министром юстиции Республики Корея  
предоставлять нотариальные услуги с 7 февраля 2020 г. в соответствии с законом  
№ 15150.

Перевод данного текста выполнен переводчиком Малоюшовой Анной Андреевной

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Двенадцатого февраля две тысячи двадцать пятого года

Я, Веремий Юлия Игоревна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Малоюшовой Анны Андреевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2194-п/77-2025-5-179

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

ПОДПИСЬ

Гербовая печать  
нотариуса г. Москвы  
Веремий Ю.И.

Гербовая печать  
нотариуса г. Москвы  
Веремий Ю.И.

Ю.И. Веремий

Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 82 лист(-а,-ов).

Нотариус:

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Двенадцатого февраля две тысячи двадцать пятого года

Я, Веремий Юлия Игоревна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2194-п/77-2025-5-180

Уплачено за совершение нотариального действия: 8300 руб. 00 коп.



Ю.И. Веремий

Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 82 лист(-а,-ов).

Нотариус:

