


Registered No. 2025 - 271

NOTARIAL CERTIFICATE


HYOWON LAW FIRM & NOTARY OFFICE
540, Dongsuwon-ro
Suwon-si, Gyeonggi-do, KOREA

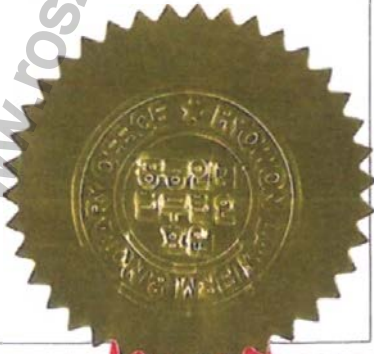

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru



20.12.2024
«Утверждено»


(подпись)
Ким Дуг Су (Kim Dug Soo)
Генеральный директор

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

Замок ортодонтический GNI в наборах



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.gov.ru

1. Наименование изделия

Замок ортодонтический GNI в наборах

I. Варианты исполнения:

1. Набор замков SBC-R18-1M41G состав: замок SBC-R18-161G (1 шт), замок SBC-R18-261G (1 шт), замок SBC-R18-361G (1 шт), замок SBC-R18-461G (1 шт);
2. Набор замков SBC-R22-1M41G состав: замок SBC-R22-161G (1 шт), замок SBC-R22-261G (1 шт), замок SBC-R22-361G (1 шт), замок SBC-R22-461G (1 шт);
3. Набор замков SBC-M18-1M41G состав: замок SBC-M18-161G (1 шт), замок SBC-M18-261G (1 шт), замок SBC-M18-361G (1 шт), замок SBC-M18-461G (1 шт);
4. Набор замков SBC-M22-1M41G состав: замок SBC-M22-161G (1 шт), замок SBC-M22-261G (1 шт), замок SBC-M22-361G (1 шт), замок SBC-M22-461G (1 шт);
5. Набор замков SBC-E18-1M41G состав: замок SBC-E18-161G (1 шт), замок SBC-E18-261G (1 шт), замок SBC-E18-361G (1 шт), замок SBC-E18-461G (1 шт);
6. Набор замков SBC-E22-1M41G состав: замок SBC-E22-161G (1 шт), замок SBC-E22-261G (1 шт), замок SBC-E22-361G (1 шт), замок SBC-E22-461G (1 шт);
7. Набор замков SBN-R18-1M41G состав: замок SBN-R18-161G (1 шт), замок SBN-R18-261G (1 шт), замок SBN-R18-361G (1 шт), замок SBN-R18-461G (1 шт);
8. Набор замков SBN-R22-1M41G состав: замок SBN-R22-161G (1 шт), замок SBN-R22-261G (1 шт), замок SBN-R22-361G (1 шт), замок SBN-R22-461G (1 шт);
9. Набор замков SBN-M18-1M41G состав: замок SBN-M18-161G (1 шт), замок SBN-M18-261G (1 шт), замок SBN-M18-361G (1 шт), замок SBN-M18-461G (1 шт);
10. Набор замков SBN-M22-1M41G состав: замок SBN-M22-161G (1 шт), замок SBN-M22-261G (1 шт), замок SBN-M22-361G (1 шт), замок SBN-M22-461G (1 шт);
11. Набор замков SBN-E18-1M41G состав: замок SBN-E18-161G (1 шт), замок SBN-E18-261G (1 шт), замок SBN-E18-361G (1 шт), замок SBN-E18-461G (1 шт);
12. Набор замков SBN-E22-1M41G состав: замок SBN-E22-161G (1 шт), замок SBN-E22-261G (1 шт), замок SBN-E22-361G (1 шт), замок SBN-E22-461G (1 шт);
13. Набор замков SBN-R18-1M44G состав: замок SBN-R18-164G (1 шт), замок SBN-R18-264G (1 шт), замок SBN-R18-364G (1 шт), замок SBN-R18-464G (1 шт);
14. Набор замков SBN-R22-1M44G состав: замок SBN-R22-164G (1 шт), замок SBN-R22-264G (1 шт), замок SBN-R22-364G (1 шт), замок SBN-R22-464G (1 шт);
15. Набор замков SBN-M18-1M44G состав: замок SBN-M18-164G (1 шт), замок SBN-M18-264G (1 шт), замок SBN-M18-364G (1 шт), замок SBN-M18-464G (1 шт);
16. Набор замков SBN-M22-1M44G состав: замок SBN-M22-164G (1 шт), замок SBN-M22-264G (1 шт), замок SBN-M22-364G (1 шт), замок SBN-M22-464G (1 шт);
17. Набор замков SBN-E18-1M44G состав: замок SBN-E18-164G (1 шт), замок SBN-E18-264G (1 шт), замок SBN-E18-364G (1 шт), замок SBN-E18-464G (1 шт);
18. Набор замков SBN-E22-1M44G состав: замок SBN-E22-164G (1 шт), замок SBN-E22-264G (1 шт), замок SBN-E22-364G (1 шт), замок SBN-E22-464G (1 шт);
19. Набор замков SBN-R18-2M41G состав: замок SBN-R18-171G (1 шт), замок SBN-R18-271G (1 шт), замок SBN-R18-371G (1 шт), замок SBN-R18-471G (1 шт);
20. Набор замков SBN-R22-2M41G состав: замок SBN-R22-171G (1 шт), замок SBN-R22-271G (1 шт), замок SBN-R22-371G (1 шт), замок SBN-R22-471G (1 шт);
21. Набор замков SBN-M18-2M41G состав: замок SBN-M18-171G (1 шт), замок SBN-M18-271G (1 шт), замок SBN-M18-371G (1 шт), замок SBN-M18-471G (1 шт);
22. Набор замков SBN-M22-2M41G состав: замок SBN-M22-171G (1 шт), замок SBN-M22-271G (1 шт), замок SBN-M22-371G (1 шт), замок SBN-M22-471G (1 шт);
23. Набор замков SBN-E18-2M41G состав: замок SBN-E18-171G (1 шт), замок SBN-E18-271G (1 шт), замок SBN-E18-371G (1 шт), замок SBN-E18-471G (1 шт);
24. Набор замков SBN-E22-2M41G состав: замок SBN-E22-171G (1 шт), замок SBN-E22-271G (1 шт), замок SBN-E22-371G (1 шт), замок SBN-E22-471G (1 шт);
25. Набор замков SBN-R18-2M44G состав: замок SBN-R18-174G (1 шт), замок SBN-R18-274G (1 шт), замок SBN-R18-374G (1 шт), замок SBN-R18-474G (1 шт);
26. Набор замков SBN-R22-2M44G состав: замок SBN-R22-174G (1 шт), замок SBN-R22-274G (1 шт), замок SBN-R22-374G (1 шт), замок SBN-R22-474G (1 шт);

27. Набор замков SBN-M18-2M44G состав: замок SBN-M18-174G (1 шт), замок SBN-M18-274G (1 шт), замок SBN-M18-374G (1 шт), замок SBN-M18-474G (1 шт);
28. Набор замков SBN-M22-2M44G состав: замок SBN-M22-174G (1 шт), замок SBN-M22-274G (1 шт), замок SBN-M22-374G (1 шт), замок SBN-M22-474G (1 шт);
29. Набор замков SBN-E18-2M44G состав: замок SBN-E18-174G (1 шт), замок SBN-E18-274G (1 шт), замок SBN-E18-374G (1 шт), замок SBN-E18-474G (1 шт);
30. Набор замков SBN-E22-2M44G состав: замок SBN-E22-174G (1 шт), замок SBN-E22-274G (1 шт), замок SBN-E22-374G (1 шт), замок SBN-E22-474G (1 шт);
31. Набор замков DCBC-R18-1M4 состав: замок DCBC-R18-16 (1 шт), замок DCBC-R18-26 (1 шт), замок SBC-R18-361G (1 шт), замок SBC-R18-461G (1 шт);
32. Набор замков DCBC-R22-1M4 состав: замок DCBC-R22-16 (1 шт), замок DCBC-R22-26 (1 шт), замок SBC-R22-361G (1 шт), замок SBC-R22-461G (1 шт);
33. Набор замков DCBC-M18-1M4 состав: замок DCBC-M18-16 (1 шт), замок DCBC-M18-26 (1 шт), замок SBC-M18-361G (1 шт), замок SBC-M18-461G (1 шт);
34. Набор замков DCBC-M22-1M4 состав: замок DCBC-M22-16 (1 шт), замок DCBC-M22-26 (1 шт), замок SBC-M22-361G (1 шт), замок SBC-M22-461G (1 шт);
35. Набор замков DCBN-R18-1M4 состав: замок DCBN-R18-16 (1 шт), замок DCBN-R18-26 (1 шт), замок SBN-R18-361G (1 шт), замок SBN-R18-461G (1 шт);
36. Набор замков DCBN-R22-1M4 состав: замок DCBN-R22-16 (1 шт), замок DCBN-R22-26 (1 шт), замок SBN-R22-361G (1 шт), замок SBN-R22-461G (1 шт);
37. Набор замков DCBN-M18-1M4 состав: замок DCBN-M18-16 (1 шт), замок DCBN-M18-26 (1 шт), замок SBN-M18-361G (1 шт), замок SBN-M18-461G (1 шт);
38. Набор замков DCBN-M22-1M4 состав: замок DCBN-M22-16 (1 шт), замок DCBN-M22-26 (1 шт), замок SBN-M22-361G (1 шт), замок SBN-M22-461G (1 шт);
39. Набор замков DRBC-R18-1M4 состав: замок DRBC-R18-16 (1 шт), замок DRBC-R18-26 (1 шт), замок DRBC-R18-36 (1 шт), замок DRBC-R18-46 (1 шт);
40. Набор замков DRBC-R22-1M4 состав: замок DRBC-R22-16 (1 шт), замок DRBC-R22-26 (1 шт), замок DRBC-R22-36 (1 шт), замок DRBC-R22-46 (1 шт);
41. Набор замков DRBC-M18-1M4 состав: замок DRBC-M18-16 (1 шт), замок DRBC-M18-26 (1 шт), замок DRBC-M18-36 (1 шт), замок DRBC-M18-46 (1 шт);
42. Набор замков DRBC-M22-1M4 состав: замок DRBC-M22-16 (1 шт), замок DRBC-M22-26 (1 шт), замок DRBC-M22-36 (1 шт), замок DRBC-M22-46 (1 шт);
43. Набор замков DRBN-R22-1M4 состав: замок DRBN-R22-16 (1 шт), замок DRBN-R22-26 (1 шт), замок DRBN-R22-36 (1 шт), DRBN-R22-46 (1 шт);
44. Набор замков DRBN-M22-1M4 состав: замок DRBN-M22-16 (1 шт), замок DRBN-M22-26 (1 шт), DRBN-M22-36 (1 шт), DRBN-M22-46 (1 шт);
45. Набор замков TBC-R18-1M4 состав: замок TBC-R18-16 (1 шт), замок TBC-R18-26 (1 шт), замок DRBC-R18-36 (1 шт), замок DRBC-R18-46 (1 шт);
46. Набор замков TBC-R22-1M4 состав: замок TBC-R22-16 (1 шт), замок TBC-R22-26 (1 шт), замок DRBC-R22-36 (1 шт), замок DRBC-R22-46 (1 шт);
47. Набор замков TBC-M18-1M4 состав: замок TBC-M18-16 (1 шт), замок TBC-M18-26 (1 шт), замок DRBC-M18-36 (1 шт), замок DRBC-M18-46 (1 шт);
48. Набор замков TBC-M22-1M4 состав: замок TBC-M22-16 (1 шт), замок TBC-M22-26 (1 шт), замок DRBC-M22-36 (1 шт), замок DRBC-M22-46 (1 шт);
49. Набор замков TBN-R18-1M4 состав: замок TBN-R18-16 (1 шт), замок TBN-R18-26 (1 шт), замок DRBC-R18-36 (1 шт), замок DRBC-R18-46 (1 шт);
50. Набор замков TBN-R22-1M4 состав: замок TBN-R22-16 (1 шт), замок TBN-R22-26 (1 шт), замок DRBN-R22-36 (1 шт), замок DRBN-R22-46 (1 шт);
51. Набор замков TBN-M18-1M4 состав: замок TBN-M18-16 (1 шт), замок TBN-M18-26 (1 шт), замок DRBC-M18-36 (1 шт), замок DRBC-M18-46 (1 шт);
52. Набор замков TBN-M22-1M4 состав: замок TBN-M22-16 (1 шт), замок TBN-M22-26 (1 шт), замок DRBN-M22-36 (1 шт), замок DRBN-M22-46 (1 шт);
53. Набор замков SBC-R18-1M41GX состав: замок SBC-R18-161G (10 шт), замок SBC-R18-261G (10 шт), замок SBC-R18-361G (10 шт), замок SBC-R18-461G (10 шт);
54. Набор замков SBC-R22-1M41GX состав: замок SBC-R22-161G (10 шт), замок SBC-R22-261G (10 шт), замок SBC-R22-361G (10 шт), замок SBC-R22-461G (10 шт);
55. Набор замков SBC-M18-1M41GX состав: замок SBC-M18-161G (10 шт), замок SBC-M18-261G (10 шт), замок SBC-M18-361G (10 шт), замок SBC-M18-461G (10 шт);

85. Набор замков DCBC-M18-1M4X состав: замок DCBC-M18-16 (10 шт), замок DCBC-M18-26 (10 шт), замок SBC-M18-361G (10 шт), замок SBC-M18-461G (10 шт);
86. Набор замков DCBC-M22-1M4X состав: замок DCBC-M22-16 (10 шт), замок DCBC-M22-26 (10 шт), замок SBC-M22-361G (10 шт), замок SBC-M22-461G (10 шт);
87. Набор замков DCBN-R18-1M4X состав: замок DCBN-R18-16 (10 шт), замок DCBN-R18-26 (10 шт), замок SBN-R18-361G (10 шт), замок SBN-R18-461G (10 шт);
88. Набор замков DCBN-R22-1M4X состав: замок DCBN-R22-16 (10 шт), замок DCBN-R22-26 (10 шт), замок SBC-R22-361G (10 шт), замок SBC-R22-461G (10 шт);
89. Набор замков DCBN-M18-1M4X состав: замок DCBN-M18-16 (10 шт), замок DCBN-M18-26 (10 шт), замок SBN-M18-361G (10 шт), замок SBN-M18-461G (10 шт);
90. Набор замков DCBN-M22-1M4X состав: замок DCBN-M22-16 (10 шт), замок DCBN-M22-26 (10 шт), замок SBN-M22-361G (10 шт), замок SBN-M22-461G (10 шт);
91. Набор замков DRBC-R18-1M4X состав: замок DRBC-R18-16 (10 шт), замок DRBC-R18-26 (10 шт), замок DRBC-R18-36 (10 шт), замок DRBC-R18-46 (10 шт);
92. Набор замков DRBC-R22-1M4X состав: замок DRBC-R22-16 (10 шт), замок DRBC-R22-26 (10 шт), замок DRBC-R22-36 (10 шт), замок DRBC-R22-46 (10 шт);
93. Набор замков DRBC-M18-1M4X состав: замок DRBC-M18-16 (10 шт), замок DRBC-M18-26 (10 шт), замок DRBC-M18-36 (10 шт), замок DRBC-M18-46 (10 шт);
94. Набор замков DRBC-M22-1M4X состав: замок DRBC-M22-16 (10 шт), замок DRBC-M22-26 (10 шт), замок DRBC-M22-36 (10 шт), замок DRBC-M22-46 (10 шт);
95. Набор замков DRBN-R22-1M4X состав: замок DRBN-R22-16 (10 шт), замок DRBN-R22-26 (10 шт), замок DRBN-R22-36 (10 шт), замок DRBN-R22-46 (10 шт);
96. Набор замков DRBN-M22-1M4X состав: замок DRBN-M22-16 (10 шт), замок DRBN-M22-26 (10 шт), замок DRBN-M22-36 (10 шт), замок DRBN-M22-46 (10 шт);
97. Набор замков TBC-R18-1M4X состав: замок TBC-R18-16 (10 шт), замок TBC-R18-26 (10 шт), замок DRBC-R18-36 (10 шт), замок DRBC-R18-46 (10 шт);
98. Набор замков TBC-R22-1M4X состав: замок TBC-R22-16 (10 шт), замок TBC-R22-26 (10 шт), замок DRBC-R22-36 (10 шт), замок DRBC-R22-46 (10 шт);
99. Набор замков TBC-M18-1M4X состав: замок TBC-M18-16 (10 шт), замок TBC-M18-26 (10 шт), замок DRBC-M18-36 (10 шт), замок DRBC-M18-46 (10 шт);
100. Набор замков TBC-M22-1M4X состав: замок TBC-M22-16 (10 шт), замок TBC-M22-26 (10 шт), замок DRBC-M22-36 (10 шт), замок DRBC-M22-46 (10 шт);
101. Набор замков TBN-R18-1M4X состав: замок TBN-R18-16 (10 шт), замок TBN-R18-26 (10 шт), замок DRBC-R18-36 (10 шт), замок DRBC-R18-46 (10 шт);
102. Набор замков TBN-R22-1M4X состав: замок TBN-R22-16 (10 шт), замок TBN-R22-26 (10 шт), замок DRBN-R22-36 (10 шт), замок DRBN-R22-46 (10 шт);
103. Набор замков TBN-M18-1M4X состав: замок TBN-M18-16 (10 шт), замок TBN-M18-26 (10 шт), замок DRBC-M18-36 (10 шт), замок DRBC-M18-46 (10 шт);
104. Набор замков TBN-M22-1M4X состав: замок TBN-M22-16 (10 шт), замок TBN-M22-26 (10 шт), замок DRBN-M22-36 (10 шт), замок DRBN-M22-46 (10 шт).

II. Инструкция по применению - на бумажном носителе (1 экземпляр на транспортную упаковку) и в электронном виде.

Далее по тексту – изделия, медицинские изделия, брекеты, дуги, замки

2. Сведения о производителе, разработчике и уполномоченном представителе производителя

Производитель:

GNI Co., Ltd., 5F 501, 63-12, Dongtancheomdansaneop 1-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

Тел.: +82-505-600-8880

Факс: +82-505-333-8880

E-mail: info@gniortho.com

Веб-сайт: <http://www.gniortho.com>

Разработчик:

GNI Co., Ltd., 5F 501, 63-12, Dongtancheomdansaneop 1-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea
Тел.: +82-505-600-8880
Факс: +82-505-333-8880
E-mail: info@gniortho.com
Веб-сайт: http://www.gniortho.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВ ДЕНТАЛЬ»
127015, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Вятская, д. 35, стр. 4
Тел./факс: 8 (499) 652-77-10
E-mail: info@gl-dent.ru
Сайт: www.gl-dent.ru

3. Классификация

Класс риска 2a в соответствии с Директивой MDD/93/42/EEC+2007/47/EC.

Изделие долгосрочного контакта (более 30 сут.) контактирующее со слизистыми оболочками полости рта и зубной эмалью.

1. Назначение изделия

Набор медицинских изделий, предназначенных для воздействия на форму и функции зубочелюстной системы для ортодонтического лечения.

5. Потенциальный потребитель

Квалифицированные специалисты – стоматологи- ортодонты.

6. Показания, область применения, противопоказания и возможные побочные эффекты

Показания: Ортодонтическое лечение, необходимое для исправления прикуса и неправильного положения зубов.

Область применения: стоматология (ортодонтия).

Противопоказания к применению:

1. Не использовать в отношении пациентов с неконтролируемым диабетом, с системными заболеваниями или алкогольной зависимостью;
2. Не использовать в отношении пациентов с резорбцией костной ткани или корней зубов;
3. Не использовать в отношении пациентов с аллергией на металлы (компоненты сплавов);
4. Не использовать в отношении пациентов с активным пародонтальным заболеванием;
5. Не использовать в отношении пациентов с ненадлежащей гигиеной ротовой полости;

Возможные побочные эффекты: Дефекты речи, аллергические реакции на материалы, из которых изготовлено медицинское изделие, а также возникновение язв, инфекций и других заболеваний слизистой полости рта.

Меры предосторожности.**1. Предупреждение**

- 1.1 Изделие предназначено для использования только медицинскими специалистами и не должно использоваться для других целей, кроме указанных в целевом назначении.
- 1.2 Перед использованием необходимо подтвердить, что пациент не страдает аллергией на металлы (компоненты сплавов);
- 1.3 Не использовать изделие, если оно повреждено.

2. Общие меры предосторожности

- 2.1 Не применять избыточную силу при использовании.

- 2.2 Заменить отсоединившееся изделие и зафиксировать новое.
- 2.3 Утилизировать замененное изделие.
- 2.4 Всегда при использовании изделия соблюдать суждения и указания стоматолога.
- 2.5 Утилизировать изделие непосредственно после использования.
- 2.6 Обратиться к специалисту в случае возникновения реакции биологической совместимости после использования изделия.
- 2.7 Связаться с нашей компанией в случае возникновения вопросов относительно изделия.
- 2.8 Керамические брекеты не предназначены для установки на поверхность реставраций или поврежденную поверхность эмали.

3. Адаптация к изделиям у каждого пациента индивидуальна. Необходимо отслеживать состояние пациента на наличие таких явлений как дискомфорт, заболевание десен, кровоточивость десен, кариес, пятна/окрашивание зуба вокруг брекета, резорбция корня зуба, дегенерация нерва внутри зуба, анкилоз, травмы, оталгия, головные боли, рецидив ортодонтического заболевания, боль, изменения пульпы, гингивит, утрата костной ткани альвеолярного гребня, утрата прикрепленной опорной десны, декальцификация эмали, боль в жевательных мышцах, внутренняя дисфункция диска височно-нижнечелюстного сустава и дегенеративные заболевания височно-нижнечелюстного сустава. При необходимости врач должен корректировать ортодонтическое лечение.

. Описание, конструкция, порядок применения изделий

7.1. Описание

Набор замков, как часть системы для выравнивания зубов, предназначен для удерживания конца ортодонтической дуги, используемой для оказания давления на зубы. Замки приклеиваются основанием к молярам (зубы №№ 16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 47) (см. Рисунок 1).

Замок изготовлен в виде корпуса со сквозными пазами и крючком, предназначенным для установки дополнительных ортодонтических устройств (например, колец, цепочек, пружин). Замки поставляются с одинарными, двойными и тройными пазами прямоугольного и круглого сечения. Пазы замков имеют съемные верхние стенки для удобства замены ортодонтических дуг. Замки со съемной верхней стенкой снабжены крючками для фиксации ортодонтической дуги лигатурами. Замки с одинарным пазом, для удобства замены ортодонтических дуг, могут иметь вход в паз без расширения и с расширением.

Замки изготовлены из нержавеющей стали. Изделие, для улучшения силы сцепления при приклеивании к поверхности зуба, имеет припаянную к основанию металлическую сетку.

Брекеты имеют цветную навигационную маркировку, которая помогает определить номер зуба, для которого предназначено данное изделие. Маркировка выполнена в виде отметок чернилами на корпусе замка (см. Таблица 1). Замки имеют лазерную маркировку, нанесенную на основание.



Рисунок 1 - Расположение замков на зубах

Таблица 1 – Навигационная маркировка соответствия расположению и номерам зубов

Номер зуба	Цвет навигационной маркировки	Номер зуба	Цвет навигационной маркировки
Верхняя челюсть (№16, №17)	Желтый	Верхняя челюсть (№26, №27)	Красный
Нижняя челюсть (№46, №47)	Зеленый	Нижняя челюсть (№36, №37)	Черный

7.1.1. Набор замков SBC 1G

Замок SBC 1G имеет одинарный прямоугольный паз, съёмную стенку, крючки для фиксации лигатур, вход без расширения, крючок для установки дополнительных ортодонтических устройств.



Рисунок 2 - Замок SBC 1G

7.1.2. Набор замков SBN 1G

Замок SBN 1G имеет одинарный прямоугольный паз, вход без расширения, крючок для установки дополнительных ортодонтических устройств.



Рисунок 3 - Замок SBN 1G

7.1.3. Набор замков SBN 4G

Замок SBN 4G имеет одинарный прямоугольный паз, вход с расширением, крючок для установки дополнительных ортодонтических устройств.



Рисунок 4 - Замок SBN 4G

7.1.4. Набор замков DCBC

Замок DCBC имеет двойной круглый и прямоугольный паз, съёмную стенку, крючки для фиксации лигатур, вход без расширения, крючок для установки дополнительных ортодонтических устройств.



Рисунок 5 - Замок DCBC

7.1.5. Набор замков DCBN

Замок DCBN имеет двойной круглый и прямоугольный паз, вход без расширения, крючок для установки дополнительных ортодонтических устройств.



Рисунок 6 - Замок DCBN

7.1.6. Набор замков DRBC

Замок DRBC имеет двойной прямоугольный паз, съёмную стенку, крючки для фиксации лигатур, вход без расширения, крючок для установки дополнительных ортодонтических устройств.



Рисунок 7 – Замок DRBC

7.1.7. Набор замков DRBN

Замок DRBN имеет двойной прямоугольный паз, вход без расширения, крючок для установки дополнительных ортодонтических устройств.



Рисунок 8 – Замок DRBN

7.1.8. Набор замков ТВС

Замок ТВС имеет тройной паз – два прямоугольных и один круглый, съемную стенку, крючки для фиксации лигатур, вход без расширения, крючок для установки дополнительных ортодонтических устройств.



Рисунок 9 – Замок TBC

7.1.9. Набор замков TBN

Замок TBN имеет тройной паз – два прямоугольных и один круглый, вход без расширения, крючок для установки дополнительных ортодонтических устройств.



Рисунок 10 – Замок TBN

7.2. Порядок применения замков

1. Подготовка к использованию

1.1 Убедиться, что вид и характеристики замков идентичны тем, которые планируется использовать.

1.2 Произвести визуальный осмотр замков на наличие повреждений, трещин и инородных предметов. При наличии проблем с внешним видом не использовать изделие и обратиться к производителю и/или уполномоченному представителю производителя.

1.3 Произвести очистку и высушивание поверхностей зубов.

1.4 Коррекция зубов с использованием замков должна выполняться в соответствии теоретическими и практическими навыками специалиста.

2. Эксплуатация

2.1. Проверить контактные поверхности зубов и замков на отсутствие повреждений, трещин и инородных предметов. При наличии проблем с внешним видом изделия не использовать его и обратиться к производителю и/или уполномоченному представителю производителя.

2.2. Работать с замками с использованием универсальных инструментов, например, пинцетов обратного действия, щипцов и т.д.

Примечание: специальные требования к совместно применяемым инструментам отсутствуют. Инструменты должны быть зарегистрированы в установленном порядке на

территории Российской Федерации.

2.3. Выполнить подготовку места установки замков при помощи протравочного средства, затем нанести адгезив на контактные поверхности зубов и замков с использованием рекомендаций производителя протравочного средства и адгезива, затем установить замки.

Примечание: специальные требования к совместно применяемым протравочным средствам, адгезивам отсутствуют. Материалы должны быть зарегистрированы в установленном порядке на территории Российской Федерации.

2.4. После отверждения адгезива установить и зафиксировать дугу в пазах замков.

2.5. Соблюдать методику лечения и указания стоматолога в отношении коррекции зубов и хирургических процедур.

3. Рекомендации по фиксации замков

3.1. Замки GNI могут фиксироваться с использованием любого стандартного адгезива для брекетов. Следует отметить абсолютную необходимость соблюдения инструкций производителя соответствующего адгезива для фиксации брекетов при установке замков.

3.2. Необходимо соблюдать осторожность при очистке избытка адгезива таким образом, чтобы не нарушить конечное положение замка до полного отверждения адгезива.

3.3. Перед установкой ортодонтической дуги необходимо очистить щеткой зубы пациента и наклеенные замки, чтобы удалить цветную навигационную маркировку в виде чернил.

Примечание: специальные требования к совместно применяемым инструментам отсутствуют. Инструменты должны быть зарегистрированы в установленном порядке на территории Российской Федерации.

4. Метод снятия замков

4.1. Удалить излишки и подтеки адгезива вокруг основания замков.

Примечание: невыполнение удаления излишков и подтеков адгезива вокруг оснований замков, может привести к неполному снятию замков.

4.2. Установить щипцы в окклюзионно-гингивальное положение. Убедиться, что кромки рабочих частей щипцов симметрично расположены параллельно корпусу замка.

4.3. Аккуратно сжать рукоятки щипцов, пока замок не отсоединится. Если необходимо, то аккуратно раскачать замок для полного отделения брекета от эмали.

Примечание: необходимо соблюдать особую осторожность при снятии замков без ортодонтической дуги в пазах. Следует удерживать замок таким образом, чтобы отсоединенные части замка остались между кромками рабочих частей щипцов.

7.3. Размерные характеристики

Таблица 2 - Размерные характеристики замков

Наименование	Состав набора	Торк, °	Дистальное отклонение (смещение), °	Высота паза над основанием трубки, мм	Длина паза, мм	Высота паза, мм	Глубина паза, мм	Ангуляция, °	Номер зуба	Цвет навигационной маркировки
Набор замков SBC-R18-1M41G	Замок SBC-R18-161G (1 шт)	-14	31	1.2	4.12	0.67	0.51	0	16	Желтый
	Замок SBC-R18-261G (1 шт)	-14	10	0.4	4.12	0.67	0.51	0	26	Красный
	Замок SBC-R18-361G (1 шт)	-25	4	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-R18-461G (1 шт)	-25	4	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков SBC-R22-1M41G	Замок SBC-R22-161G (1 шт)	-14	10	0.4	4.12	0.67	0.51	0	16	Желтый
	Замок SBC-R22-261G (1 шт)	-14	10	0.4	4.12	0.67	0.51	0	26	Красный
	Замок SBC-R22-361G (1 шт)	-25	4	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-R22-461G (1 шт)	-25	4	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков SBC-M18-1M41G	Замок SBC-M18-161G (1 шт)	-14	10	0.4	4.12	0.67	0.51	0	16	Желтый
	Замок SBC-M18-261G (1 шт)	-14	10	0.4	4.12	0.67	0.51	0	26	Красный
	Замок SBC-M18-361G (1 шт)	-20	0	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-M18-461G (1 шт)	-20	0	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков SBC-M22-1M41G	Замок SBC-M22-161G (1 шт)	-15	25	1.1	4.12	0.67	0.51	0	16	Желтый
	Замок SBC-M22-261G (1 шт)	-14	10	0.4	4.12	0.67	0.51	0	26	Красный
	Замок SBC-M22-361G (1 шт)	-20	0	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-M22-461G (1 шт)	-20	0	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков SBC-E18-1M41G	Замок SBC-E18-161G (1 шт)	0	6	0.4	4.12	0.67	0.51	0	16	Желтый
	Замок SBC-E18-261G (1 шт)	0	6	0.4	4.12	0.67	0.51	0	26	Красный
	Замок SBC-E18-361G (1 шт)	0	6	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-E18-461G (1 шт)	0	6	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков SBC-E22-1M41G	Замок SBC-E22-161G (1 шт)	0	6	0.4	4.12	0.67	0.51	0	16	Желтый
	Замок SBC-E22-261G (1 шт)	0	6	0.4	4.12	0.67	0.51	0	26	Красный
	Замок SBC-E22-361G (1 шт)	0	6	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-E22-461G (1 шт)	0	6	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков SBN-R18-1M41G	Замок SBN-R18-161G (1 шт)	-14	10	0.4	4.14	0.69	0.53	0	16	Желтый
	Замок SBN-R18-261G (1 шт)	-14	10	0.4	4.14	0.69	0.53	0	26	Красный

	Замок SBN-R18-361G (1 шт)	-25	4	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-R18-461G (1 шт)	-25	4	0.4	4.14	0.69	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков SBN-R22-1M41G	Замок SBN-R22-161G (1 шт)	-15	20	1.1	4.14	0.69	0.53	0	16	Желтый
	Замок SBN-R22-261G (1 шт)	-15	35	1.1	4.14	0.69	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-R22-361G (1 шт)	-23	35	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-R22-461G (1 шт)	-21	35	0.4	4.14	0.69	0.53	1	46	Зеленый
	Замок SBN-M18-161G (1 шт)	-14	10	0.4	4.14	0.69	0.53	0	16	Желтый
Набор замков SBN-M18-1M41G	Замок SBN-M18-261G (1 шт)	-14	10	0.4	4.14	0.69	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-M18-361G (1 шт)	-20	0	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-M18-461G (1 шт)	-20	0	0.4	4.14	0.69	0.53	0	46	Зеленый
	Замок SBN-M22-161G (1 шт)	-14	10	0.4	4.14	0.69	0.53	0	16	Желтый
Набор замков SBN-M22-1M41G	Замок SBN-M22-261G (1 шт)	-14	10	0.4	4.14	0.69	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-M22-361G (1 шт)	-20	0	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-M22-461G (1 шт)	-20	0	0.4	4.14	0.69	0.53	0	46	Зеленый
	Замок SBN-E18-161G (1 шт)	-10	34	1.1	4.14	0.69	0.53	1	16	Желтый
Набор замков SBN-E18-1M41G	Замок SBN-E18-261G (1 шт)	-10	32	1	4.14	0.69	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-E18-361G (1 шт)	-17	37	1.1	4.14	0.5	0.8	0	36	Черный
	Замок SBN-E18-461G (1 шт)	-24	39	0.8	4.14	0.55	0.8	3	46	Зеленый
	Замок SBN-E22-161G (1 шт)	0	6	0.4	4.14	0.69	0.53	0	16	Желтый
Набор замков SBN-E22-1M41G	Замок SBN-E22-261G (1 шт)	0	6	0.4	4.14	0.69	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-E22-361G (1 шт)	0	6	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-E22-461G (1 шт)	0	6	0.4	4.14	0.69	0.53	0	46	Зеленый
	Замок SBN-R18-164G (1 шт)	-14	10	0.4	3.92	0.64	0.53	0	16	Желтый
Набор замков SBN-R18-1M44G	Замок SBN-R18-264G (1 шт)	-14	10	0.4	3.92	0.64	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-R18-364G (1 шт)	-25	4	0.4	3.92	0.64	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-R18-464G (1 шт)	-25	4	0.4	3.92	0.64	0.53	0	46	Зеленый
	Замок SBN-R22-164G (1 шт)	-16	18	1	3.92	0.64	1	0	16	Желтый
Набор замков SBN-R22-1M44G	Замок SBN-R22-264G (1 шт)	-14	10	0.4	3.92	0.64	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-R22-364G (1 шт)	-25	4	0.4	3.92	0.64	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-R22-464G (1 шт)	-25	4	0.4	3.92	0.64	0.53	0	46	Зеленый
	Замок SBN-M18-164G (1 шт)	-23	13	0.9	3.92	0.5	1	0	16	Желтый
Набор замков SBN-M18-1M44G	Замок SBN-M18-264G (1 шт)	-14	10	0.4	3.92	0.64	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-M18-364G (1 шт)	-20	0	0.4	3.92	0.64	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-M18-464G (1 шт)	-20	0	0.4	3.92	0.64	0.53	0	46	Зеленый
	Набор замков SBN-M22-1M44G	Замок, SBN-M22-164G (1 шт)	-14	10	0.4	3.92	0.64	0.53	0	16

	Замок SBN-M22-264G (1 шт)	-14	10	0.4	3.92	0.64	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-M22-364G (1 шт)	-20	0	0.4	3.92	0.64	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-M22-464G (1 шт)	-20	0	0.4	3.92	0.64	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков SBN-E18-1M44G	Замок SBN-E18-164G (1 шт)	0	6	0.4	3.92	0.64	0.53	0	16	Желтый
	Замок SBN-E18-264G (1 шт)	0	6	0.4	3.92	0.64	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-E18-364G (1 шт)	0	6	0.4	3.92	0.64	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-E18-464G (1 шт)	0	6	0.4	3.92	0.64	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков SBN-E22-1M44G	Замок SBN-E22-164G (1 шт)	2	26	0.7	3.92	0.6	0.9	1	16	Желтый
	Замок SBN-E22-264G (1 шт)	0	6	0.4	3.92	0.64	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-E22-364G (1 шт)	0	6	0.4	3.92	0.64	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-E22-464G (1 шт)	0	6	0.4	3.92	0.64	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков SBN-R18-2M41G	Замок SBN-R18-171G (1 шт)	-14	28	1.1	3.28	0.55	1	1	17	Желтый
	Замок SBN-R18-271G (1 шт)	-14	10	0.4	3.28	0.69	0.53	0	27	Красный
	Замок SBN-R18-371G (1 шт)	-25	4	0.4	3.28	0.69	0.53	0	37	Черный
	Замок SBN-R18-471G (1 шт)	-25	4	0.4	3.28	0.69	0.53	0	47	Зеленый
Набор замков SBN-R22-2M41G	Замок SBN-R22-171G (1 шт)	-14	10	0.4	3.28	0.69	0.53	0	17	Желтый
	Замок SBN-R22-271G (1 шт)	-14	10	0.4	3.28	0.69	0.53	0	27	Красный
	Замок SBN-R22-371G (1 шт)	-25	4	0.4	3.28	0.69	0.53	0	37	Черный
	Замок SBN-R22-471G (1 шт)	-25	4	0.4	3.28	0.69	0.53	0	47	Зеленый
Набор замков SBN-M18-2M41G	Замок SBN-M18-171G (1 шт)	-14	10	0.4	3.28	0.69	0.53	0	17	Желтый
	Замок SBN-M18-271G (1 шт)	-14	10	0.4	3.28	0.69	0.53	0	27	Красный
	Замок SBN-M18-371G (1 шт)	-10	0	0.4	3.28	0.69	0.53	0	37	Черный
	Замок SBN-M18-471G (1 шт)	-10	0	0.4	3.28	0.69	0.53	0	47	Зеленый
Набор замков SBN-M22-2M41G	Замок SBN-M22-171G (1 шт)	-15	26	1.1	3.28	0.69	0.8	1	17	Желтый
	Замок SBN-M22-271G (1 шт)	-14	10	0.4	3.28	0.69	0.53	0	27	Красный
	Замок SBN-M22-371G (1 шт)	-10	0	0.4	3.28	0.69	0.53	0	37	Черный
	Замок SBN-M22-471G (1 шт)	-10	0	0.4	3.28	0.69	0.53	0	47	Зеленый
Набор замков SBN-E18-2M41G	Замок SBN-E18-171G (1 шт)	2	37	1	3.28	0.55	1	0	17	Желтый
	Замок SBN-E18-271G (1 шт)	0	6	0.4	3.28	0.69	0.53	0	27	Красный
	Замок SBN-E18-371G (1 шт)	0	6	0.4	3.28	0.69	0.53	0	37	Черный
	Замок SBN-E18-471G (1 шт)	0	6	0.4	3.28	0.69	0.53	0	47	Зеленый
Набор замков SBN-E22-2M41G	Замок SBN-E22-171G (1 шт)	0	6	0.4	3.28	0.69	0.53	0	17	Желтый
	Замок SBN-E22-271G (1 шт)	0	6	0.4	3.28	0.69	0.53	0	27	Красный
	Замок SBN-E22-371G (1 шт)	0	6	0.4	3.28	0.69	0.53	0	37	Черный
	Замок SBN-E22-471G (1 шт)	0	6	0.4	3.28	0.69	0.53	0	47	Зеленый

Набор замков SBN-R18-2M44G	Замок SBN-R18-174G (1 шт)	-14	10	0.4	3.18	0.63	0.49	0	17	Желтый
	Замок SBN-R18-274G (1 шт)	-14	10	0.4	3.18	0.63	0.49	0	27	Красный
	Замок SBN-R18-374G (1 шт)	-25	4	0.4	3.18	0.63	0.49	0	37	Черный
	Замок SBN-R18-474G (1 шт)	-25	4	0.4	3.18	0.63	0.49	0	47	Зеленый
Набор замков SBN-R22-2M44G	Замок SBN-R22-174G (1 шт)	-15	22	0.33	3.18	0.63	1	2	17	Желтый
	Замок SBN-R22-274G (1 шт)	-14	10	0.4	3.18	0.63	0.49	0	27	Красный
	Замок SBN-R22-374G (1 шт)	-25	4	0.4	3.18	0.63	0.49	0	37	Черный
	Замок SBN-R22-474G (1 шт)	-25	4	0.4	3.18	0.63	0.49	0	47	Зеленый
Набор замков SBN-M18-2M44G	Замок SBN-M18-174G (1 шт)	-18	30	1	3.18	0.63	0.8	1	17	Желтый
	Замок SBN-M18-274G (1 шт)	-14	10	0.4	3.18	0.63	0.49	0	27	Красный
	Замок SBN-M18-374G (1 шт)	-10	0	0.4	3.18	0.63	0.49	0	37	Черный
	Замок SBN-M18-474G (1 шт)	-10	0	0.4	3.18	0.63	0.49	0	47	Зеленый
Набор замков SBN-M22-2M44G	Замок SBN-M22-174G (1 шт)	-14	10	0.4	3.18	0.63	0.49	0	17	Желтый
	Замок SBN-M22-274G (1 шт)	-14	10	0.4	3.18	0.63	0.49	0	27	Красный
	Замок SBN-M22-374G (1 шт)	-10	0	0.4	3.18	0.63	0.49	0	37	Черный
	Замок SBN-M22-474G (1 шт)	-10	0	0.4	3.18	0.63	0.49	0	47	Зеленый
Набор замков SBN-E18-2M44G	Замок SBN-E18-174G (1 шт)	0	6	0.4	3.18	0.63	0.49	0	17	Желтый
	Замок SBN-E18-274G (1 шт)	0	6	0.4	3.18	0.63	0.49	0	27	Красный
	Замок SBN-E18-374G (1 шт)	0	6	0.4	3.18	0.63	0.49	0	37	Черный
	Замок SBN-E18-474G (1 шт)	0	6	0.4	3.18	0.63	0.49	0	47	Зеленый
Набор замков SBN-E22-2M44G	Замок SBN-E22-174G (1 шт)	2	10	0.4	3.18	0.63	1	3	17	Желтый
	Замок SBN-E22-274G (1 шт)	0	6	0.4	3.18	0.63	0.49	0	27	Красный
	Замок SBN-E22-374G (1 шт)	0	6	0.4	3.18	0.63	0.49	0	37	Черный
	Замок SBN-E22-474G (1 шт)	0	6	0.4	3.18	0.63	0.49	0	47	Зеленый
Набор замков DCBC-R18-1M4	Замок DCBC-R18-16 (1 шт)	-19	14	1.3	4.0	0.55	0.8	0	16	Желтый
	Замок DCBC-R18-26 (1 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	26	Красный
	Замок SBC-R18-361G (1 шт)	-25	4	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-R18-461G (1 шт)	-25	4	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков DCBC-R22-1M4	Замок DCBC-R22-16 (1 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	16	Желтый
	Замок DCBC-R22-26 (1 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	26	Красный
	Замок SBC-R22-361G (1 шт)	-25	4	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-R22-461G (1 шт)	-25	4	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков DCBC-M18-1M4	Замок DCBC-M18-16 (1 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	16	Желтый
	Замок DCBC-M18-26 (1 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	26	Красный
	Замок SBC-M18-361G (1 шт)	-20	0	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-M18-461G (1 шт)	-20	0	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый

Набор замков DCBC-M22-1M4	Замок DCBC-M22-16 (1 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	16	Желтый
	Замок DCBC-M22-26 (1 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	26	Красный
	Замок SBC-M22-361G (1 шт)	-20	0	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-M22-461G (1 шт)	-20	0	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков DCBN-R18-1M4	Замок DCBN-R18-16 (1 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	16	Желтый
	Замок DCBN-R18-26 (1 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	26	Красный
	Замок SBN-R18-361G (1 шт)	-25	4	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-R18-461G (1 шт)	-25	4	0.4	4.14	0.69	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков DCBN-R22-1M4	Замок DCBN-R22-16 (1 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	16	Желтый
	Замок DCBN-R22-26 (1 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	26	Красный
	Замок SBN-R22-361G (1 шт)	-23	35	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-R22-461G (1 шт)	-21	35	0.4	4.14	0.69	0.53	1	46	Зеленый
Набор замков DCBN-M18-1M4	Замок DCBN-M18-16 (1 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	16	Желтый
	Замок DCBN-M18-26 (1 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	26	Красный
	Замок SBN-M18-361G (1 шт)	-20	0	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-M18-461G (1 шт)	-20	0	0.4	4.14	0.69	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков DCBN-M22-1M4	Замок DCBN-M22-16 (1 шт)	-18	11	1.4	4.0	0.6	1	0	16	Желтый
	Замок DCBN-M22-26 (1 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	26	Красный
	Замок SBN-M22-361G (1 шт)	-20	0	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-M22-461G (1 шт)	-20	0	0.4	4.14	0.69	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков DRBC-R18-1M4	Замок DRBC-R18-16 (1 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	16	Желтый
	Замок DRBC-R18-26 (1 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	26	Красный
	Замок DRBC-R18-36 (1 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-R18-46 (1 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков DRBC-R22-1M4	Замок DRBC-R22-16 (1 шт)	-14	7	1.2	4.05	0.55	0.65	5	16	Желтый
	Замок DRBC-R22-26 (1 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	26	Красный
	Замок DRBC-R22-36 (1 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-R22-46 (1 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков DRBC-M18-1M4	Замок DRBC-M18-16 (1 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	16	Желтый
	Замок DRBC-M18-26 (1 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	26	Красный
	Замок DRBC-M18-36 (1 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-M18-46 (1 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков DRBC-M22-1M4	Замок DRBC-M22-16 (1 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	16	Желтый
	Замок DRBC-M22-26 (1 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	26	Красный
	Замок DRBC-M22-36 (1 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный

	Замок DRBC-M22-46 (1 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков DRBN-R22-1M4	Замок DRBN-R22-16 (1 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	16	Желтый
	Замок DRBN-R22-26 (1 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	26	Красный
	Замок DRBN-R22-36 (1 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBN-R22-46 (1 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков DRBN-M22-1M4	Замок DRBN-M22-16 (1 шт)	-14	20	1.2	4.05	0.6	1.1	2	16	Желтый
	Замок DRBN-M22-26 (1 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	26	Красный
	Замок DRBN-M22-36 (1 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBN-M22-46 (1 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков TBC-R18-1M4	Замок TBC-R18-16 (1 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	16	Желтый
	Замок TBC-R18-26 (1 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	26	Красный
	Замок DRBC-R18-36 (1 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-R18-46 (1 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков TBC-R22-1M4	Замок TBC-R22-16 (1 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	16	Желтый
	Замок TBC-R22-26 (1 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	26	Красный
	Замок DRBC-R22-36 (1 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-R22-46 (1 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков TBC-M18-1M4	Замок TBC-M18-16 (1 шт)	-16	25	1.5	4	0.85	0.9	0	16	Желтый
	Замок TBC-M18-26 (1 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	26	Красный
	Замок DRBC-M18-36 (1 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-M18-46 (1 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков TBC-M22-1M4	Замок TBC-M22-16 (1 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	16	Желтый
	Замок TBC-M22-26 (1 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	26	Красный
	Замок DRBC-M22-36 (1 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-M22-46 (1 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков TBN-R18-1M4	Замок TBN-R18-16 (1 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	16	Желтый
	Замок TBN-R18-26 (1 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	26	Красный
	Замок DRBC-R18-36 (1 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-R18-46 (1 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков TBN-R22-1M4	Замок TBN-R22-16 (1 шт)	-13	17	1.5	3.70	0.85	1	3	16	Желтый
	Замок TBN-R22-26 (1 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	26	Красный
	Замок DRBN-R22-36 (1 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBN-R22-46 (1 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков TBN-M18-1M4	Замок TBN-M18-16 (1 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	16	Желтый
	Замок TBN-M18-26 (1 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	26	Красный

	Замок DRBC-M18-36 (1 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-M18-46 (1 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков TBN-M22-1M4	Замок TBN-M22-16 (1 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	16	Желтый
	Замок TBN-M22-26 (1 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	26	Красный
	Замок DRBN-M22-36 (1 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBN-M22-46 (1 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков SBC-R18-1M41GX	Замок SBC-R18-161G (10 шт)	-14	31	1.2	4.12	0.67	0.51	0	16	Желтый
	Замок SBC-R18-261G (10 шт)	-14	10	0.4	4.12	0.67	0.51	0	26	Красный
	Замок SBC-R18-361G (10 шт)	-25	4	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-R18-461G (10 шт)	-25	4	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков SBC-R22-1M41GX	Замок SBC-R22-161G (10 шт)	-14	10	0.4	4.12	0.67	0.51	0	16	Желтый
	Замок SBC-R22-261G (10 шт)	-14	10	0.4	4.12	0.67	0.51	0	26	Красный
	Замок SBC-R22-361G (10 шт)	-25	4	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-R22-461G (10 шт)	-25	4	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков SBC-M18-1M41GX	Замок SBC-M18-161G (10 шт)	-14	10	0.4	4.12	0.67	0.51	0	16	Желтый
	Замок SBC-M18-261G (10 шт)	-14	10	0.4	4.12	0.67	0.51	0	26	Красный
	Замок SBC-M18-361G (10 шт)	-20	0	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-M18-461G (10 шт)	-20	0	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков SBC-M22-1M41GX	Замок SBC-M22-161G (10 шт)	-15	25	1.1	4.12	0.67	0.51	0	16	Желтый
	Замок SBC-M22-261G (10 шт)	-14	10	0.4	4.12	0.67	0.51	0	26	Красный
	Замок SBC-M22-361G (10 шт)	-20	0	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-M22-461G (10 шт)	-20	0	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков SBC-E18-1M41GX	Замок SBC-E18-161G (10 шт)	0	6	0.4	4.12	0.67	0.51	0	16	Желтый
	Замок SBC-E18-261G (10 шт)	0	6	0.4	4.12	0.67	0.51	0	26	Красный

	Замок SBC-E18-361G (10 шт)	0	6	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-E18-461G (10 шт)	0	6	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков SBC-E22-1M41GX	Замок SBC-E22-161G (10 шт)	0	6	0.4	4.12	0.67	0.51	0	16	Желтый
	Замок SBC-E22-261G (10 шт)	0	6	0.4	4.12	0.67	0.51	0	26	Красный
	Замок SBC-E22-361G (10 шт)	0	6	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-E22-461G (10 шт)	0	6	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
	Замок SBC-E22-461G (10 шт)	0	6	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков SBN-R18-1M41GX	Замок SBN-R18-161G (10 шт)	-14	10	0.4	4.14	0.69	0.53	0	16	Желтый
	Замок SBN-R18-261G (10 шт)	-14	10	0.4	4.14	0.69	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-R18-361G (10 шт)	-25	4	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-R18-461G (10 шт)	-25	4	0.4	4.14	0.69	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков SBN-R22-1M41GX	Замок SBN-R22-161G (10 шт)	-15	20	1.1	4.14	0.69	0.53	0	16	Желтый
	Замок SBN-R22-261G (10 шт)	-15	35	1.1	4.14	0.69	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-R22-361G (10 шт)	-23	35	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-R22-461G (10 шт)	-21	35	0.4	4.14	0.69	0.53	1	46	Зеленый
Набор замков SBN-M18-1M41GX	Замок SBN-M18-161G (10 шт)	-14	10	0.4	4.14	0.69	0.53	0	16	Желтый
	Замок SBN-M18-261G (10 шт)	-14	10	0.4	4.14	0.69	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-M18-361G (10 шт)	-20	0	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-M18-461G (10 шт)	-20	0	0.4	4.14	0.69	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков SBN-M22-1M41GX	Замок SBN-M22-161G (10 шт)	-14	10	0.4	4.14	0.69	0.53	0	16	Желтый
	Замок SBN-M22-261G (10 шт)	-14	10	0.4	4.14	0.69	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-M22-361G (10 шт)	-20	0	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-M22-461G (10 шт)	-20	0	0.4	4.14	0.69	0.53	0	46	Зеленый

Набор замков SBN-E18-1M41GX	Замок SBN-E18-161G (10 шт)	-10	34	1.1	4.14	0.69	0.53	1	16	Желтый
	Замок SBN-E18-261G (10 шт)	-10	32	1	4.14	0.69	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-E18-361G (10 шт)	-17	37	1.1	4.14	0.5	0.8	0	36	Черный
	Замок SBN-E18-461G (10 шт)	-24	39	0.8	4.14	0.55	0.8	3	46	Зеленый
Набор замков SBN-E22-1M41GX	Замок SBN-E22-161G (10 шт)	0	6	0.4	4.14	0.69	0.53	0	16	Желтый
	Замок SBN-E22-261G (10 шт)	0	6	0.4	4.14	0.69	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-E22-361G (10 шт)	0	6	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-E22-461G (10 шт)	0	6	0.4	4.14	0.69	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков SBN-R18-1M44GX	Замок SBN-R18-164G (10 шт)	-14	10	0.4	3.92	0.64	0.53	0	16	Желтый
	Замок SBN-R18-264G (10 шт)	-14	10	0.4	3.92	0.64	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-R18-364G (10 шт)	-25	4	0.4	3.92	0.64	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-R18-464G (10 шт)	-25	4	0.4	3.92	0.64	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков SBN-R22-1M44GX	Замок SBN-R22-164G (10 шт)	-16	18	1	3.92	0.64	1	0	16	Желтый
	Замок SBN-R22-264G (10 шт)	-14	10	0.4	3.92	0.64	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-R22-364G (10 шт)	-25	4	0.4	3.92	0.64	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-R22-464G (10 шт)	-25	4	0.4	3.92	0.64	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков SBN-M18-1M44GX	Замок SBN-M18-164G (10 шт)	-23	13	0.9	3.92	0.5	1	0	16	Желтый
	Замок SBN-M18-264G (10 шт)	-14	10	0.4	3.92	0.64	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-M18-364G (10 шт)	-20	0	0.4	3.92	0.64	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-M18-464G (10 шт)	-20	0	0.4	3.92	0.64	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков SBN-M22-1M44GX	Замок, SBN-M22-164G (10 шт)	-14	10	0.4	3.92	0.64	0.53	0	16	Желтый

	Замок SBN-M22-264G (10 шт)	-14	10	0.4	3.92	0.64	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-M22-364G (10 шт)	-20	0	0.4	3.92	0.64	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-M22-464G (10 шт)	-20	0	0.4	3.92	0.64	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков SBN-E18-1M44GX	Замок SBN-E18-164G (10 шт)	0	6	0.4	3.92	0.64	0.53	0	16	Желтый
	Замок SBN-E18-264G (10 шт)	0	6	0.4	3.92	0.64	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-E18-364G (10 шт)	0	6	0.4	3.92	0.64	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-E18-464G (10 шт)	0	6	0.4	3.92	0.64	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков SBN-E22-1M44GX	Замок SBN-E22-164G (10 шт)	2	26	0.7	3.92	0.6	0.9	1	16	Желтый
	Замок SBN-E22-264G (10 шт)	0	6	0.4	3.92	0.64	0.53	0	26	Красный
	Замок SBN-E22-364G (10 шт)	0	6	0.4	3.92	0.64	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-E22-464G (10 шт)	0	6	0.4	3.92	0.64	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков SBN-R18-2M41GX	Замок SBN-R18-171G (10 шт)	-14	28	1.1	3.28	0.55	1	1	17	Желтый
	Замок SBN-R18-271G (10 шт)	-14	10	0.4	3.28	0.69	0.53	0	27	Красный
	Замок SBN-R18-371G (10 шт)	-25	4	0.4	3.28	0.69	0.53	0	37	Черный
	Замок SBN-R18-471G (10 шт)	-25	4	0.4	3.28	0.69	0.53	0	47	Зеленый
Набор замков SBN-R22-2M41GX	Замок SBN-R22-171G (10 шт)	-14	10	0.4	3.28	0.69	0.53	0	17	Желтый
	Замок SBN-R22-271G (10 шт)	-14	10	0.4	3.28	0.69	0.53	0	27	Красный
	Замок SBN-R22-371G (10 шт)	-25	4	0.4	3.28	0.69	0.53	0	37	Черный
	Замок SBN-R22-471G (10 шт)	-25	4	0.4	3.28	0.69	0.53	0	47	Зеленый
Набор замков SBN-M18-2M41GX	Замок SBN-M18-171G (10 шт)	-14	10	0.4	3.28	0.69	0.53	0	17	Желтый
	Замок SBN-M18-271G (10 шт)	-14	10	0.4	3.28	0.69	0.53	0	27	Красный
	Замок SBN-M18-371G (10 шт)	-10	0	0.4	3.28	0.69	0.53	0	37	Черный

	шт)									
	Замок SBN-M18-471G (10 шт)	-10	0	0.4	3.28	0.69	0.53	0	47	Зеленый
Набор замков SBN-M22-2M41GX	Замок SBN-M22-171G (10 шт)	-15	26	1.1	3.28	0.69	0.8	1	17	Желтый
	Замок SBN-M22-271G (10 шт)	-14	10	0.4	3.28	0.69	0.53	0	27	Красный
	Замок SBN-M22-371G (10 шт)	-10	0	0.4	3.28	0.69	0.53	0	37	Черный
	Замок SBN-M22-471G (10 шт)	-10	0	0.4	3.28	0.69	0.53	0	47	Зеленый
	Замок SBN-E18-171G (10 шт)	2	37	1	3.28	0.55	1	0	17	Желтый
Набор замков SBN-E18-2M41GX	Замок SBN-E18-271G (10 шт)	0	6	0.4	3.28	0.69	0.53	0	27	Красный
	Замок SBN-E18-371G (10 шт)	0	6	0.4	3.28	0.69	0.53	0	37	Черный
	Замок SBN-E18-471G (10 шт)	0	6	0.4	3.28	0.69	0.53	0	47	Зеленый
	Замок SBN-E22-171G (10 шт)	0	6	0.4	3.28	0.69	0.53	0	17	Желтый
Набор замков SBN-E22-2M41GX	Замок SBN-E22-271G (10 шт)	0	6	0.4	3.28	0.69	0.53	0	27	Красный
	Замок SBN-E22-371G (10 шт)	0	6	0.4	3.28	0.69	0.53	0	37	Черный
	Замок SBN-E22-471G (10 шт)	0	6	0.4	3.28	0.69	0.53	0	47	Зеленый
	Замок SBN-R18-174G (10 шт)	-14	10	0.4	3.18	0.63	0.49	0	17	Желтый
Набор замков SBN-R18-2M44GX	Замок SBN-R18-274G (10 шт)	-14	10	0.4	3.18	0.63	0.49	0	27	Красный
	Замок SBN-R18-374G (10 шт)	-25	4	0.4	3.18	0.63	0.49	0	37	Черный
	Замок SBN-R18-474G (10 шт)	-25	4	0.4	3.18	0.63	0.49	0	47	Зеленый
	Замок SBN-R22-174G (10 шт)	-15	22	0.33	3.18	0.63	1	2	17	Желтый
Набор замков SBN-R22-2M44GX	Замок SBN-R22-274G (10 шт)	-14	10	0.4	3.18	0.63	0.49	0	27	Красный
	Замок SBN-R22-374G (10 шт)	-25	4	0.4	3.18	0.63	0.49	0	37	Черный
	Замок SBN-R22-474G (10 шт)	-25	4	0.4	3.18	0.63	0.49	0	47	Зеленый

Набор замков SBN-M18-2M44GX	Замок SBN-M18-174G (10 шт)	-18	30	1	3.18	0.63	0.8	1	17	Желтый
	Замок SBN-M18-274G (10 шт)	-14	10	0.4	3.18	0.63	0.49	0	27	Красный
	Замок SBN-M18-374G (10 шт)	-10	0	0.4	3.18	0.63	0.49	0	37	Черный
	Замок SBN-M18-474G (10 шт)	-10	0	0.4	3.18	0.63	0.49	0	47	Зеленый
Набор замков SBN-M22-2M44GX	Замок SBN-M22-174G (10 шт)	-14	10	0.4	3.18	0.63	0.49	0	17	Желтый
	Замок SBN-M22-274G (10 шт)	-14	10	0.4	3.18	0.63	0.49	0	27	Красный
	Замок SBN-M22-374G (10 шт)	-10	0	0.4	3.18	0.63	0.49	0	37	Черный
	Замок SBN-M22-474G (10 шт)	-10	0	0.4	3.18	0.63	0.49	0	47	Зеленый
Набор замков SBN-E18-2M44GX	Замок SBN-E18-174G (10 шт)	0	6	0.4	3.18	0.63	0.49	0	17	Желтый
	Замок SBN-E18-274G (10 шт)	0	6	0.4	3.18	0.63	0.49	0	27	Красный
	Замок SBN-E18-374G (10 шт)	0	6	0.4	3.18	0.63	0.49	0	37	Черный
	Замок SBN-E18-474G (10 шт)	0	6	0.4	3.18	0.63	0.49	0	47	Зеленый
Набор замков SBN-E22-2M44GX	Замок SBN-E22-174G (10 шт)	2	10	0.4	3.18	0.63	1	3	17	Желтый
	Замок SBN-E22-274G (10 шт)	0	6	0.4	3.18	0.63	0.49	0	27	Красный
	Замок SBN-E22-374G (10 шт)	0	6	0.4	3.18	0.63	0.49	0	37	Черный
	Замок SBN-E22-474G (10 шт)	0	6	0.4	3.18	0.63	0.49	0	47	Зеленый
Набор замков DCBC-R18-1M4X	Замок DCBC-R18-16 (10 шт)	-19	14	1.3	4.0	0.55	0.8	0	16	Желтый
	Замок DCBC-R18-26 (10 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	26	Красный
	Замок SBC-R18-36G (10 шт)	-25	4	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-R18-46G (10 шт)	-25	4	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков DCBC-R22-1M4X	Замок DCBC-R22-16 (10 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	16	Желтый
	Замок DCBC-R22-26 (10 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	26	Красный
	Замок SBC-R22-36G (10 шт)	-25	4	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-R22-46G (10 шт)	-25	4	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков DCBC-	Замок DCBC-R18-16 (10 шт)	-19	14	1.3	4.0	0.55	0.8	0	16	Желтый

M18-1M4X	Замок DCBC-R18-26 (10 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	26	Красный
	Замок SBC-R18-361G (10 шт)	-25	4	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-R18-461G (10 шт)	-20	0	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков DCBC-M22-1M4X	Замок DCBC-R22-16 (10 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	16	Желтый
	Замок DCBC-R22-26 (10 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	26	Красный
	Замок SBC-R22-361G (10 шт)	-20	0	0.4	4.12	0.67	0.51	0	36	Черный
	Замок SBC-R22-461G (10 шт)	-20	0	0.4	4.12	0.67	0.51	0	46	Зеленый
Набор замков DCBN-R18-1M4X	Замок DCBN-R18-16 (10 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	16	Желтый
	Замок DCBN-R18-26 (10 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	26	Красный
	Замок SBN-R18-361G (10 шт)	-25	4	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-R18-461G (10 шт)	-25	4	0.4	4.14	0.69	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков DCBN-R22-1M4X	Замок DCBN-R22-16 (1 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	16	Желтый
	Замок DCBN-R22-26 (1 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	26	Красный
	Замок SBN-R22-361G (10 шт)	-23	35	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-R22-461G (10 шт)	-21	35	0.4	4.14	0.69	0.53	1	46	Зеленый
Набор замков DCBN-M18-1M4	Замок DCBN-M18-16 (10 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	16	Желтый
	Замок DCBN-M18-26 (10 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	26	Красный
	Замок SBN-M18-361G (10 шт)	-20	0	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-M18-461G (10 шт)	-20	0	0.4	4.14	0.69	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков DCBN-M22-1M4	Замок DCBN-M22-16 (10 шт)	-18	11	1.4	4.0	0.6	1	0	16	Желтый
	Замок DCBN-M22-26 (10 шт)	-14	10	0.4	4.0	0.7	0.66	0	26	Красный
	Замок SBN-M22-361G (10 шт)	-20	0	0.4	4.14	0.69	0.53	0	36	Черный
	Замок SBN-M22-461G (10 шт)	-20	0	0.4	4.14	0.69	0.53	0	46	Зеленый
Набор замков DRBC-R18-1M4X	Замок DRBC-R18-16 (10 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	16	Желтый
	Замок DRBC-R18-26 (10 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	26	Красный
	Замок DRBC-R18-36 (10 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-R18-46 (10 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков DRBC-R22-	Замок DRBC-R22-16 (10 шт)	-14	7	1.2	4.05	0.55	0.65	5	16	Желтый

1M4X	Замок DRBC-R22-26 (10 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	26	Красный
	Замок DRBC-R22-36 (10 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-R22-46 (10 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков DRBC-M18-1M4X	Замок DRBC-M18-16 (10 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	16	Желтый
	Замок DRBC-M18-26 (10 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	26	Красный
	Замок DRBC-M18-36 (10 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-M18-46 (10 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков DRBC-M22-1M4X	Замок DRBC-M22-16 (10 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	16	Желтый
	Замок DRBC-M22-26 (10 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	26	Красный
	Замок DRBC-M22-36 (10 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-M22-46 (10 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков DRBN-R22-1M4X	Замок DRBN-R22-16 (10 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	16	Желтый
	Замок DRBN-R22-26 (10 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	26	Красный
	Замок DRBN-R22-36 (10 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBN-R22-46 (10 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков DRBN-M22-1M4X	Замок DRBN-M22-16 (10 шт)	-14	20	1.2	4.05	0.6	1.1	2	16	Желтый
	Замок DRBN-M22-26 (10 шт)	-14	10	0.4	4.05	0.66	0.52	0	26	Красный
	Замок DRBN-M22-36 (10 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBN-M22-46 (10 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков TBC-R18-1M4X	Замок TBC-R18-16 (10 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	16	Желтый
	Замок TBC-R18-26 (10 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	26	Красный
	Замок DRBC-R18-36 (10 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-R18-46 (10 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков TBC-R22-1M4X	Замок TBC-R22-16 (10 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	16	Желтый
	Замок TBC-R22-26 (10 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	26	Красный
	Замок DRBC-R22-36 (10 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-R22-46 (10 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков TBC-M18-1M4X	Замок TBC-M18-16 (10 шт)	-16	25	1.5	4	0.85	0.9	0	16	Желтый
	Замок TBC-M18-26 (10 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	26	Красный
	Замок DRBC-M18-36 (10 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-M18-46 (10 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков TBC-M22-1M4X	Замок TBC-M22-16 (10 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	16	Желтый
	Замок TBC-M22-26 (10 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	26	Красный
	Замок DRBC-M22-36 (10 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-M22-46 (10 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый

Набор замков TBN-R18-1M4X	Замок TBN-R18-16 (10 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	16	Желтый
	Замок TBN-R18-26 (10 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	26	Красный
	Замок DRBC-R18-36 (10 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-R18-46 (10 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков TBN-R22-1M4X	Замок TBN-R22-16 (10 шт)	-13	17	1.5	3.70	0.85	1	3	16	Желтый
	Замок TBN-R22-26 (10 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	26	Красный
	Замок DRBN-R22-36 (10 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBN-R22-46 (10 шт)	-25	4	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков TBN-M18-1M4X	Замок TBN-M18-16 (10 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	16	Желтый
	Замок TBN-M18-26 (10 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	26	Красный
	Замок DRBC-M18-36 (10 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBC-M18-46 (10 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый
Набор замков TBN-M22-1M4X	Замок TBN-M22-16 (10 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	16	Желтый
	Замок TBN-M22-26 (10 шт)	-14	10	1.14	3.70	0.85	0.68	0	26	Красный
	Замок DRBN-M22-36 (10 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	36	Черный
	Замок DRBN-M22-46 (10 шт)	-20	0	0.4	4.05	0.66	0.52	0	46	Зеленый

8. Технические характеристики

На поверхности образца не должно быть инородных тел, трещин, царапин и вредных дефектов в процессе эксплуатации.

Упаковка должна обеспечивать защиту содержимого от повреждения и от загрязнений при транспортировании и хранении в соответствии с принятой коммерческой практикой.

9. Расшифровка символов, применяемых в маркировке упаковки

Таблица 3 – Обозначения и символы

	Код партии		Номер по каталогу
	Дата изготовления		Изготовитель
 eIFU идентификатор	Обратитесь к инструкции по применению или обратитесь к инструкции по применению в электронном виде		Не стерильно
	Запрет на повторное применение		Не допускать воздействия солнечного света
	Использовать до		

10. Условия хранения, транспортировки и эксплуатации

Хранение

Изделия и приспособления следует хранить в чистом виде и в чистом месте.

- температура: от 0 до +40°C;
- относительная влажность воздуха: 0 - 85 %;
- атмосферное давление: от 800 до 1060 гПа.

Транспортирование

При транспортировке не бросать. Транспортирование изделий и приспособлений, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

- температура: от 0 до +40°C;
- относительная влажность воздуха: 0 - 85 %;
- атмосферное давление: от 800 до 1060 гПа.

Эксплуатация

Изделия применяются в медицинских учреждениях: лечебно-профилактических учреждениях, стоматологических клиниках.

- температура: от 0 до +40°C;
- относительная влажность воздуха: 0 - 85 %;
- атмосферное давление: от 800 до 1060 гПа.

11. Очистка, дезинфекция изделия

Медицинские изделия предназначены для одноразового использования и поставляются нестерильными.

Очистка и дезинфекция:

Перед установкой медицинское изделие необходимо продезинфицировать 70% этиловым спиртом.

12. Утилизация

Медицинские изделия после использования их по назначению относятся к эпидемиологически опасным отходам (изделия, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, а также изделия, контактирующие с пациентами с инфекционными болезнями).

В данном случае медицинская организация осуществляет только сбор, обеззараживание и временное хранение вышеуказанных отходов. Обеззараживание должно проводиться в соответствии с требованиями санитарных правил и иных нормативных правовых актов той или иной страны во всех лечебно-профилактических учреждениях независимо от их профиля. Сбор осуществляют в пакеты или в контейнеры однократного применения с цветовой маркировкой, принятой для опасных медицинских отходов в помещении или в местах для временного хранения медицинских отходов до последующего транспортирования к месту уничтожения или утилизации.

Транспортированием медицинских отходов из медицинских учреждений, их утилизацией занимаются специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными в эпидемиологическом отношении медицинскими отходами.

Потребительская упаковка, бракованные изделия относятся к эпидемиологически безопасным отходам (неопасным отходам, не имеющим контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными), приближенным по составу к твердым бытовым отходам (ТБО).

Сбор эпидемиологически безопасных отходов осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты (за исключением пакетов цвета, принятого для опасных отходов). Одноразовые пакеты располагаются внутри многоразовых контейнеров. Емкости для сбора отходов должны быть промаркированы и установлены на специальной площадке (в помещении). Многоразовая тара после опорожнения подлежит мытью и дезинфекции. Порядок мытья и дезинфекции многоразовой тары определяется в соответствии со схемой обращения отходов в каждой конкретной организации.

Транспортирование и утилизация осуществляются с учетом требований, принятыми для данной территории, в соответствии с санитарным законодательством той или иной страны к содержанию территорий населенных мест и обращению с отходами производства и потребления.

Транспортированием и утилизацией медицинских отходов из медицинских учреждений занимаются специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с неопасными или опасными в эпидемиологическом отношении медицинскими отходами.

13. Срок годности

Срок годности изделий не ограничен.

14. Техническое обслуживание и ремонт

Изделие одноразовое, не требует технического обслуживания.

15. Перечень международных стандартов, которым соответствует медицинское изделие

EN ISO 13485, EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-3, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-10, EN ISO 10993-11, EN 1641, EN ISO 7405, EN ISO 27020, EN ISO 22674, EN ISO 10271, EN 62366, EN ISO 15223-1, EN 1041, MEDDEV 2.7/1 Ред. 4, MEDDEV 2.12/1 Ред. 8, MEDDEV 2.12/2 Ред. 2, ISTA 2017 2A.

Примечание: Стандарты используются в последней редакции: организация сохраняет и обновляет список справочных стандартов как запись собственной системы управления в соответствии с ISO 13485.

등부 2025년 제 271호

Registered No. 2025-271

인 증

NOTARIAL CERTIFICATE

위 문서-----에

Donghoon Seo -----

기재된 주식회사 지앤드아이

대표이사 김덕수 -----

attorney-in-fact of

GNI Co., LTD -----

CEO KIM DUG SOO -----

의 대리인 서동훈 -----은

본 공증인의 앞에서 위 본인이

서명 - 한 사실을 인정했다.

appeared before me and admitted
said principal's subscription to
the attached A Document -----

2025년 01월 23일

This is hereby attested on this

이 사무소에서 위 인증한다.

23rd day of Jan. 2025 at this office.

공증사무소 명칭

Name of the office

**공증
인가 법무법인 효원**

HYOWON LAW FIRM & NOTARY OFFICE

소 속 수원지방검찰청

Belong to Suwon

District Prosecutor's Office

소재지표시

Address of the office

수원시 영통구 동수원로 540

540, Dongsuwon-ro

법조빌딩 1층

Suwon-si, Gyeonggi-do, KOREA

최종은



J. O. Choi

공증인 공증담당변호사

Signature of the Notary Public

본 사무소는 인가번호 제15150호에 의거하여
2020년 02월 07일 법무부 장관으로부터
공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.

This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of
Korea, to act as Notary Public Since
7, Feb. 2020 Under Law No.15150.

[Перевод с английского и корейского языков на русский язык]

1 этаж, 540 Донсувон-ро,
Ёнтон-гу, Сувон-си
[Форма № 41]

**ЮРИДИЧЕСКАЯ И НОТАРИАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «ХЁВОН»**

Тел.: (031) 214-7733
Факс: (031) 214-7732

Регистрационный номер: 2025 – 271

[Печать: Юридическая и нотариальная компания «ХЁВОН», нотариус Ч. О. Чхве]

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**ЮРИДИЧЕСКАЯ И НОТАРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ХЁВОН»
(HYOWON LAW FIRM AND NOTARY OFFICE)**

540 Донсувон-ро, Сувон-си, Кёнги-до, КОРЕЯ
(540 Dongsuwon-ro, Suwon-si, Gyeonggi-do, KOREA)

[Тисненая печать: ЮРИДИЧЕСКАЯ И НОТАРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ХЁВОН»]

[Текст документа на русском языке]

[Печать: Компания «ДжиЭнАй Ко., Лтд.»]

[Печать: Юридическая и нотариальная компания «ХЕВОН», нотариус Ч. О. Чхве]

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.gov.ru

[Текст документа на корейском и английском языках идентичен]

Регистрационный номер: 2025 – 271

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Дунхун Сэо (Donghoon Seo),
поверенный КИМ ДУГ СУ, генерального директора
«ДжиЭнАй Ко., Лтд.»,
лично явившийся ко мне, признал указанную
подпись доверителя на прилагаемом Документе.

Настоящим засвидетельствовано 23 января 2025 года в указанной нотариальной конторе.

Наименование нотариальной конторы
Юридическая и нотариальная компания «ХЁВОН»
Относится к Прокуратуре округа Сувон
Адрес конторы:
540 Донсун-ро, Сувон-си, Кёнги-до, КОРЕЯ

[Печать: Юридическая и нотариальная компания «ХЁВОН», нотариус Ч. О. Чхве]

[Печать: Юридическая и нотариальная компания «ХЁВОН», нотариус Ч. О. Чхве]

/подпись/

Подпись нотариуса
Ч. О. ЧХВЕ (J. O. CHOI)

Настоящая нотариальная контора уполномочена Министром юстиции Республики Корея предоставлять нотариальные услуги с 7 февраля 2020 года в соответствии с законом № 15150.

Перевод данного текста выполнен переводчиком Малошовой Анной Андреевной

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать восьмого января две тысячи двадцать пятого года

Я, Веремий Юлия Игоревна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Малошовой Анны Андреевны.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2194-н/77-2025-2-2551

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

ПОДПИСЬ

Гербовая печать
нотариуса г. Москвы
Веремий Ю.И.

Гербовая печать
нотариуса г. Москвы
Веремий Ю.И.

Ю.И. Веремий

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 34 лист(-а,-ов).

Нотариус:

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать восьмого января две тысячи двадцать пятого года

Я, Веремий Юлия Игоревна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2194-н/77-2025-2-2552

Уплачено за совершение нотариального действия: 3500 руб. 00 коп.

Ю.И. Веремий

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 34 лист(-а,-ов).

Нотариус: